




JDENTALCARE

just smile

Maxilla-For-All®

JD Implants

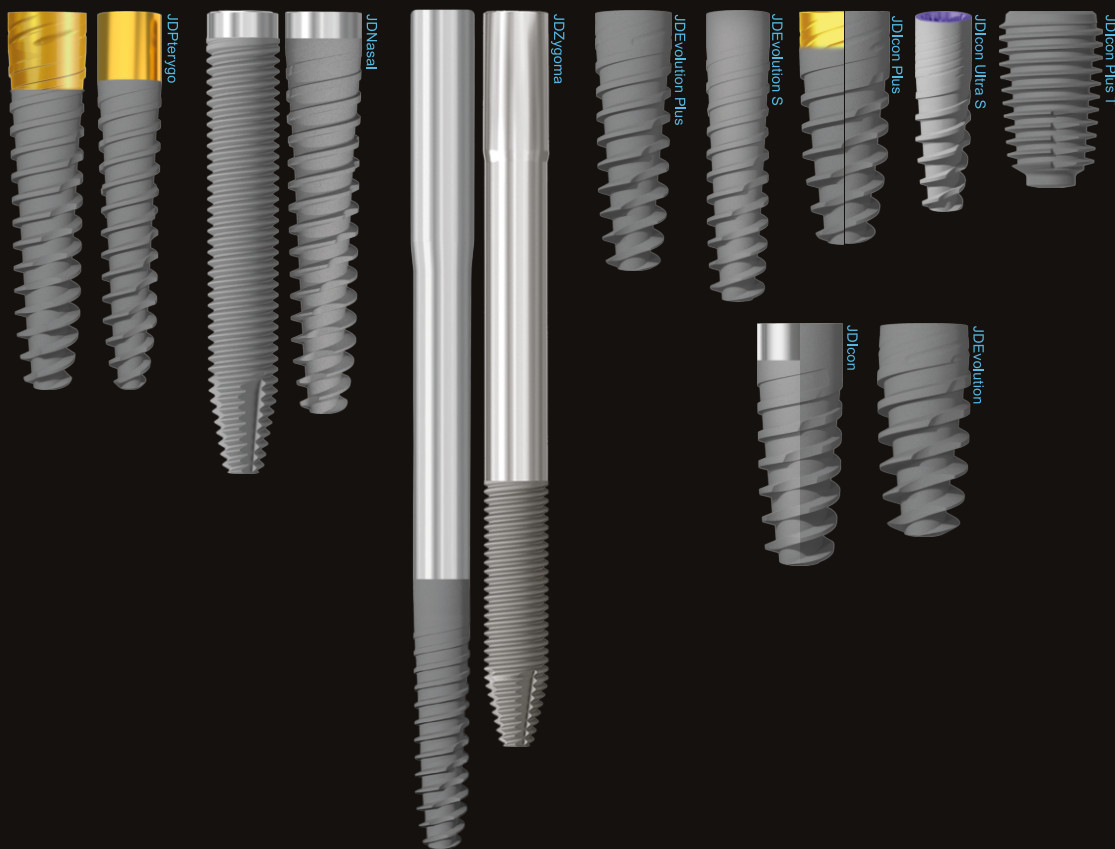

 **biogentech**

www.biogentech.pl



JDentalCare to włoska firma założona w 2006 roku w Modenie, która szybko stała się liderem w produkcji implantów dentystycznych.

Od momentu powstania JDentalCare koncentruje się na opracowywaniu prostych, wysokiej jakości i innowacyjnych systemów implantologicznych, tworząc skuteczne i dostępne rozwiązania dla stomatologów i pacjentów na całym świecie.

Firma aktywnie inwestuje w badania i współpracuje z krajowymi oraz międzynarodowymi instytutami badawczymi i uniwersytetami, aby pozostawać na czele osiągnięć technologicznych. JDentalCare oferuje również bezpłatne szkolenia dla stomatologów, umożliwiając im testowanie produktów oraz naukę zaawansowanych technik chirurgicznych.

Obecnie JDentalCare posiada sieć dystrybutorów na pięciu kontynentach, dostarczając innowacyjne i wysokiej jakości rozwiązania dla klinicystów i pacjentów na całym świecie.

Dzięki ciągłemu dążeniu do innowacji i najwyższej jakości, JDentalCare ugruntowała swoją pozycję jako zaufany partner stomatologów na całym świecie.



PROSTOTA. JAKOŚĆ. INNOWACJA.



Opracowujemy proste, wysokiej jakości i innowacyjne systemy implantologiczne, aby tworzyć skuteczne i dostępne rozwiązania dla klinicystów i pacjentów na całym świecie.

Pełna gama implantów dentystycznych, narzędzi, usług stomatologii cyfrowej oraz szkoleń zaprojektowanych, aby pomóc lekarzom poprawiać życie pacjentów.

Razem sprawmy, by ludzie po prostu znów się uśmiechali.

CERTYFIKOWANE I KWALIFIKOWANE PRODUKTY



Wierzymy, że dbałość o szczegóły, jakość surowców oraz rygorystyczne procesy produkcyjne stanowią podstawę niezawodnych i wysokowydajnych produktów. Dlatego stosujemy to podejście na każdym etapie – od definicji projektu aż po jego ostateczną realizację. System Zarządzania Jakością (QMS) JDentalCare jest certyfikowany zgodnie z najsurowszymi międzynarodowymi standardami: nasze produkty posiadają certyfikat EC zgodny z Dyrektywą Europejską oraz są zarejestrowane w amerykańskiej FDA.

Produkty JDentalCare są certyfikowane w ponad 60 krajach na całym świecie, na wszystkich 5 kontynentach. Wewnętrzne procesy zarządzania jakością JDentalCare są certyfikowane przez TÜV SÜD zgodnie z programem MDSAP, unikalnym, międzynarodowo uznawanym programem certyfikacji urządzeń medycznych.

KONTROLA JAKOŚCI NA KAŻDYM ETAPIE PRODUKCJI



JDentalCare wyróżnia się wyjątkową troską o jakość na każdym etapie produkcji swoich wyrobów. Firma zapewnia najwyższą uwagę od momentu projektowania, przez wytwarzanie urządzeń, procesy chemicznej obróbki powierzchni, aż po dekontaminację i pakowanie w sterylnych warunkach Clean Room o klasie ISO7.

Aby osiągnąć zaawansowany poziom jakości, JDentalCare nie tylko przestrzega międzynarodowych standardów regulacyjnych, ale także wdraża procedury operacyjne dostosowane do specyfiki każdego produktu i jego zastosowania. Ich podejście wyklucza przypadkowość – od doboru certyfikowanych surowców, przez obróbkę na nowoczesnych maszynach CNC, po kontrolowane i walidowane procesy produkcyjne.

RYGORYSTYCZNE TESTY DLA BEZPIECZEŃSTWA I TRWAŁOŚCI

JDentalCare przeprowadza szczegółowe kontrole czystości powierzchni implantów, wykrywając wszelkie pozostałości i zanieczyszczenia za pomocą zaawansowanego sprzętu badawczego.

Dzięki wykorzystaniu mikroskopii elektronowej SEM firma może precyzyjnie sprawdzać stan morfologiczny powierzchni implantów dentystycznych. Analizy te pozwalają na pomiar chropowatości powierzchni w mikrometrowym zakresie oraz identyfikację ewentualnych zanieczyszczeń na poziomie materiałowym z najwyższą dokładnością.



Wszystkie linie implantów JDentalCare oraz dedykowane komponenty poddawane są testom zmęczeniowym zgodnie z normą ISO 14801. Testy te symulują obciążenia występujące podczas żucia, co pozwala zagwarantować bezpieczeństwo i długotrwałą trwałość produktów przez cały okres ich użytkowania.

Dr. Tommaso Grandi –

Ekspert w dziedzinie chirurgii
stomatologicznej i implantologii

Dr. Tommaso Grandi to renomowany włoski ekspert w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i implantologii, prowadzący praktyczne kursy szkoleniowe dla lekarzy stomatologów na całym świecie.

- Ponad 20 lat doświadczenia w chirurgii stomatologicznej i implantologii
- Autor innowacyjnych technik i protokołów leczenia
- Praktyczna wiedza, którą możesz zastosować już następnego dnia
- Szkolenie w przyjaznej atmosferze z możliwością bezpośredniego kontaktu z ekspertem.

POKONYWANIE WYZWAŃ W PEŁNOŁUKOWEJ REHABILITACJI



Z elastycznością, precyzją i profesjonalizmem – poznaj innowacyjne rozwiązania JDentalCare!


Odkryj Maxilla-For-All® – przełomowy system łączący implanty trans-sinusowe, skrzydłowe i jarzmowe.

Poszerz swoje możliwości leczenia - dzięki nowym technikom będziesz w stanie pomagać większej liczbie pacjentów, przyciągając jednocześnie nowych do swojej praktyki.

Podczas kursu poznasz wszystkie kroki planowania i przeprowadzania skutecznej operacji pełnego łuku w przypadku atrofii szczęki. Dołącz do szkolenia i podnieś swoje kwalifikacje w implantologii na najwyższy poziom!



PRODUKUJEMY IMPLANTY DENTYSTYCZNE DO WSZYSTKICH PAŃSTWA POTRZEB

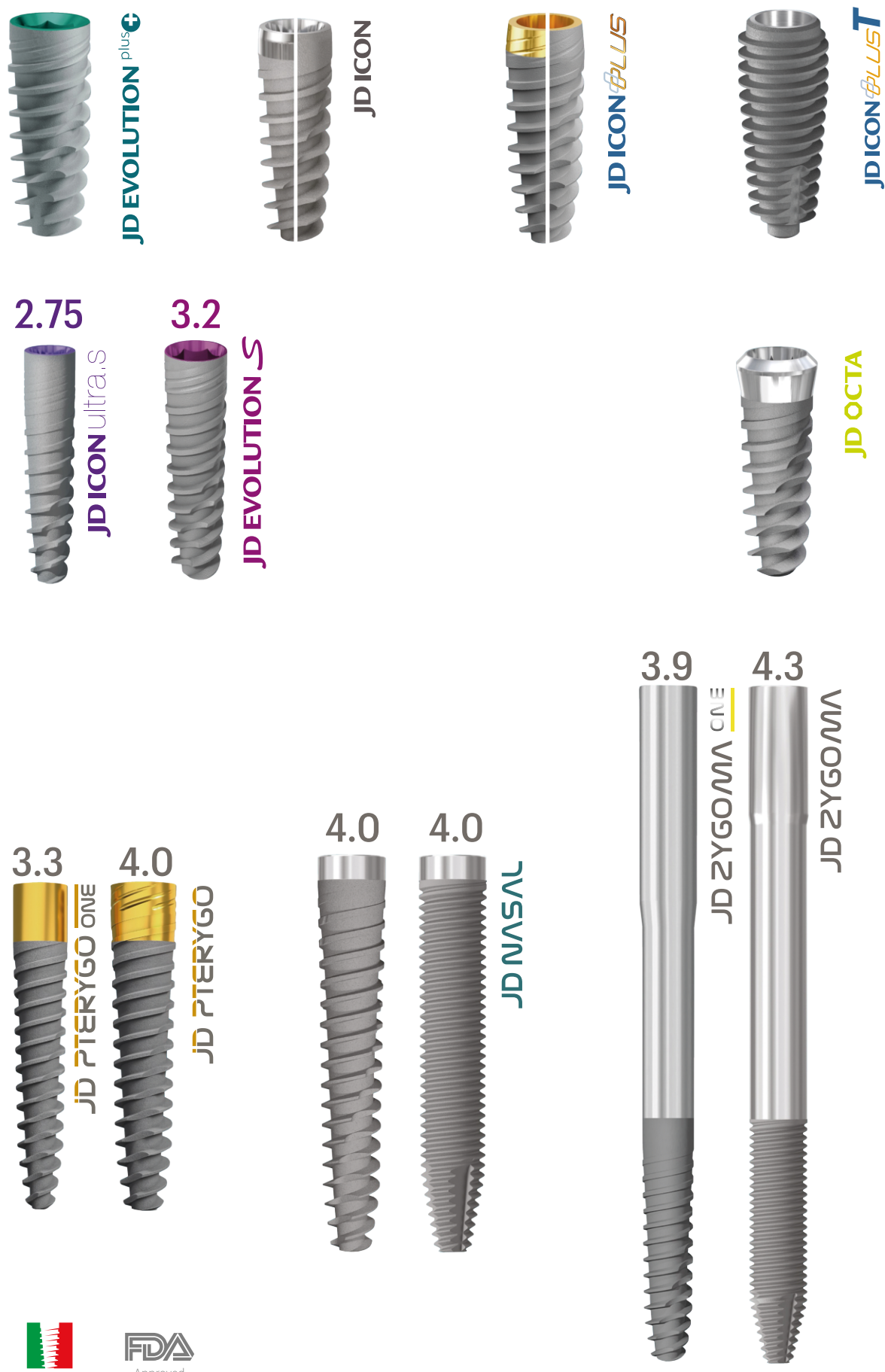




J DENTAL CARE

just smile

JD ICON PLUS

System implantacji

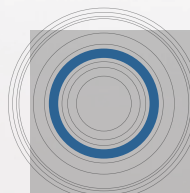

Połączenie stożkowe




Made in Italy

SYSTEM IMPLANTACJI OBRÓBKA POWIERZCHNI


JEDNO POŁĄCZENIE dla wszystkich rozmiarów elementów, co upraszcza procedurę odbudowy

DOSKONAŁA PIERWOTNA STABILNOŚĆ nawet w trudnych warunkach kostnych

DUŻY ASORTYMENT KOMPONENTÓW PROTETYCZNYCH do najlepszych efektów estetycznych

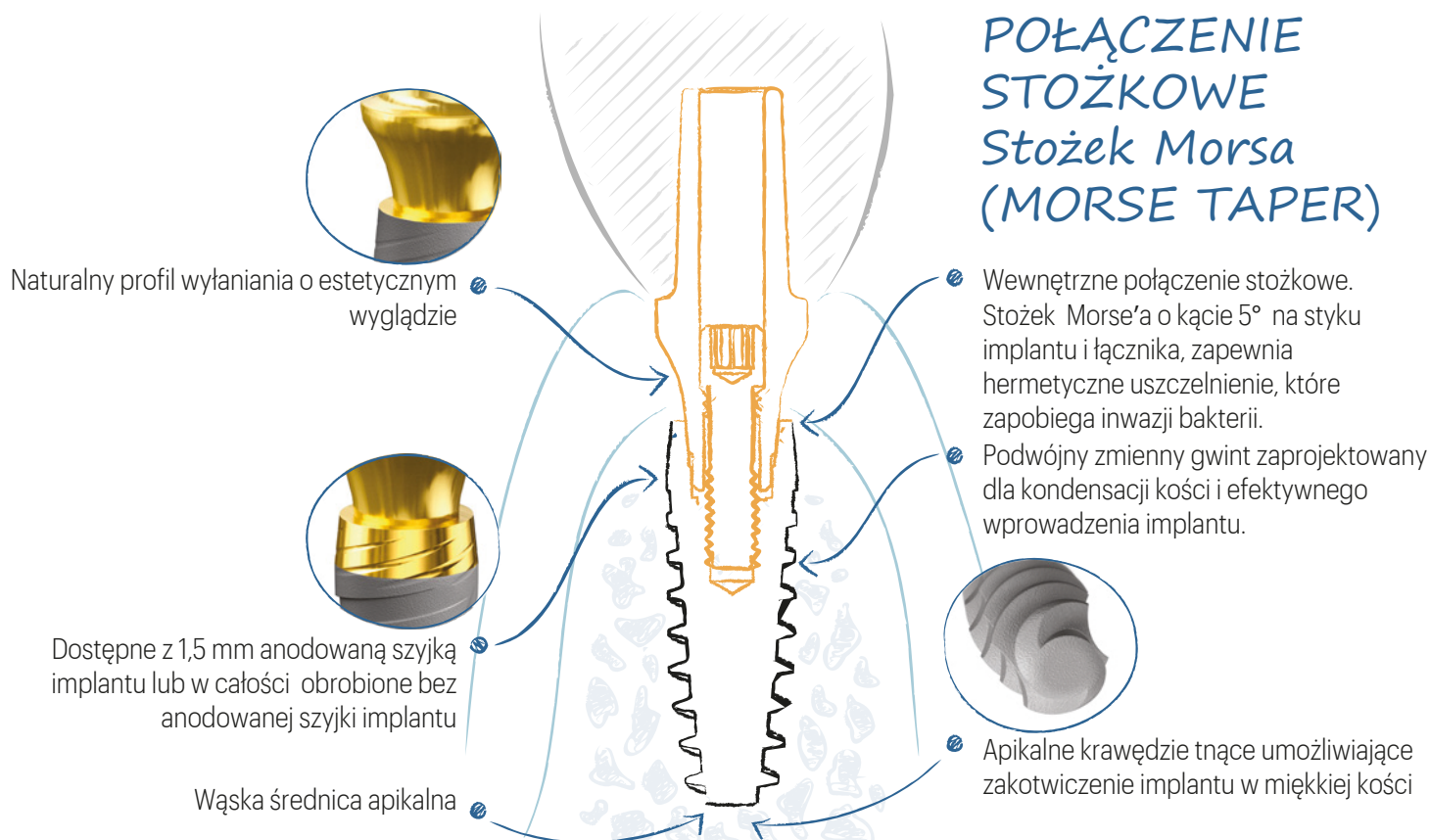

OBRÓBKA POWIERZCHNI IMPLANTU

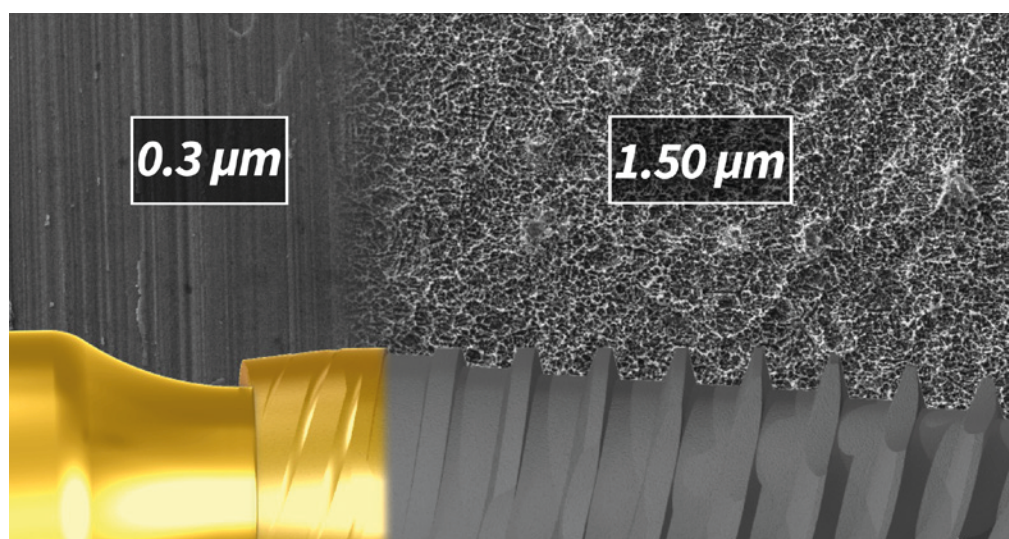

Implanty stomatologiczne JDIcon Plus są dostępne w dwóch wersjach:

1. W całości powierzchnię poddaną obróbce SLA.
2. Z anodowaną szyjką implantu o wysokości 1,5 mm oraz powierzchnią poddaną obróbce SLA.

Powierzchnia SLA jest uzyskiwana poprzez proces piaskowania dużymi cząstkami oraz trawienia kwasowego (SLA), co gwarantuje optymalną mikroporowatą powierzchnię implantu i umożliwia skuteczną osteointegrację.


Uwaga: Powyższy obraz został wygenerowany za pomocą mikroskopu skaningowego elektronowego (SEM) i przedstawia wartości chropowatości, wyrażone jako Ra, dwóch powierzchni implantu poddanych obróbce SLA i anodowaniu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU


Implanty stomatologiczne JDIcon Plus są dostępne w średnicach i długościach podanych w poniższej tabeli:

ŚREDNICA IMPLANTU	ŚREDNICA WIERZCHOŁKOWA	INTERFEJS ŁĄCZNIKA	ŚREDNICA PLATFORMY	DŁUGOŚĆ						
Ø 3,7	2,4	3,1	3,7		8	10	11,5	13	15	18
Ø 4,3	2,8	3,1	4,0	6	8	10	11,5	13	15	18
Ø 5,0	3,2	3,1	4,8	6	8	10	11,5	13		

Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w milimetrach (mm).

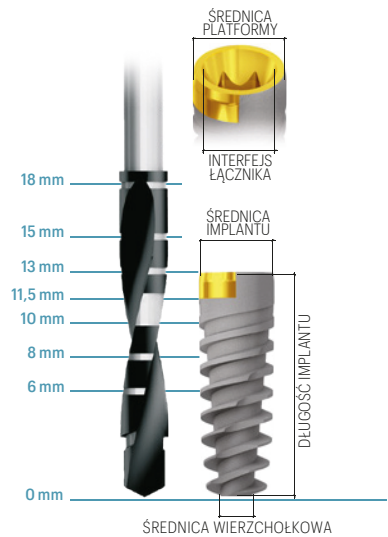

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA KOŃCÓWKI	ŚREDNICA PLATFORMY	INTERFEJS ŁĄCZNIKA
JDIcon Plus				
Ø 3,7	8	2.8	3.7	3.1
	10, 11.5, 13, 15, 18	2.4		
Ø 4,3	6	2.4	3.8	3.1
	8	3.55	4	
	10, 11.5, 13, 15, 18	2.8		
Ø 5,0	6	2.8	4.7	3.1
	8	3.2	4.8	
	10, 11.5, 13			
JDIcon Plus PT				
Ø 4,0	13, 15, 18, 20	2.4	4.0	3.1
JDIcon Plus LE				
Ø 4,0	18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	2.4	4.0	3.1

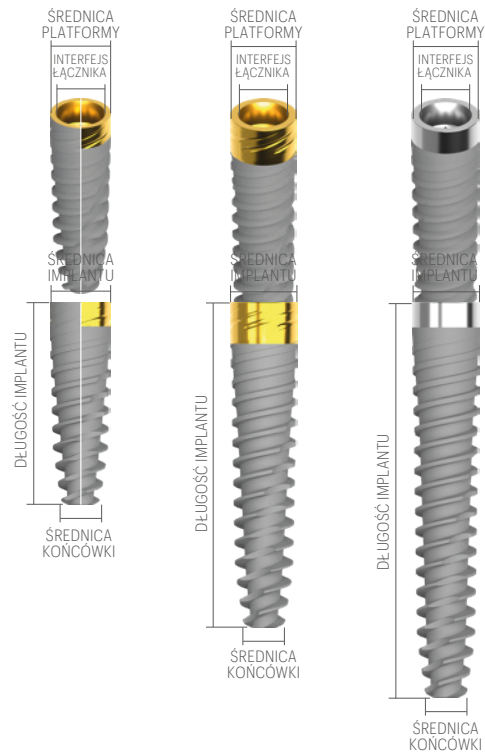

KATALOG PRODUKTÓW

Uwaga: wszystkie wymiary średnic i długości podane są w mm

JDIcon Plus:

Ø 3,7


IC37080.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 8
IC37100.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 10
IC37115.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 11,5
IC37130.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 13
IC37150.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 15
IC37180.	JDIcon Plus Ø 3,7 L 18

Ø 4,3

IC43060.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 6
IC43080.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 8
IC43100.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 10
IC43115.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 11,5
IC43130.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 13
IC43150.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 15
IC43180.	JDIcon Plus Ø 4,3 L 18

Ø 5,0

IC50060.	JDIcon Plus Ø 5,0 L 6
IC50080.	JDIcon Plus Ø 5,0 L 8
IC50100.	JDIcon Plus Ø 5,0 L 10
IC50115.	JDIcon Plus Ø 5,0 L 11,5
IC50130.	JDIcon Plus Ø 5,0 L 13

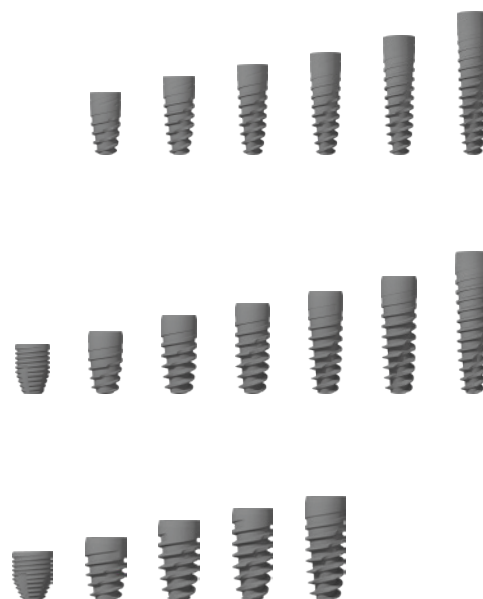

JDIcon Plus (anodowana szyjka):

Ø 3,7

IC37080,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 8
IC37100,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 10
IC37115,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 11,5
IC37130,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 13
IC37150,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 15
IC37180,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 18

Ø 4,3

IC43060,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 6
IC43080,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 8
IC43100,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 10
IC43115,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 11,5
IC43130,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 13
IC43150,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 15
IC43180,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 18

Ø 5,0

IC50060,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 6
IC50080,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 8
IC50100,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 10
IC50115,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 11,5
IC50130,	JDIcon Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 13




JDIcon Plus PT:

ICPT40130.	JDIcon Plus PT Ø 4.0 L 13
ICPT40150.	JDIcon Plus PT Ø 4.0 L 15
ICPT40180.	JDIcon Plus PT Ø 4.0 L 18
ICPT40200.	JDIcon Plus PT Ø 4.0 L 20

JDIcon Plus LE:

ICNAE40180.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 18
ICNAE40200.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 20
ICNAE40220.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 22
ICNAE40240.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 24
ICNAE40260.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 26
ICNAE40280.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 28
ICNAE40300.	JDIcon Plus LE Ø 4.0 L 30

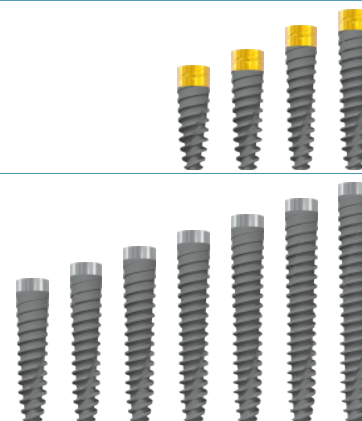

Rozwiązania protetyczne:

Uwaga: Wszystkie komponenty protetyczne są takie same jak w linii implantów JDIcon Plus.

Uwaga: W celu zapoznania się z procedurą chirurgiczną dotyczącą wszczepiania implantów JDIcon Plus PT oraz JDIcon Plus LE, prosimy o skorzystanie z instrukcji chirurgicznej dostępnej na stronie www.jdentalcare.com

PROTOKOŁY WIERCENIA

Zaleca się stosowanie wskazówek dotyczących następującego protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilizację implantu.

	WYGOJONA KOŚĆ		KOŚĆ POEKSTRAKCYJNA		 Krótki implant L 6mm JDIcon Plus wszczepienie w szczęce	
ŚREDNICA IMPLANTU	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ		
przygotowanie miejsca w szczęce						
Ø 3,7	2,0 2,4 2,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 przy wejściu	 Krótki implant L 6mm JDIcon Plus wszczepienie w żuchwie	
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6-8mm 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu		
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm		
przygotowanie miejsca w żuchwie					 Krótki implant L 6mm JDIcon Plus wszczepienie w szczęce	
Ø 3,7	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu		
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu 4,0 przy wejściu do drugiego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 4,4 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu		
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 przy wejściu 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu	krótkie Ø 5,0 L 6 Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 2.0mm, Ø 2.4mm i Ø 2.8mm Zakończ wiertłem Ø 5mm L6 JDIcon Plus+ JDDICS5	

Uwaga: wszystkie wymiary podane są w mm




J DENTAL CARE

just smile

JD ICON *PLUS* T

Moc T designu

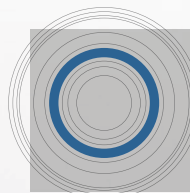


Połączenie stożkowe



Made in Italy

CECHY PRODUKTU

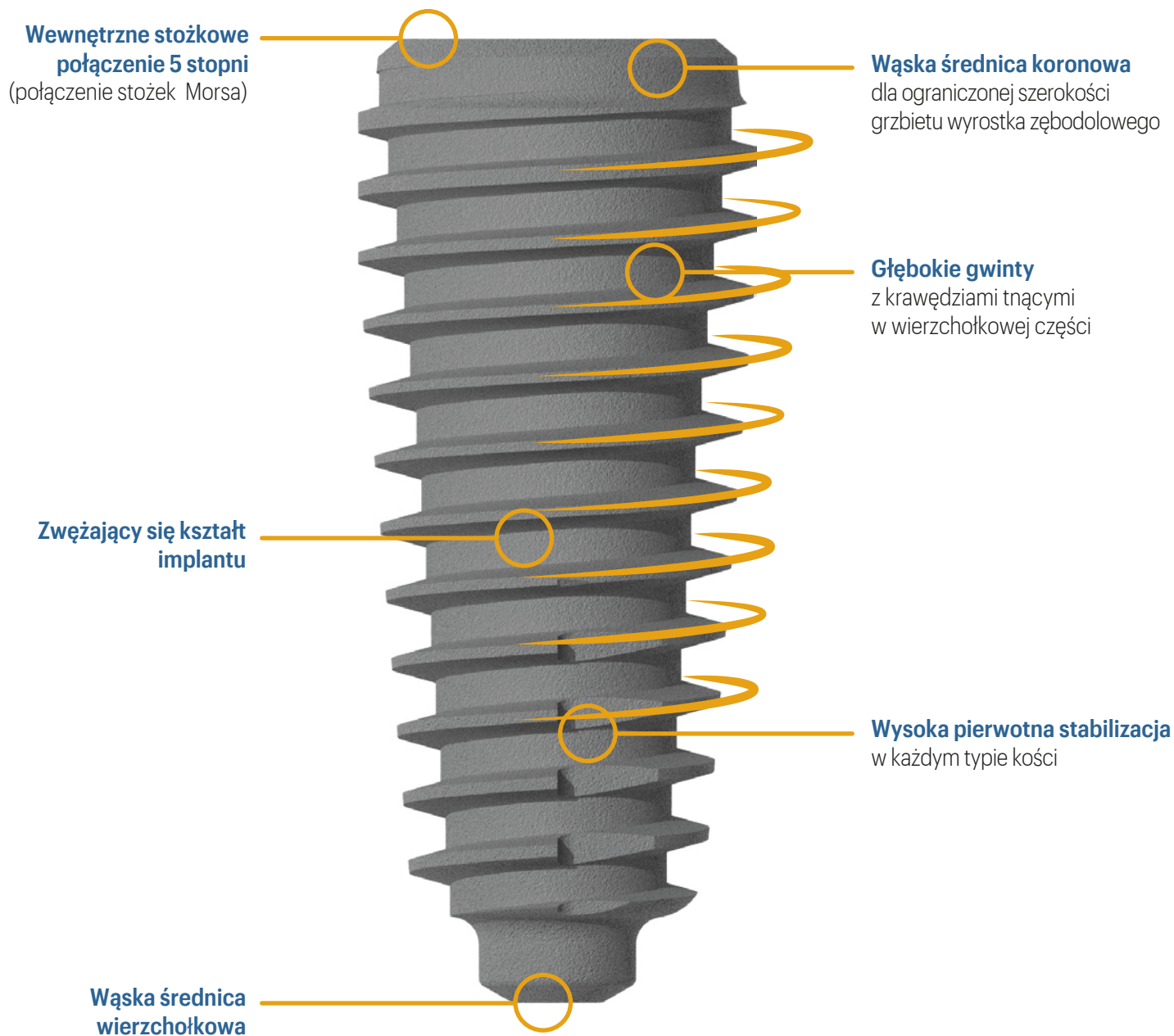


SPECYFIKACJA PRODUKTU

Implanty dentystyczne JDIcon Plus T są dostępne w średnicach i długościach podanych w poniższej tabeli:

ŚREDNICA IMPLANTU	ŚREDNICA WIERZCHOŁKOWA	INTERFEJS ŁĄCZNIKA	ŚREDNICA PLATFORMY	ŚREDNICA SKOŚNA	NAJSZERSZA ŚREDNICA GWINTU	DŁUGOŚĆ			
Ø 3,5	1,6	3,1	3,4	3,8	4,0		10	11,5	13
Ø 4,0	1,75	3,1	3,6	4,0	4,4	8,5	10	11,5	13
Ø 4,5	1,75	3,1	3,6	4,0	4,9	8,5	10	11,5	13
Ø 5,0	2,2	3,1	4,0	4,5	5,5	8,5	10	11,5	13
Ø 6,0	3,0	3,1	5,0	5,5	6,4	8,5	10	11,5	

Uwaga: wszystkie wymiary podane są w mm

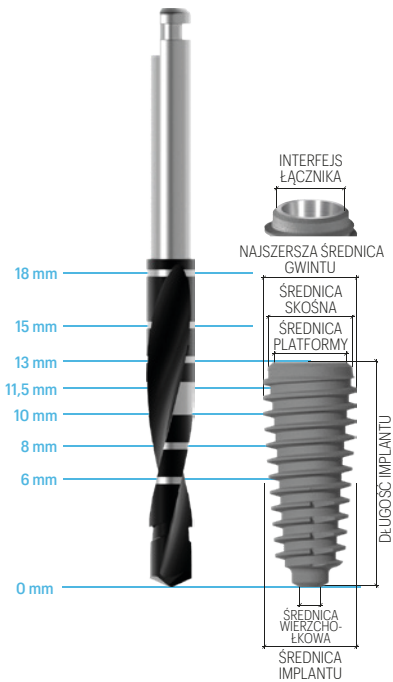

KATALOG PRODUKTÓW

Uwaga: wszystkie wymiary średnic i długości podane są w mm

Implanty:

IM37100-0	JDIcon Plus T Ø 3.5 L 10
IM37115-0	JDIcon Plus T Ø 3.5 L 11.5
IM37130-0	JDIcon Plus T Ø 3.5 L 13
ICT40080.	JDIcon Plus T Ø 4.0 L 8.5
ICT40100.	JDIcon Plus T Ø 4.0 L 10
ICT40115.	JDIcon Plus T Ø 4.0 L 11.5
ICT40130.	JDIcon Plus T Ø 4.0 L 13
ICT45080.	JDIcon Plus T Ø 4.5 L 8.5
ICT45100.	JDIcon Plus T Ø 4.5 L 10
ICT45115.	JDIcon Plus T Ø 4.5 L 11.5
ICT45130.	JDIcon Plus T Ø 4.5 L 13
ICT50080.	JDIcon Plus T Ø 5.0 L 8.5
ICT50100.	JDIcon Plus T Ø 5.0 L 10
ICT50115.	JDIcon Plus T Ø 5.0 L 11.5
ICT50130.	JDIcon Plus T Ø 5.0 L 13
ICT55080.	JDIcon Plus T Ø 6.0 L 8.5
ICT55100.	JDIcon Plus T Ø 6.0 L 10.0
ICT55115.	JDIcon Plus T Ø 6.0 L 11.5



Rozwiązania protetyczne:

Uwaga: Wszystkie komponenty protetyczne są takie same jak w linii implantów JDIcon Plus.

PROTOKOŁY WIERCENIA

Zaleca się stosowanie wskazówek dotyczących następującego protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilizację implantów.

ŚREDNICA IMPLANTU	WYGOJONA KOŚĆ		KOŚĆ POEKSTRAKCYJNA	
	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ
przygotowanie miejsca w szczęcie				
Ø 3,5	2,0 2,4 2,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 przy wejściu
Ø 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6-8mm 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu
Ø 4,5	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm 4,0 przy wejściu
Ø 6,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu 4,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm
przygotowanie miejsca w żuchwie				
Ø 3,5	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu
Ø 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do drugiego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 4,4 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu
Ø 4,5	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu
Ø 6,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm



Uwaga: wszystkie wymiary podane są w mm

JDentalCare, logo JDentalCare i inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie, z wyjątkiem specjalnie wymienionych wyjątków, są własnością JDentalCare.
Obrazy produktów przedstawione w tej broszurze niekoniecznie są w skali.
Uwaga: Nie wszystkie produkty wyprodukowane przez JDentalCare i przedstawione w tej broszurze zostały zatwierdzone/regulowane do sprzedaży we wszystkich krajach lub zostały licencjonowane zgodnie z przepisami FDA.
W celu uzyskania informacji o aktualnym asortymencie produktów i dostępności, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem JDentalCare. Tylko na receptę.
Ostrzeżenie: Prawo federalne (USA) ogranicza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie licencjonowanym dentystom.
Zobacz instrukcję użytkowania, aby uzyskać więcej informacji, takich jak wskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania.

Protetyka linii JDIcon Plus


Śruba zamykająca:

ICCS.	Śruba zamykająca JDIcon Plus	
-------	------------------------------	---

Śruba gojąca:

ICHA43.	Śruba gojąca Ø 4.0 H 3.0 JDIcon Plus	
ICHA45.	Śruba gojąca Ø 4.0 H 5.0 JDIcon Plus	
ICHA47.	Śruba gojąca Ø 4.0 H 7.0 JDIcon Plus	
ICHA53.	Śruba gojąca Ø 5.0 H 3.0 JDIcon Plus	
ICHA55.	Śruba gojąca Ø 5.0 H 5.0 JDIcon Plus	
ICHA57.	Śruba gojąca Ø 5.0 H 7.0 JDIcon Plus	
ICHA63.	Śruba gojąca Ø 6.0 H 3.0 JDIcon Plus	
ICHA65.	Śruba gojąca Ø 6.0 H 5.0 JDIcon Plus	
ICHA67.	Śruba gojąca Ø 6.0 H 7.0 JDIcon Plus	
ICHA753.	Śruba gojąca Ø 7.5 H 3.0 JDIcon Plus	
ICHA755.	Śruba gojąca Ø 7.5 H 5.0 JDIcon Plus	


Transfer wyciskowy:

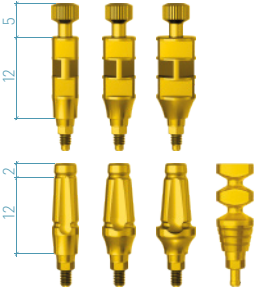ŁYŻKA OTWARTA		
ICICOT4C.	Transfer wyciskowy łyżka otwarta Ø 4.0 JDIcon Plus	
ICICOT5C.	Transfer wyciskowy łyżka otwarta Ø 5.0 JDIcon Plus	
ICICOT6C.	Transfer wyciskowy łyżka otwarta Ø 6.0 JDIcon Plus	
ŁYŻKA ZAMKNIĘTA		
ICICCT4C.	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Ø 4.0 JDIcon Plus	
ICICCT5C.	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Ø 5.0 JDIcon Plus	
ICICCT6C.	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Ø 6.0 JDIcon Plus	
ICICCT1C.	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Direct Press Fit JDIcon Plus	

Tymczasowy łącznik:

ICTAEC.	Łącznik tymczasowy z hexem JDIcon Plus	
ICTANEC.	Łącznik tymczasowy bez hexa JDIcon Plus	
		Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik prosty:

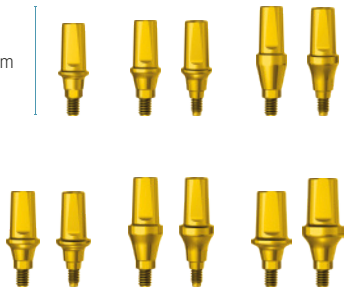ICA130C.	Łącznik prosty Ø 4.5 H 1.5 JDIcon Plus	
ICSA4520C.	Łącznik prosty Ø 4.5 H 2.0 JDIcon Plus	
ICSA4520NEC.	Łącznik prosty bez hexa Ø 4.5 H 2.0 JDIcon Plus	
ICSA4540C.	Łącznik prosty Ø 4.5 H 4.0 JDIcon Plus	
ICSA4540NEC.	Łącznik prosty bez hexa Ø 4.5 H 4.0 JDIcon Plus	
ICSA5020C.	Łącznik prosty Ø 5.0 H 2.0 JDIcon Plus	
ICSA5020NEC.	Łącznik prosty bez hexa Ø 5.0 H 2.0 JDIcon Plus	
ICSA5040C.	Łącznik prosty Ø 5.0 H 4.0 JDIcon Plus	
ICSA5040NEC.	Łącznik prosty bez hexa Ø 5.0 H 4.0 JDIcon Plus	
ICSA6020C.	Łącznik prosty Ø 6.0 H 2.0 JDIcon Plus	
ICSA6040C.	Łącznik prosty Ø 6.0 H 4.0 JDIcon Plus	
		Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm


Łącznik GP:

ICGP40C.	Łącznik GP Ø 4.0 JDIcon Plus	
ICGP50C.	Łącznik GP Ø 5.0 JDIcon Plus	
ICGP60C.	Łącznik GP Ø 6.0 JDIcon Plus	
IC15GPAEC.	Łącznik GP 5° JDIcon Plus	
IC25GPAEC.	Łącznik GP 25° JDIcon Plus	
		Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik anatomiczny:

IC15A15C.	Łącznik anatomiczny kątowy 15° H 1.5 JDIcon Plus	
IC15A30C.	Łącznik anatomiczny kątowy 15° H 3.0 JDIcon Plus	
IC25A15C.	Łącznik anatomiczny kątowy 25° H 1.5 JDIcon Plus	
IC25A30C.	Łącznik anatomiczny kątowy 25° H 3.0 JDIcon Plus	
		Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik kobaltowo-chromowy:

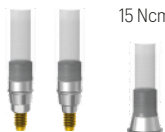ICCCEC.	Łącznik kobaltowo-chromowy aktywny JDIcon Plus	
ICCCNEC.	Łącznik kobaltowo-chromowy pasywny JDIcon Plus	
EVCACCNEC	Łącznik kobaltowo-chromowy typu Multi-unit pasywny JDEvolution	
		Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Śruba protetyczna:

ICS.	Śruba protetyczna prosta	
ICSA.	Śruba protetyczna kątowa	
		Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Dodatkowy łącznik:

ICEXA5520C.	Łącznik prosty ekstra Ø 5.5 H 2.0 JDIcon Plus
ICEXA5540C.	Łącznik prosty ekstra Ø 5.5 H 4.0 JDIcon Plus
ICEXTIBC.	TiBase ekstra z hexem Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIBNEC.	TiBase ekstra bez hexa Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB15C.	TiBase ekstra z hexem Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB15NEC.	TiBase ekstra bez hexa Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB30C.	TiBase ekstra z hexem Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB30NEC.	TiBase ekstra bez hexa Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDIcon Plus



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik Octa:

ICOA15.	Łącznik Octa H 1.5 JDIcon Plus
ICOA30.	Łącznik Octa H 3.0 JDIcon Plus
ICOA40.	Łącznik Octa H 4.0 JDIcon Plus
ICOA50.	Łącznik Octa H 5.0 JDIcon Plus
ICOA60.	Łącznik Octa H 6.0 JDIcon Plus
ICOAHC.	Czapeczka gojąca JDIcon Plus
ICOAHC54.	Czapeczka gojąca D 5.0 H 4.0 JDIcon Plus
ICOAICOTC.	Transfer wyciskowy otwarta łyżka dla Octa
ICOAICOTEC.	Transfer wyciskowy otwarta łyżka aktywny dla Octa
ICOAR.	Analog łącznika Octa
ICOAPS.	Śruba protetyczna dla Octa
ICOAPSA.	Śruba protetyczna kątowa dla Octa
ICOWANEC.	Wax łącznik pasywny dla Octa
ICOATANEC.	Łącznik tymczasowy pasywny dla Octa
ICOATAEC.	Łącznik tymczasowy aktywny dla Octa
ICOAITC.	Interfejs CAD CAM Octa (Ø4.45 C7.3)
ICOAITEC.	Interfejs CAD CAM aktywny Octa (Ø4.45 C7.3)
ICOATIBC.	TiBase Octa (Ø4.45 C5.0)
ICOATIBEC.	TiBase Octa aktywny (Ø4.45 C5.0)
ICOASBCEC.	ScanBody Octa
ICOASBCEEC.	ScanBody aktywny Octa
ICOARC.	Analog CAD CAM Octa

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik typu Multi-unit :

ICCA15C.	Łącznik typu Multi-unit H 1.5
ICCA30C.	Łącznik typu Multi-unit H 3.0
ICCA40C.	Łącznik typu Multi-unit H 4.0
ICCA1725C.	Łącznik typu Multi-unit kątowy 17° H 2.5
ICCA1735C.	Łącznik typu Multi-unit kątowy 17° H 3.5
ICCA3025C.	Łącznik typu Multi-unit kątowy 30° H 2.5
ICCA3035C.	Łącznik typu Multi-unit kątowy 30° H 3.5
ICCA1740NC.	Łącznik typu Multi-unit Slim Plus 17° H 4.0
ICCA1750NC.	Łącznik typu Multi-unit Slim Plus 17° H 5.0
ICCA3050NC.	Łącznik typu Multi-unit Slim Plus 30° H 5.0
ICCA3060NC.	Łącznik typu Multi-unit Slim Plus 30° H 6.0
ICCASA.	Śruba kątowa dla łącznika typu Multi-unit JDIcon Plus
EVCAPS.	Śruba protetyczna dla łącznika typu Multi-unit JDEvolution
EVCAPSA.	Śruba protetyczna kątowa dla łącznika typu Multi-unit
EVCAICOTEC.	Transfer wyciskowy otwarta łyżka aktywny dla łącznika typu Multi-unit
EVCAICOTC.	Transfer wyciskowy otwarta łyżka dla łącznika typu Multi-unit
EVCAICOTLC.	Transfer wyciskowy długi łyżka otwarta dla łącznika typu Multi-unit
EVCAICOTO2.	Śruba dla transferu wyciskowego otwarta łyżka dla łącznika typu Multi-unit
EVCAICOTO4.	Śruba dla transferu wyciskowego otwarta łyżka długidła łącznika typu Multi-unit
EVCAICCTC.	Transfer wyciskowy zamknięta łyżka dla łącznika typu Multi-unit
EVCAHC.	Czapeczka gojąca dla łącznika typu Multi-unit
EVCAHCL.	Czapeczka gojąca H 6.0 dla łącznika typu Multi-unit
EVCAHC9.	Czapeczka gojąca H 9.0 dla łącznika typu Multi-unit
EVCAHCB.	Czapeczka gojąca Peek dla łącznika typu Multi-unit
EVCAGPAEC.	Łącznik GP aktywny dla łącznika typu Multi-unit
EVCAGPANEC.	Łącznik GP pasywny dla łącznika typu Multi-unit
EVCATANWSC.	Łącznik tymczasowy pasywny gładki dla spawania dla łącznika typu Multi-unit
EVCATANEC.	Łącznik tymczasowy pasywny dla łącznika typu Multi-unit
EVCATANWC.	Łącznik tymczasowy pasywny dla spawania dla łącznika typu Multi-unit
EVCWANEC.	Wax-Up łącznik pasywny dla łącznika typu Multi-unit
EVCAAR.	Analog łącznika typu Multi-unit

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm




Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm

TiBase, JDScanBody i analog laboratoryjny Implantu CAD CAM:

ICSBCEC.	ScanBody aktywny JDIcon Plus
EVCASBCEC	ScanBody dla łącznika typu Multi-unit JDEvolution
EVCASBCEEC	ScanBody aktywny dla łącznika typu Multi-unit
EVCASBCECSC:	On Top ScanBody dla łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus*
JDSCGIOS	ScanBody Full Arch Tracer
JDSCGIOSE	ScanBody Full Arch Tracer Hexagonal
JDSCGIOSR	ScanBody Rectangular Full Arch Tracer
ICH5B53.	On Top ScanBody z hexem Ø 5.0 H 3.0 JDIcon Plus
ICH5B55.	On Top ScanBody z hexem Ø 5.0 H 5.0 JDIcon Plus
ICH5B57.	On Top ScanBody z hexem Ø 5.0 H 7.0 JDIcon Plus
ICTIBC.	TiBase z hexem Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIBNEC.	TiBase bez hexa Ø4.25 H 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB15C.	TiBase z hexem Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB15NEC.	TiBase bez hexa Ø4.25 H 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB30C.	TiBase z hexem Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB30NEC.	TiBase bez hexa Ø4.25 H 3.0 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIBNC.	TiBase długi aktywny Ø4.4 H 0.5 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIBNENC.	TiBase długi pasywny Ø4.4 H 0.5 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB15NC.	TiBase długi z hexem Ø4.4 H 1.5 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB15NENC.	TiBase długi bez hexa Ø4.4 H 1.5 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB30NC.	TiBase długi z hexem Ø4.4 H 3.0 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB30NENC.	TiBase długi bez hexa Ø4.4 H 3.0 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB40NC.	TiBase długi z hexem Ø4.4 H 4.0 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB40NENC.	TiBase długi bez hexa Ø4.4 H 4.0 C 7.7 JDIcon Plus
EVCAITEC	Interfejs CAD CAM dla łącznika typu Multi-unit aktywny JDEvolution (H 7.5)
EVA139C	TiBase aktywny dla łącznika typu Multi-unit (H 5.0)
EVCAITC	Interfejs CAD CAM dla łącznika typu Multi-unit pasywny JDEvolution (H 7.3)
EVCATIBC	TiBase dla łącznika typu Multi-unit JDEvolution (H 5.0)
EVS110	Śruba protetyczna dla łącznika typu Multi-unit bezpośrednia
EVS111	Śruba protetyczna dla łącznika typu Multi-unit bezpośrednia długa
EVS112	Śruba protetyczna dla kątownego kanału łącznika typu Multi-unit bezpośrednia
ICANC.	Analog implantu CAD CAM JDIcon Plus
EVCAARCN	Analog łącznika typu Multi-unit CAD CAM Nowa
ICPMNC.	Przedfrezowany blok łącznika JDIcon Plus

*Użyj wkrętaka JDEvolution Plus do wkręcania

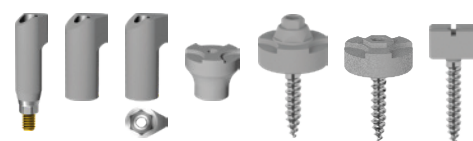

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik konometryczny:

ICCP05C.	Łącznik konometryczny prosty H 0.5 JDIcon Plus
ICCP10C.	Łącznik konometryczny prosty H 1.0 JDIcon Plus
ICCP20C.	Łącznik konometryczny prosty H 2.0 JDIcon Plus
ICCP30C.	Łącznik konometryczny prosty H 3.0 JDIcon Plus
ICCP40C.	Łącznik konometryczny prosty H 4.0 JDIcon Plus
IC7CP20C.	Łącznik konometryczny kątowny 7.5° H 2.0 JDIcon Plus
IC7CP20NEC.	Łącznik konometryczny kątowny bez hexa 7.5° H 2.0 JDIcon Plus
IC15CP20C.	Łącznik konometryczny kątowny 15° H 2.0 JDIcon Plus
IC15CP20NEC.	Łącznik konometryczny kątowny bez hexa 15° H 2.0 JDIcon Plus
IC22CP20C.	Łącznik konometryczny kątowny 22.5° H 2.0 JDIcon Plus
IC22CP20NEC.	Łącznik konometryczny kątowny bez hexa 22.5° H 2.0 JDIcon Plus
ICA300C.	Łącznik konometryczny kątowny 30° H 2.0 JDIcon Plus
IC30CP20NEC.	Łącznik konometryczny kątowny bez hexa 30° H 2.0 JDIcon Plus
EVA130C:	Nasadka z bolcem do spawania wewnątrzstawnego
EVA131C:	Nasadka do protez częściowych lub pełnołukowych stałych
EVA132C:	Nasadka antyrotacyjna do pojedynczego elementu
EVCPIIC	Transfer wyciskowy PEEK dla łącznika konometrycznego
EVCPAN	Analog łącznika konometrycznego

Łącznik Kulowy:

ICBA15.	Łącznik Kulowy H 1.5 JDIcon Plus
ICBA30.	Łącznik Kulowy H 3.0 JDIcon Plus
ICBA50.	Łącznik Kulowy H 5.0 JDIcon Plus
EVBA	Analog łącznika kulowego
EVBAHC	Nasadka elastyczna z pojemnikiem dla łącznika kulowego
EVBAN	Nasadka retencyjna dla łącznika kulowego

Łącznik Emi:

ICEMI15.	Łącznik Emi H 1.5 JDIcon Plus
ICEMI30.	Łącznik Emi H 3.0 JDIcon Plus
ICEMI50.	Łącznik Emi H 5.0 JDIcon Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

EVEMISCK	Smart Cap Attachment dla łącznika Emi
EVEMIHCB	Nasadka elastyczna z pojemnikiem dla łącznika Emi
EVEMIN	Nasadka elastyczna retencyjna (1.2 kg) dla łącznika Emi
EVEMIH	Pojemnik na nasadki Emi
EVEMIIC	Transfer wyciskowy plastikowy dla łącznika Emi
EVEMIICS	Transfer wyciskowy stalowy dla łącznika Emi
EVEMINT	Biała nasadka retencyjna (1.8 kg) dla łącznika Emi
EVEMINY	Żółta nasadka retencyjna (0.6 kg) dla łącznika Emi
EVEMINP	Fioletowa nasadka retencyjna (2.5 kg) dla łącznika Emi
EVEMINB	Nasadka retencyjna laboratoryjna dla łącznika Emi
EVEMIA	Analog łącznika Emi
EVEMIEIT	Narzędzie do wyjmowania i wstawiania nasadek



Analog implantu:

ICAN.	Analog implantu JDIcon Plus
-------	-----------------------------




Bone Mill (Profiler)

ICBM5C.	Bone Mill (Profiler) Ø 5.0 and Guide JDIcon Plus
ICBM6C.	Bone Mill (Profiler) Ø 6.0 and Guide JDIcon Plus
ICBMG.	Bone Mill (Profiler) Guide JDIcon Plus




Wiertła krótkie:

JDDICS4	Wiertło krótkie Ø 4mm L 6 JDIcon Plus
JDDICS4D	Wiertło krótkie Ø 4mm L 6 do gęstej kości JDIcon Plus
JDDICS5	Wiertło krótkie Ø 5mm L 6 JDIcon Plus

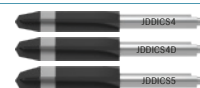


Narzędzia do implantów i protetyki:

ICID.	Wkrętak implantologiczny JDIcon Plus
ICIDL.	Wkrętak implantologiczny maszynowy długi JDIcon Plus
EVSDPF15	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 15
EVSDPF20	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 20
EVSDPF25	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 25
EVSDPF35	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 35
EVSDPF60	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 60
ICOASDF.	Wkrętak do łącznika Octa dla JDTorque
ICOASDFL.	Wkrętak do łącznika Octa długi dla JDTorque
EVSDCAF	Wkrętak do łącznika typu Multi-unit dla JDTorque
EVSDP20	Wkrętak protetyczny L 20
EVSDP25	Wkrętak protetyczny L 25
EVSDP30	Wkrętak protetyczny L 30
JDPD103	Wkrętak protetyczny dla narzędzia chirurgicznego
EVSDCA	Wkrętak do łącznika typu Multi-unit
JDPD108	Wkrętak do łącznika Octa
EVSDPF25A	Wkrętak do kątowej śruby JDTorque L 25
EVSDPF30A	Wkrętak do kątowej śruby JDTorque L 30
EVSDPF25AV	Wkrętak do kątowej śruby Multi-Unit Direct JDTorque L 25
EVSDPF30AV	Wkrętak do kątowej śruby Multi-Unit Direct JDTorque L 30
EVSDP32AV	Wkrętak do śruby Multi-Unit Direct EVS112 (kanał prosty)
ICATR27.	Narzędzie do wyjmowania łącznika L 27 JDIcon Plus
ICATR34.	Narzędzie do wyjmowania łącznika L 34 JDIcon Plus
EVSUD	Narzędzie chirurgiczne JDEvolution
JDG	JDGuide
ICGMC.	Implant Mounter dla JDIcon Plus
ICGMLC.	Implant Mounter długi dla JDIcon Plus
JDID105	Narzędzie do wyrównywania łączników typu Multi-unit JDIcon Plus
JDSPR	Sonda głębokościowa implantów stomatologicznych
JDNPR	Sonda głębokości 26 mm JDNasal

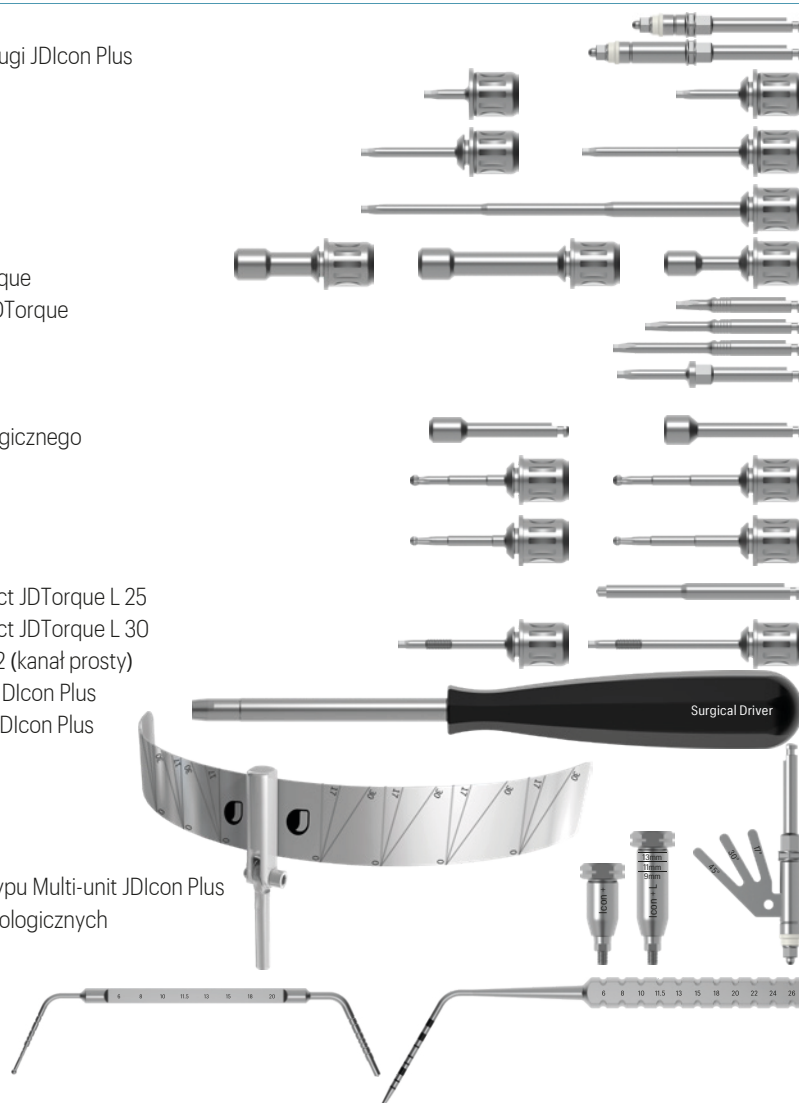

Wskaźniki kierunku:

JDDI	Wskaźnik kierunku
JDDIS	Wskaźnik kierunku krótki
JDDI17	Wskaźnik kierunku 17°
JDDI30	Wskaźnik kierunku 30°
JDDI45	Wskaźnik kierunku 45°

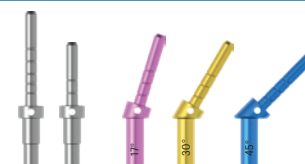




J DENTAL CARE

just smile

JD EVOLUTION plus

Łatwe wprowadzenie, naturalna stabilność

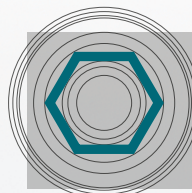



Połączenie heksagonalne



Wyprodukowano we Włoszech

ŁATWE WPROWADZENIE, NATURALNA STABILNOŚĆ

- Wewnętrzne połączenie heksagonalne z fazą wprowadzającą
- Anatomiczna szyjka koronowa
- Rozszerzający się, stożkowy trzon wewnętrzny
- Zdolność do samogwintowania w obu kierunkach
- Apikalne krawędzie tnące
- Połączenie rozpoznawane przez wszystkie główne biblioteki cyfrowe
- Redukuje koncentrację naprężeń w kości wyrostka zębodołowego i maksymalizuje objętość kości wokół szyjki implantu, zapewniając stabilność tkanek twardych i miękkich
- Powierzchnia implantu w pełni pokryta powierzchnią SLA
- Umożliwia osiągnięcie wysokiej pierwotnej stabilizacji

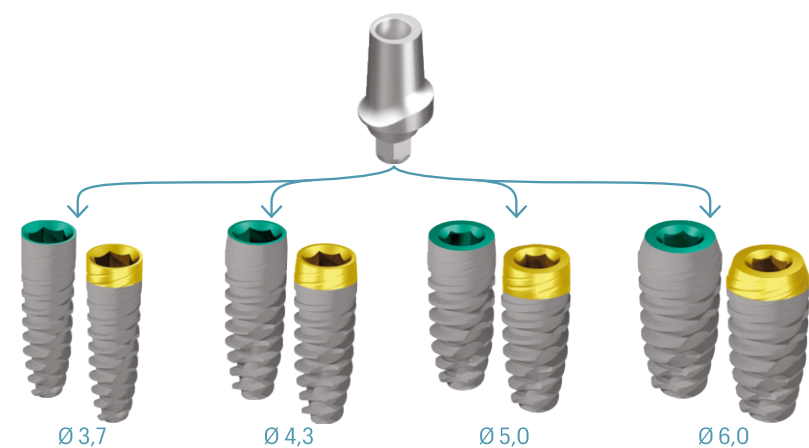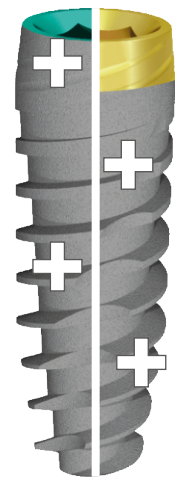

JEDNO POŁĄCZENIE PROTETYCZNE

Jedno uniwersalne połączenie protetyczne dla wszystkich średnic

SPECYFIKACJA PRODUKTU


Implanty JDEvolution Plus są dostępne w następujących średnicach i długościach:

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ	ŚR. KOŃCÓWKI	ŚR. PLATFORMY	INTERFEJS ABUTMENTU
Ø 3.7	8	2.8	3.7	3.4
	10, 11.5, 13, 15, 18	2.4		
Ø 4.0	8	2.8	3.8	3.4
	10	2.5		
	11.5, 13	2.4		
Ø 4.3	6	3.82	4.0	3.4
	8	3.55		
	10, 11.5, 13, 15, 18	2.8		
Ø 5.0	6	3.85	4.8	3.4
	8, 10, 11.5, 13, 15	3.2		
Ø 6.0	6	4.4	5.0	3.4
	8	4.1		
	10, 11.5, 13, 15	4		

Implanty JDEvolution Plus T są dostępne w następujących średnicach i długościach:

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ	ŚR. KOŃCÓWKI	ŚR. PLATFORMY	INTERFEJS ABUTMENTU
Ø 4.0	6	2.6	3.8	3.4
	8, 10, 11.5, 13, 15, 18	2.4		

Uwaga: Wszystkie wymiary podano w milimetrach

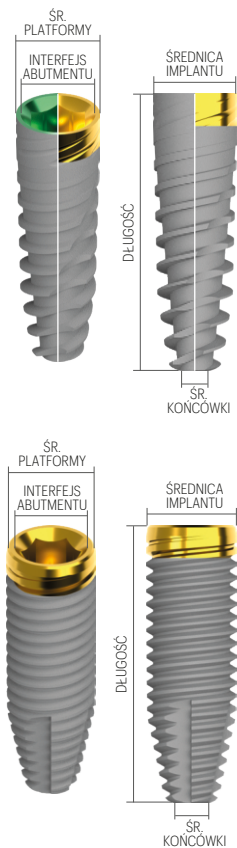

Implanty:

Ø 3,7

EV37080:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 8
EV37100:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 10
EV37115:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 11,5
EV37130:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 13
EV37150:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 15
EV37180:	JDEvolution Plus Ø 3,7 L 18




Ø 4,0

EV40080:	JDEvolution Plus Ø 4,0 L 8
EV40100:	JDEvolution Plus Ø 4,0 L 10
EV40115:	JDEvolution Plus Ø 4,0 L 11,5
EV40130:	JDEvolution Plus Ø 4,0 L 13



Ø 4,3

EV43060:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 6
EV43080:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 8
EV43100:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 10
EV43115:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 11,5
EV43130:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 13
EV43150:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 15
EV43180:	JDEvolution Plus Ø 4,3 L 18

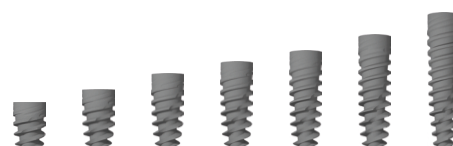

Ø 5,0

EV50060:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 6
EV50080:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 8
EV50100:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 10
EV50115:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 11,5
EV50130:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 13
EV50150:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 15
EV50180:	JDEvolution Plus Ø 5,0 L 18



Ø 6,0

EV60060:	JDEvolution Plus Ø 6,0 L 6
EV60080:	JDEvolution Plus Ø 6,0 L 8
EV60100:	JDEvolution Plus Ø 6,0 L 10
EV60130:	JDEvolution Plus Ø 6,0 L 13
EV60150:	JDEvolution Plus Ø 6,0 L 15



Implanty Anodowana Szyjka:

Ø 3,7

EVA37080:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 8
EVA37100:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 10
EVA37115:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 11,5
EVA37130:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 13
EVA37150:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 15
EVA37180:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 3,7 L 18

Ø 4,0

EVA40150:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 15
EVA40180:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 18

Ø 4,3


EVA43060:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 6
EVA43080:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 8
EVA43100:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 10
EVA43115:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 11,5
EVA43130:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 13
EVA43150:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 15
EVA43180:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 4,3 L 18

Ø 5,0

EVA50060:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 6
EVA50080:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 8
EVA50100:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 10
EVA50115:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 11,5
EVA50130:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 13
EVA50150:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 15
EVA50180:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 5,0 L 18


Ø 6,0

EVA60060:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 6
EVA60080:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 8
EVA60100:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 10
EVA60115:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 11,5
EVA60130:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 13
EVA60150:	JDEvolution Plus Anodowana Szyjka Ø 6,0 L 15

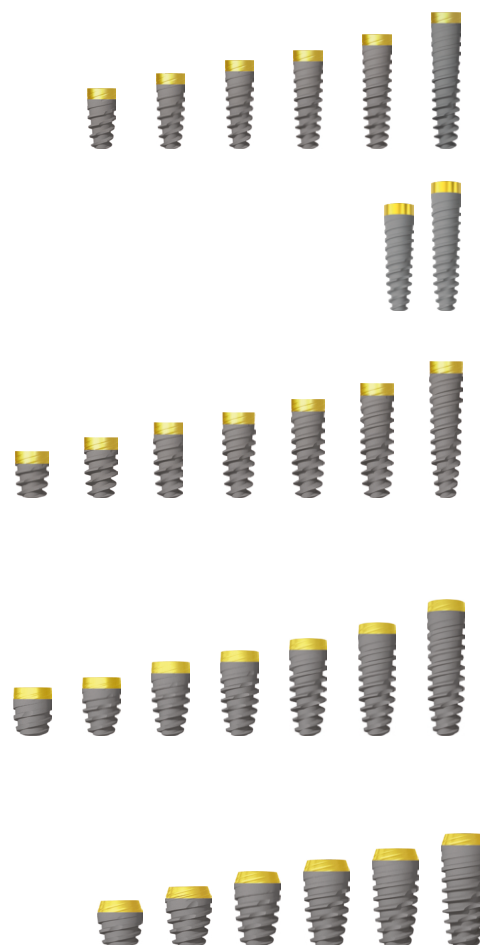

JDEvolution Plus T:


EVT40060:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 6
EVT40080:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 8
EVT40100:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 10
EVT40115:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 11,5
EVT40130:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 13
EVT40150:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 15
EVT40180:	JDEvolution Plus T Anodowana Szyjka Ø 4,0 L 18

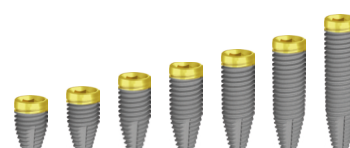

PROTOKOŁY WIERCENIA

Zaleca się stosowanie wskazówek dotyczących następującego protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilizację implantu.

ŚREDNICA IMPLANTU	WYGOJONA KOŚĆ		KOŚĆ POEKSTRAKCYJNA	
	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ
przygotowanie miejsca w szczęce				
Ø 3,7	2,0 2,4 2,8 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 przy wejściu
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L6-8 mm 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L6 mm
Ø 6,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
przygotowanie miejsca w żuchwie				
Ø 3,7	2,0 2,4 2,8 3,2 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 4,0 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 4,4 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu
Ø 6,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 4,8 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4

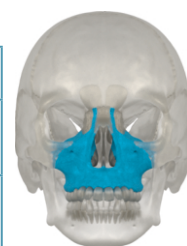

**Implant krótki L 6 mm
JDEvolution Plus –
wszczepienie w szczęce**

krótki
Ø 4,3
L 6

Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm i Ø 2,4 mm
Zakończ wiertłem Ø 4 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS4

krótki
Ø 5,0
L 6

Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm i Ø 2,4 mm
Zakończ wiertłem Ø 4 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS4D




**Implant krótki L 6 mm
JDEvolution Plus –
wszczepienie w żuchwie**

krótki
Ø 4,3
L 6

Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm i Ø 2,8 mm
Zakończ wiertłem Ø 4 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS4D

krótki
Ø 5,0
L 6

Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm i Ø 2,8 mm
Zakończ wiertłem Ø 5 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS5

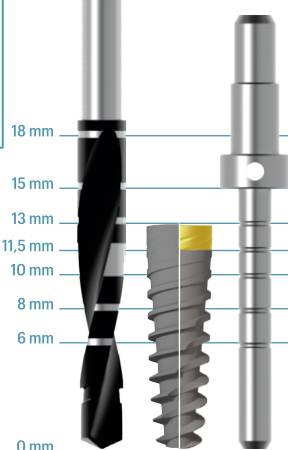

Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm

PROTOKOŁY WIERCENIA – IMPLANTY Ø 4,0

Zaleca się stosowanie wskazówek dotyczących następującego protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilizację implantu.

ŚREDNICA IMPLANTU	WYGOJONA KOŚĆ		KOŚĆ POEKSTRAKCYJNA		
	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	
przygotowanie miejsca w szczęcie					Implant krótki L 6 mm JDEvolution Plus – wszczepienie w szczęcie
Ø 4,0	2.0 2.4 2.8	2.0 2.4 2.8 3.2 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2.0 2.4 2.8 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2.0 2.4 2.8	krótki Ø 4,0 L 6 Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm i Ø 2,4 mm Zakończ wiertłem Ø 4 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS4
przygotowanie miejsca w żuchwie					Implant krótki L 6 mm JDEvolution Plus – wszczepienie w żuchwie
Ø 4,0	2.0 2.4 2.8 3.2 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 3.6 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 do pierwszego znacznika laserowego L6 mm	2.0 2.4 2.8 3.2 do drugiego znacznika laserowego L8 mm 3.6 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 do drugiego znacznika laserowego L8 mm	krótki Ø 4,0 L 6 Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm i Ø 2,8 mm Zakończ wiertłem Ø 4 mm, długość 6 mm, kod: JDDICS4D

Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm




JDENTALCARE

just smile

JD PTERYGO

*Minimalnie inwazyjne rozwiązanie
dla zanikowej tylnej części szczęki*

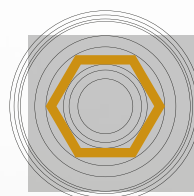

Połączenie heksagonalne



Zaprojektowane dla
Maxilla-For-All®



Made in Italy


MINIMALNIE INWAZYJNE PODEJŚCIE

Implant JDPterygo Ø 4mm jest wykonany z tytanu klasy 4 i posiada 3,5 mm anodowaną szyjkę implantu.

Został zaprojektowany tak, aby uzyskać optymalną pierwotną stabilizację, zapewniając idealne zakotwienie w kości skrzydłowej.

Minimalnie inwazyjne podejście jest możliwe również przy zastosowaniu chirurgii nawigowanej komputerowo.

Ø 4.0mm

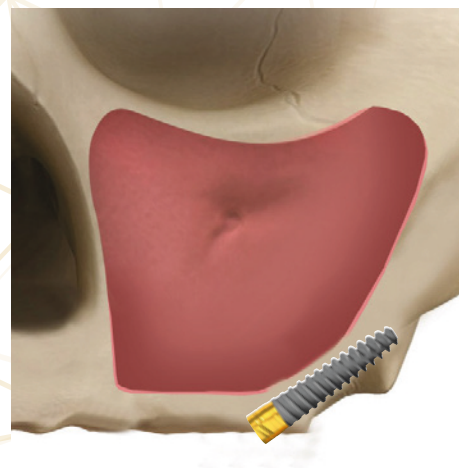

NOWE ROZWIĄZANIE Ø 3,3mm

DLA EKSTREMALNEJ ATROFII

MNIEJ NIŻ 6mm KOŚCI

Nowy implant JD Pterygo Ø 3,3mm jest wykonany z tytanu klasy 4 i posiada 3,5 mm anodowany kołnierz implantu.

Jest specjalnie zaprojektowany dla przypadków ekstremalnej atrofii, gdy dostępna kość wynosi mniej niż 6 mm pomiędzy tylną ścianą zatoki a guzem szczęki.

Dzięki uproszczonemu protokołowi wiercenia, który obejmuje tylko dwa etapy, łatwo osiągniesz idealne zakotwienie w kości skrzydłowej.

Ø 3.3mm



JD PTERYGO ONE

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Implanty dentystyczne JDPterygo są dostępne w średnicach i długościach przedstawionych w poniższej tabeli:



ŚREDNICA IMPLANTU	ŚREDNICA WIERZCHOŁKA	DŁUGOŚĆ			
		13	15	18	20
Ø 3,3	1,75				
Ø 4,0	2,4				

Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w mm

KATALOG PRODUKTÓW

Implanty:

Ø 3,3

PT40130S:	JDPterygo One Ø 3.3 L 13
PT40150S:	JDPterygo One Ø 3.3 L 15
PT40180S:	JDPterygo One Ø 3.3 L 18
PT40200S:	JDPterygo One Ø 3.3 L 20

Ø 4,0

PT40130:	JDPterygo Ø 4.0 L 13
PT40150:	JDPterygo Ø 4.0 L 15
PT40180:	JDPterygo Ø 4.0 L 18
PT40200:	JDPterygo Ø 4.0 L 20



Wiertła do protokołu nieprzewodzonego:

JDDRPT20	Wiertło Ø 2.0 JDPterygo
JDDRPT24	Wiertło Ø 2.4 JDPterygo
JDDR101	Wiertło Ø 2.8 JDPterygo
JDDRPT32	Wiertło Ø 3.2 JDPterygo




Wiertła pilotujące do protokołu prowadzonego JDPterygo:

JDGD20-130	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 13.0
JDGD20-150	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 15.0
JDGD20-180	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 18.0
JDGD20-200	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 20.0
JDGD24-130	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 13.0
JDGD24-150	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 15.0
JDGD24-180	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 18.0
JDGD24-200	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 20.0



Narzędzia do implantów i protetyki:

JDID100	Wkrętak implantologiczny JD - JDPterygo	JDPterygo
EVSDPF60:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 60 JDEvolution Plus	
JDPD105	Wkrętak protetyczny JDEvolution Plus do narzędzi chirurgicznych	
JDID101	Wkrętak implantologiczny JD - JDPterygo One	JDPterygo One
EVSDPF60	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 60	
JDPD103	Wkrętak protetyczny do narzędzi chirurgicznych	

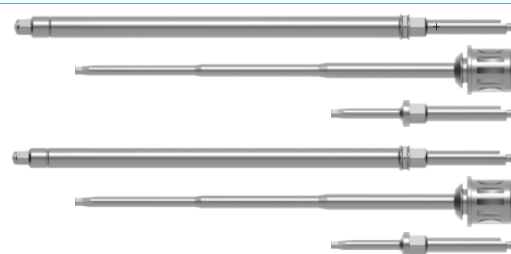

Retraktor JDPterygo:

1005-14	Retraktor JDPterygo
---------	---------------------



Kasety chirurgiczne JD Pterygo:

JDKIT01	Kaseta chirurgiczna JD – zestaw wiertel JDPterygo
JDKIT02	Kaseta JD do chirurgii nawigowanej – dodatkowe wiertła (JDNasal+JDPterygo)
JDKIT04	Kaseta chirurgiczna JD – zestaw JDPterygo

Rozwiązania protetyczne:

Połączenie JDPterygo Ø 3.3 mm jest kompatybilne z JDEvolution S, dlatego prosimy o zapoznanie się z katalogiem JDEvolution S w celu wyboru najbardziej odpowiedniego komponentu.

Połączenie JDPterygo Ø 4 mm jest kompatybilne z JDEvolution Plus, dlatego prosimy o zapoznanie się z katalogiem JDEvolution Plus w celu wyboru najbardziej odpowiedniego komponentu.

PROTOKÓŁ IMPLANTACJI

Przygotowanie miejsca wszczepienia implantu JDPterygo może być przeprowadzone zgodnie z protokołem chirurgicznym nieprowadzonym lub prowadzonym komputerowo. Zaleca się przestrzeganie wskazań dotyczących protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilizację implantu.

JDPTERYGO Ø 3.3 mm

• Przygotowanie miejsca - protokół bez nawigacji



1. Rozpocznij osteotomię przy użyciu wiertła JDPterygo Ø 2.0 mm na taką samą długość, jak długość implantu, który ma być wprowadzony.



2. Zakończ osteotomię wiertłem JDPterygo Ø 2.8 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.

• Przygotowanie miejsca - protokół prowadzony komputerowo




1. Rozpocznij osteotomię przy użyciu wiertła prowadzącego Ø 2.0 mm na taką samą długość, jak długość implantu.

2. Zakończ osteotomię wiertłem prowadzącym Ø 2.8 mm na głębokość 6 mm.

JDPTERYGO Ø 4.0 mm


• Protokół chirurgiczny - bez nawigacji

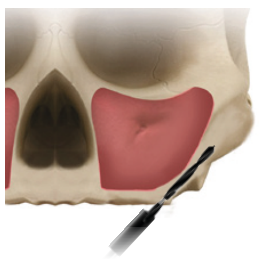

1. Rozpocznij osteotomię przy użyciu wiertła JDPterygo Ø 2.0 mm na taką samą długość, jak długość implantu, który ma być wprowadzony.



2. Kontynuuj przy użyciu wiertła JDPterygo Ø 2.4 mm na taką samą długość, jak długość implantu, który ma być wprowadzony.

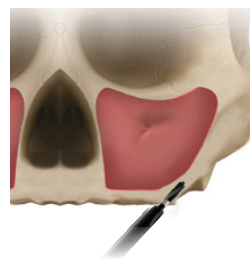

3. Zakończ osteotomię wiertłem JDPterygo Ø 3.2 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.

• Protokół chirurgiczny - implantacja nawigowana



1. Rozpocznij osteotomię przy użyciu pierwszego wiertła prowadzącego JDGD24-060 Ø 2.4 x L 6 mm*.

2. Kontynuuj przy użyciu wiertła prowadzącego Ø 2.4 mm na taką samą długość, jak długość implantu, który ma być wprowadzony (do wyboru wiertła prowadzące o długości L 13-15-18-20 mm).

3. Kontynuuj przy użyciu wiertła prowadzącego Ø 2.8 mm na głębokość 8 mm*. Zakończ osteotomię wiertłem prowadzącym Ø 3.2 mm na głębokość 6 mm*.

*Oznaczone wiertła nie zostały uwzględnione w tej broszurze. Prosimy o zapoznanie się z broszurą JD Guided Surgery Kit, dostępną na stronie www.jdentalcare.com.

KASETY CHIRURGICZNE JD PTERYGO

Przygotowanie miejsca wszczepienia implantu JDPterygo może być przeprowadzone zgodnie z protokołem chirurgicznym nawigacyjnym lub bez. Zaleca się przestrzeganie wskazań dotyczących poniższej protokołu wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilność implantu.



Kaseta chirurgiczna JD

Zestaw wiertel JDPterygo składa się z czterech dłuższych wiertel z dwoma znacznikami laserowymi, idealnych do pracy w tylnej części szczęki.



Kaseta chirurgiczna JD

Zestaw JDPterygo zawiera cztery dłuższe wiertła, dwa wkręta i dwa wkręta implantologiczne.

JDentalCare

Logo JDentalCare oraz inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie, z wyjątkiem szczególnie wymienionych wyjątków, są własnością JDentalCare.

Przedstawione w tej broszurze obrazy produktów niekoniecznie są w skali rzeczywistej.

Uwaga: Nie wszystkie produkty wytwarzane przez JDentalCare i przedstawione w tej broszurze zostały zatwierdzone/regulacyjnie dopuszczone do sprzedaży we wszystkich krajach i/lub posiadają licencję zgodnie z przepisami FDA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnego asortymentu produktów i ich dostępności, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem JDentalCare. Tylko na receptę.

Ostrzeżenie: Federalne prawo USA ogranicza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie do licencjonowanych dentystów lub za ich zgodą.

Zapoznaj się z instrukcją użytkowania, aby uzyskać więcej informacji, takich jak wskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania.

REV.13 of 2024-12-09




JDENTAL CARE

just smile

JD NASAL

Zakotwiczenie w obszarze jamy nosowej

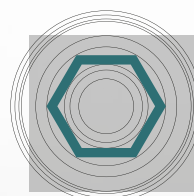

Połączenie heksagonalne




Zaprojektowane dla
Maxilla-For-All®



Made in Italy

ZAKOTWICZENIE W OBSZARZE JAMY NOSOWEJ

W przypadku znacznej resorpcji wyrostka zębodołowego szczęki, implanty JDNasal mogą być stosowane do wykorzystania kości nosowej, ponieważ umożliwiają wykorzystanie kości szczękowej otaczającej. Łoże implantu rozpoczyna się w okolicy przedtrzonowców wyrostka zębodołowego, a kończy w przegrodzie kostnej dzielącej zatokę szczekową i jamę nosową. Implanty stosowane w takich przypadkach muszą być dłuższe aby umożliwić ich przejście przez całą zatokę pod kątem. Implanty JDNasal są dostępne w długości do 30 mm. Szczegóły dotyczące produktu i protokoły wiercenia znajdują się na kolejnych stronach. Chirurg może zdecydować się na jednoczesne wykonanie podniesienia dna zatoki z wszczepieniem implantu lub zrezygnować z zabiegu regeneracyjnego. Ważne jest, aby u pacjentów nie występowały objawy infekcji zatok przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu tego zabiegu.

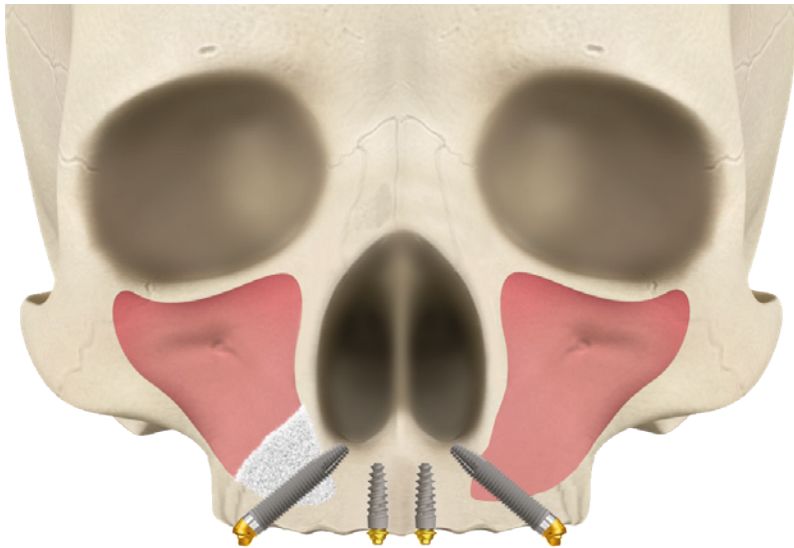

≥ 3 mm kości wyrostka zębodołowego

Specyfikacja produktu

Implanty dentystyczne JDNasal mają kształt cylindryczno-stożkowy z gwintem standardowym lub stożkowy z agresywnym gwintem. W części koronowej posiadają polerowaną szyjkę o wysokości 1,5 mm. Implanty dentystyczne JDNasal są dostępne w średnicach i długościach przedstawionych w poniższej tabeli:

ŚREDNICA IMPLANTU	ŚREDNICA WIERZCHOŁKOWA	DŁUGOŚĆ						
Ø 4,0	2,4	18	20	22	24	26	28	30

Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w mm




KATALOG PRODUKTÓW

Implanty:

NA40200:	JDNasal Ø 4.0 L 20
NA40220:	JDNasal Ø 4.0 L 22
NA40240:	JDNasal Ø 4.0 L 24
NA40260:	JDNasal Ø 4.0 L 26

IM43180-2	JDNasal Evo Ø 4.0 L 18
NAE40200:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 20
NAE40220:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 22
NAE40240:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 24
NAE40260:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 26
NAE40280:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 28
NAE40300:	JDNasal Evo Ø 4.0 L 30

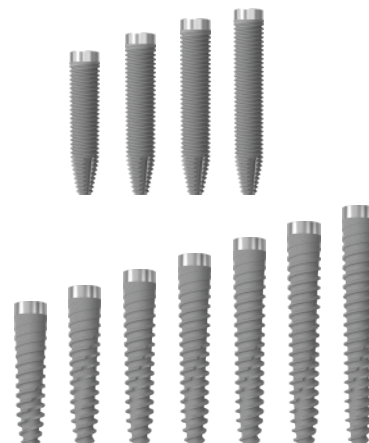

Wiertła i sonda głębokości:

JDNPR	Sonda głębokości 26 mm JDNasal
JDDR20L	Wiertło Ø 2.0 JDNasal*
JDDR24L	Wiertło Ø 2.4 JDNasal*
JDIDNA	Wiertło początkowe JDNasal*
JDDRNA24	Wiertło Helix Ø 2.4 JDNasal*
JDDR20	Wiertło spiralne Ø 2.0
JDDR24	Wiertło spiralne Ø 2.4
JDDR28	Wiertło spiralne Ø 2.8
JDDR32	Wiertło spiralne Ø 3.2
JDDR36	Wiertło spiralne Ø 3.6
JDDIADR101	Wiertło TranZ JDNasal

*te powyższe wiertła są zawarte w kasecie JDNasal Full



Wiertła pilotujące dla protokołu prowadzonego JDNasal:

JDGD20-180	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 18.0
JDGD20-200	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 20.0
JDGD20-220	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 22.0
JDGD20-240	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 24.0
JDGD20-260	Wiertło pilotujące Ø 2.0 L 26.0
JDGD24-180	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 18.0
JDGD24-200	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 20.0
JDGD24-220	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 22.0
JDGD24-240	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 24.0
JDGD24-260	Wiertło pilotujące Ø 2.4 L 26.0

Uwaga: wszystkie powyższe wiertła są zawarte w kasecie JD do chirurgii nawigowanej – dodatkowe wiertła (JDNasal+JDPTerygo)

JDGD120	JD P.A.G.A. Wiertło
JDIDPAGAL	P.A.G.A. Implant Driver Long



Kasety chirurgiczne JD Nasal:

JDNAK	Kaseta chirurgiczna JDNasal
JDNAKF	Kaseta chirurgiczna JDNasal Full
JDKIT02	Kaseta JD do chirurgii nawigowanej – dodatkowe wiertła (JDNasal+JDPTerygo)

Rozwiązania protetyczne:

Połączenie JDNasal jest kompatybilne z linią implantów JDEvolution Plus, dlatego prosimy o zapoznanie się z katalogiem JDEvolution Plus w celu wyboru najbardziej odpowiedniego komponentu.

PROTOKÓŁ PRZYGOTOWANIA MIEJSCA TRANS-ZATOKOWEGO

Protokół nieprzewodzony

1. Należy wypreparować okienko w bocznej ścianie zatoki szczękowej i delikatnie odsunąć błonę Schneidera, unikając jej perforacji. Rozpocznij przygotowanie miejsca wszczepienia za pomocą standardowego wiertła spiralnego Ø 2.0 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej. Utrzymuj wiertło pod właściwym kątem w kierunku filaru kła.
2. Kontynuuj przy użyciu standardowego wiertła spiralnego Ø 2.4 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej.
3. Kontynuuj przy użyciu standardowego wiertła spiralnego Ø 2.8 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej.
4. Kontynuuj przy użyciu standardowego wiertła spiralnego Ø 3.2 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej.
5. Wprowadź wiertło początkowe JDNasal do wcześniej utworzonego kanału w kości. Wierć przez wyrostek zębodołowy, wewnątrz i poza zatoką, sięgając kości nosowej w miejscu odpowiadającym filarowi kła.
6. Użyj sondy głębokości 26 mm, aby zweryfikować głębokość miejsca i wspomóc klinicystę w wyborze implantu o odpowiedniej długości.
7. Użyj dłuższego wiertła Ø 2.4 mm JDNasal, aby wiercić tak jak poprzednio przez wyrostek zębodołowy, wewnątrz i poza zatoką, docierając do kości nosowej na końcowej głębokości w miejscu odpowiadającym filarowi kła.
- 8A. Zakończ osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 3.6 mm w wyrostku zębodołowym.
- 8B. W przypadku implantów o długości 28-30 mm zamiast punktów 5-6-7 użyj wiertła JDNasal TranZ Drill, wierząc przez wyrostek zębodołowy, wewnątrz i poza zatoką szczękową, docierając do kości nosowej przy filarze kła.
- 9A. Umieść implant i osiągnij ostateczną pozycję bez dodawania przeszczepu kości. Implant należy wprowadzić z momentem obrotowym między 25 Ncm a 80 Ncm.
- 9B. Opcjonalnie: umieść implant, osiągnij ostateczną pozycję i wprowadź przeszczep kości do zatoki. Implant należy wprowadzić z momentem obrotowym między 25 Ncm a 80 Ncm.



1 - JDDR20



2 - JDDR24



3 - JDDR28



4 - JDDR32



5 - JDIDNA



6 - JDNPR




7 - JDDRNA24



8 - JDDR36



8B - JDDIADR101

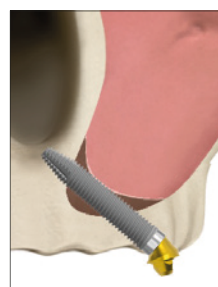

9A - implant



9B - implant + przeszczep kości



PROTOKÓŁ PRZYGOTOWANIA MIEJSCA KOTWICZENIA NOSOWEGO

Protokół nieprzewodzony



1 - JDDR20L



2 - JDNPR



3 - JDDR24L



4 - JDDR28



5 - JDDR32



6 - JDDR36



7 - implant

1. Rozpocznij przygotowanie miejsca za pomocą dłuższego wiertła Ø 2.0 mm JDNasal, wierząc przez kość grzbietową i docierając do warstwy korowej kości nosa.
2. W celu sprawdzenia głębokości łoża implantologicznego można użyć sondy o długości 26 mm. Znajomość dokładnej długości łoża ułatwia dobór odpowiedniego wszczepu.
3. Wierć do końcowej głębokości za pomocą dłuższego wiertła Ø 2.4 mm JDNasal.
4. Kontynuuj osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 2.8 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.
5. Kontynuuj osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 3.2 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.
6. Zakończ osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 3.6 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.
7. Umieść implant, aż do osiągnięcia ostatecznej pozycji. Implant należy wprowadzić z momentem obrotowym między 25 Ncm a 80 Ncm.

Używane narzędzia:



KASETA CHIRURGICZNA JDNASAL

Kaseta chirurgiczna JDNasal została stworzona do przygotowania zabiegów trans-zatokowych i zakotwiczenia w obszarze jamy nosowej.



Zestaw JDNasal (PATENT W TRAKCIE REJESTRACJI)

Kaseta zawiera cztery dłuższe wiertła, specjalnie zaprojektowane do implantów trans-zatokowych:*

- Dłuższe wiertło Ø 2,0 mm JDNasal
- Dłuższe wiertło Ø 2,4 mm JDNasal
- Wiertło początkowe JDNasal
- Wiertło Helix Ø 2,4 mm JDNasal

*Powyższe zdjęcie odnosi się do kasety chirurgicznej JDNasal Full

PROTOKÓŁ PRZYGOTOWANIA MIEJSCA

Protokół prowadzony komputerowo

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ IMPLANTU	
Ø 4,0	L20	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6
	L22	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6
	L24	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6
	L26	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 - L26 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 - L26 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6

Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w mm



JDentalCare
Logo JDentalCare oraz inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie, z wyjątkiem szczególnie wymienionych wyjątków, są własnością JDentalCare.
Przedstawione w tej broszurze obrazy produktów niekoniecznie są w skali rzeczywistej.
Uwaga: Nie wszystkie produkty wytwarzane przez JDentalCare i przedstawione w tej broszurze zostały zatwierdzone/regulacyjnie dopuszczone do sprzedaży we wszystkich krajach i/lub posiadają licencję zgodnie z przepisami FDA.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnego asortymentu produktów i ich dostępności, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem JDentalCare. Tylko na receptę.
Ostrzeżenie: Federalne prawo USA ogranicza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie do licencjonowanych dentystów lub za ich zgodą.
Zapoznaj się z instrukcją użytkowania, aby uzyskać więcej informacji, takich jak wskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania.




JDENTAL CARE

just smile

JD ZYGOMA

*Rozwiązanie bez przeszczepu dla ciężkiej
resorpcji w kości szczękowej*

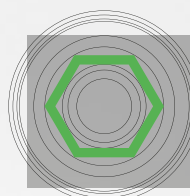

Połączenie heksagonalne



Zaprojektowane dla
Maxilla-For-All®



Made in Italy

ROZWIĄZANIE BEZ KONIECZNOŚCI REGENERACJI KOŚCI

+ Tytan klasy 4

+ Wysoka pierwotna stabilność do natychmiastowej funkcji


Dzięki konstrukcji system ten umożliwia zaopatrzenie pacjenta w uzupełnienie tymczasowe bezpośrednio po zabiegu implantacji. Multikortykalne zakotwiczenie oraz unikatowy kształt wierzchołka implantu o średnicy 2,0 mm zapewniają doskonałą stabilizację pierwotną wszczepów.

+ Dostępne są dwie opcjonalne średnice: 3,9 mm i 4,3 mm

Uzyskaj stabilność nawet w przypadkach rehabilitacji pacjentów dotkniętych zaawansowaną resorpcją podłoża protetycznego, u których standardowa procedura rekonstrukcji uzębienia wymagałaby przeprowadzenia przeszczepu tkanki kostnej.

+ Większa swoboda wyboru procedur chirurgicznych i protetycznych

Poznaj i wykorzystaj zalety implantów o prostej i wypolerowanej szyjce, długościach od 30 do 60mm i kompatybilnym z systemem JDEvolution Plus+ połączeniu wewnętrznym w kształcie heksagonu. Wysoka stabilizacja pierwotna umożliwiająca natychmiastowe obciążenie.

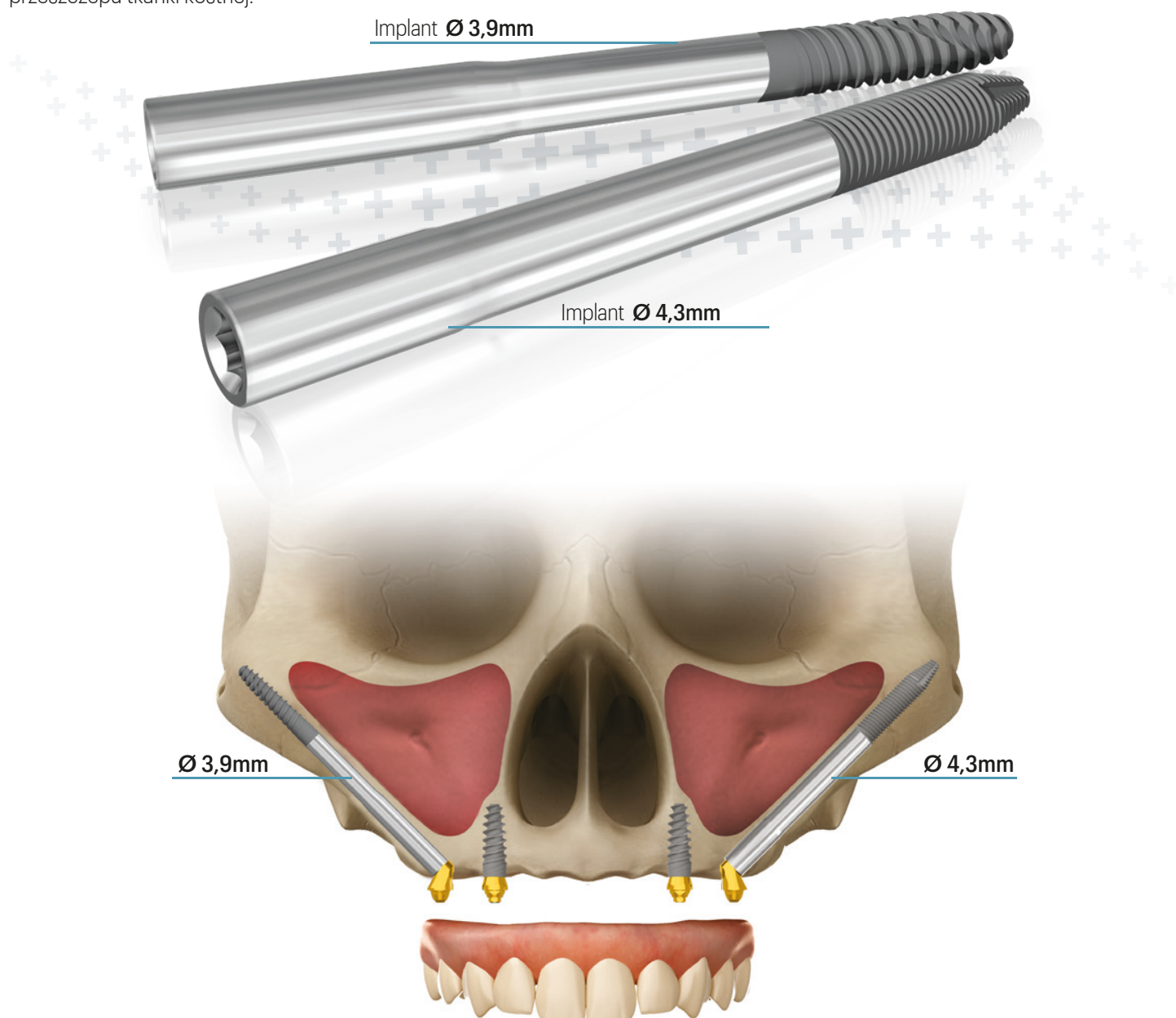


SPECYFIKACJA PRODUKTU

Implanty dentystyczne JDZygoma są dostępne w średnicach i długościach przedstawionych w poniższej tabeli:

ŚREDNICA KORONALNA	ŚREDNICA IMPLANTU	ŚREDNICA WIERZCHOŁKOWA	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI GWINTOWANEJ	DŁUGOŚĆ IMPLANTU
Ø 4,3	Ø 3,9	2,70	18,0	30
				35
				37.5
				40
				42.5
				45
				47.5
				50
				52.5
				55
Ø 4,5	Ø 4,3	2,14	18,0	57.5
				30
				35
				37.5
				40
				42.5
				45
				47.5
				50
				52.5
				55
				57.5
				60

Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w mm

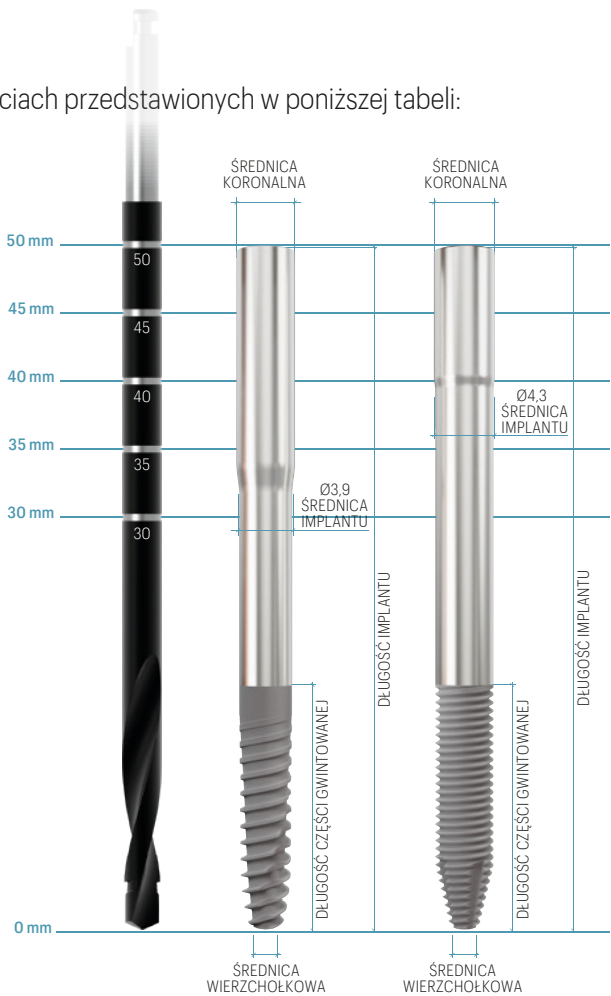

KATALOG PRODUKTÓW


Implanty:

Ø 3,9

- ZY39300: JDZygoma Ø 3.9 L 30
- ZY39325: JDZygoma Ø 3.9 L 32.5
- ZY39350: JDZygoma Ø 3.9 L 35
- ZY39375: JDZygoma Ø 3.9 L 37.5
- ZY39400: JDZygoma Ø 3.9 L 40
- ZY39425: JDZygoma Ø 3.9 L 42.5
- ZY39450: JDZygoma Ø 3.9 L 45
- ZY39475: JDZygoma Ø 3.9 L 47.5
- ZY39500: JDZygoma Ø 3.9 L 50
- ZY39525: JDZygoma Ø 3.9 L 52.5
- ZY39550: JDZygoma Ø 3.9 L 55
- ZY39575: JDZygoma Ø 3.9 L 57.5
- ZY39600: JDZygoma Ø 3.9 L 60


Ø 4,3

- ZY43300: JDZygoma Ø 4.3 L 30
- ZY43350: JDZygoma Ø 4.3 L 35
- ZY43375: JDZygoma Ø 4.3 L 37.5
- ZY43400: JDZygoma Ø 4.3 L 40
- ZY43425: JDZygoma Ø 4.3 L 42.5
- ZY43450: JDZygoma Ø 4.3 L 45
- ZY43475: JDZygoma Ø 4.3 L 47.5
- ZY43500: JDZygoma Ø 4.3 L 50
- ZY43525: JDZygoma Ø 4.3 L 52.5
- ZY43550: JDZygoma Ø 4.3 L 55
- ZY43575: JDZygoma Ø 4.3 L 57.5
- ZY43600: JDZygoma Ø 4.3 L 60

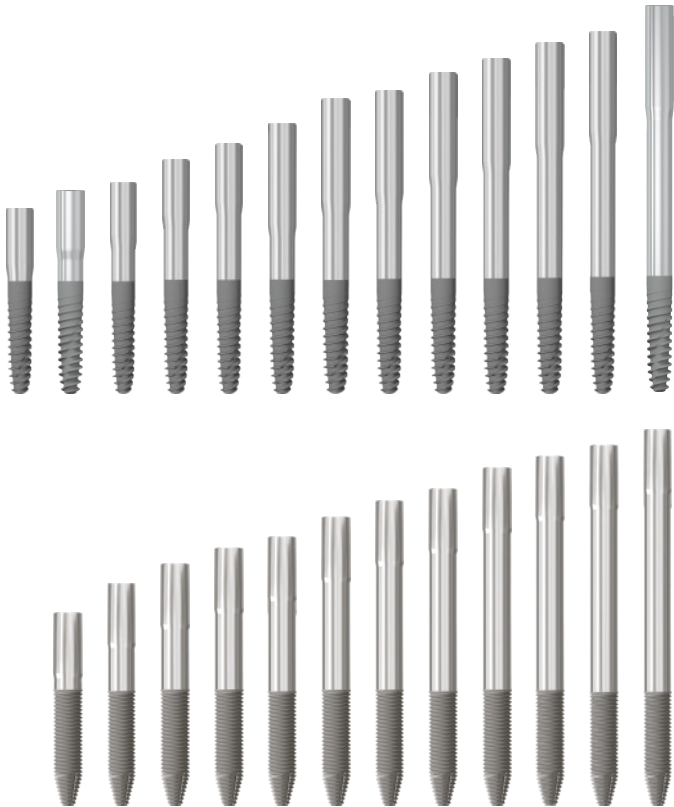

Wiertła i sonda głębokości:

JDDRZSF28	Wiertło okrągłe Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDRID50	Wiertło pilotujące L 50 JDZygoma
ZJDDREXS150NP	Wiertło pilotujące L 50 Nowy Profil JDZygoma
ZJDDREXS170NP	Wiertło pilotujące L 70 Nowy Profil JDZygoma
JDDIADR	Wiertło diamentowe JDZygoma
JDDIADRL	Długie wiertło diamentowe JDZygoma
JDZYADR	JDZygoArch Drill
ZJDDR28	Wiertło Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDR28L	Długie wiertło Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDR32	Wiertło Ø 3.2 JDZygoma
ZJDDR32L	Długie wiertło Ø 3.2 JDZygoma
ZJDDR36	Wiertło Ø 3.6 JDZygoma
ZJDDR36L	Długie wiertło Ø 3.6 JDZygoma
ZJDDREXS150N	Wiertło zygomatyczne 1 L 50 - 3 rowki
ZJDDREXS170N	Wiertło zygomatyczne 1 L 70 - 3 rowki
ZJDDREXS250N	Wiertło zygomatyczne 2 L 50 - 3 rowki
ZJDDREXS270N	Wiertło zygomatyczne 2 L 70 - 3 rowki
ZJDDREXS350N	Wiertło zygomatyczne 3 L 50 - 3 rowki
ZJDDREXS370N	Wiertło zygomatyczne 3 L 70 - 3 rowki
JDZPR	Sonda głębokości 60 mm JDZygoma

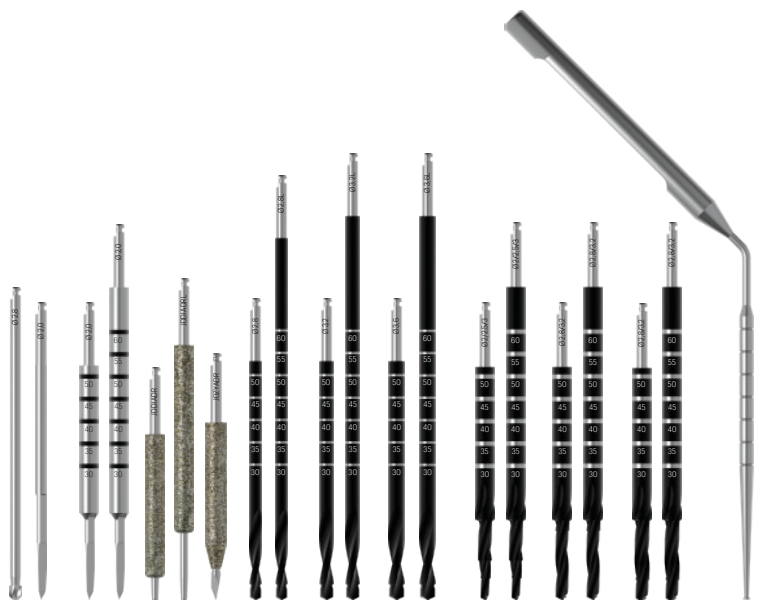

Protetyka i narzędzia Zygoma

Łącznik typu Multi-unit:

EVCA4545C:	Łącznik typu Multi-unit 45° H 4.5 JDEvolution Plus
EVCA4560C:	Łącznik typu Multi-unit 45° H 6.0 JDEvolution Plus
EVCA5250C:	Łącznik typu Multi-unit kątowy 52.5° H 5.0 JDEvolution Plus
EVCA6050C:	Łącznik typu Multi-unit kątowy 60° H 5.0 JDEvolution Plus
EVCASA60:	Śruba do typu Multi-unit kąтового 60° JDEvolution Plus



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



JDScanBody, interfejs i analog łącznika CAD CAM do łącznika typu Multi-unit:

EVCAARC	Analog łącznika typu Multi-unit CAD CAM
---------	---



Wkrętaki do implantów i protez:

EVSUDMAX	Wkrętak chirurgiczny MAX
----------	--------------------------



Kasety chirurgiczne JD Zygoma:

ZSKITE	Kaseta chirurgiczna JDZygoma Extra
ZSKITF	Kaseta chirurgiczna JDZygoma Full


Rozwiązania protetyczne:

Połączenie JDZygoma jest kompatybilne z linią implantów JDEvolution Plus, dlatego prosimy o zapoznanie się z katalogiem JDEvolution Plus w celu wyboru najbardziej odpowiedniego komponentu.


PROTOKÓŁ PREPARACJI MIEJSCA

Dla przygotowania miejsca wszczępienia implantów JDZygoma zaleca się przestrzeganie poniższych sekwencji wiercenia, aby zapewnić optymalną pierwotną stabilność implantów.

JDZygoma Ø 3.9mm

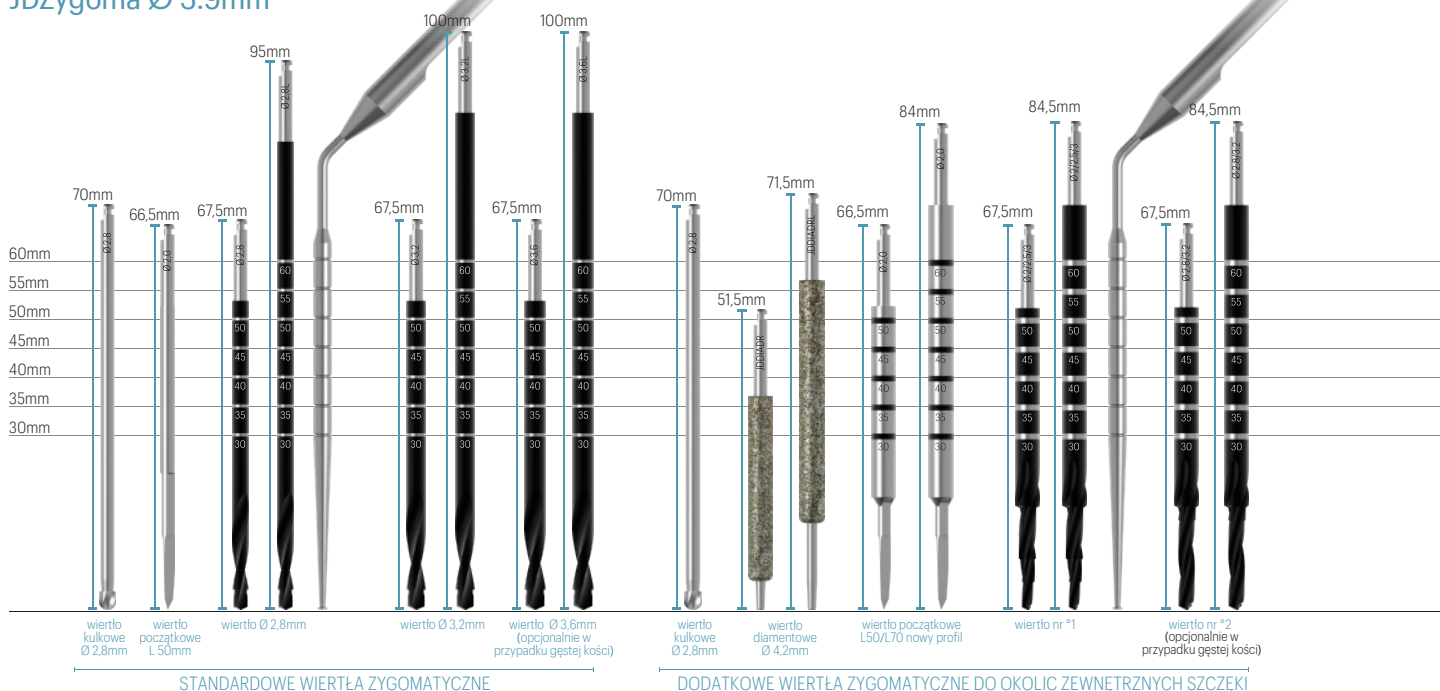

JDZygoma Ø 4.3mm

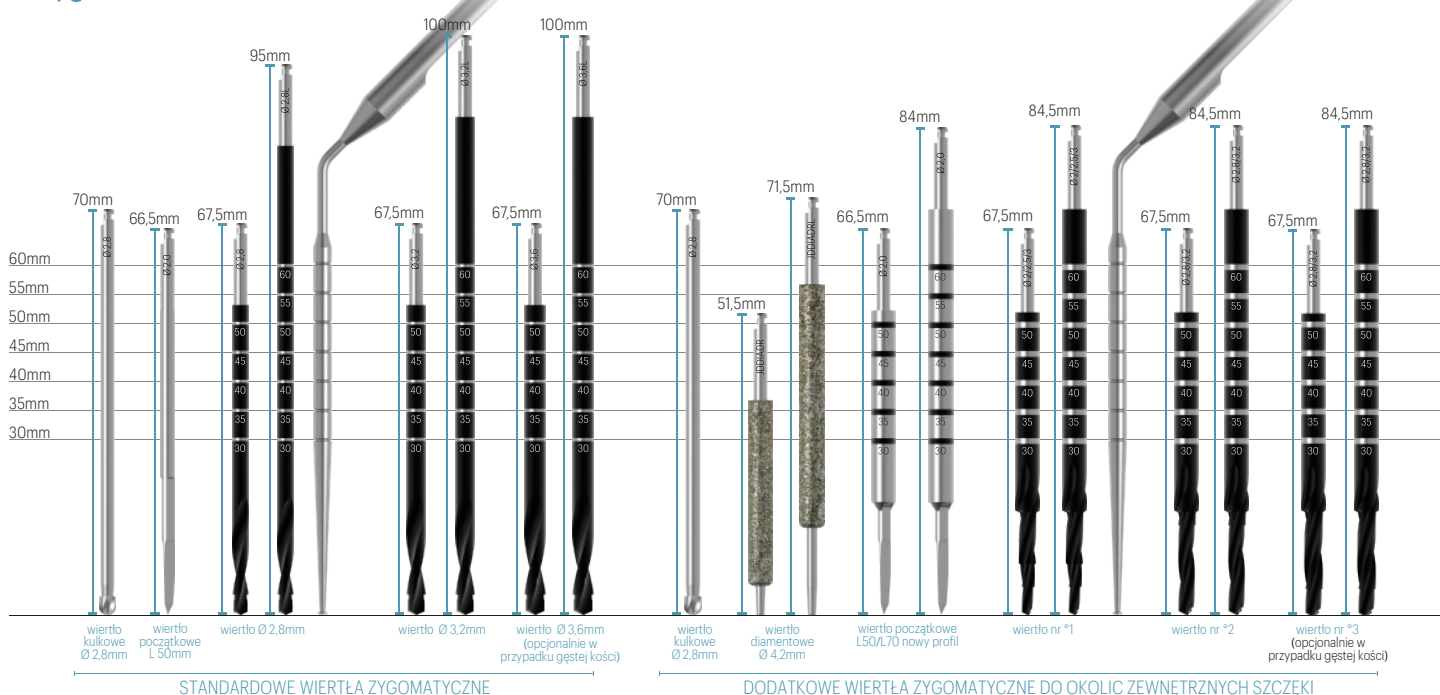

JDentalCare, logo JDentalCare i inne znaki towarowe wymienione w tym dokumencie, z wyjątkiem specjalnie wymienionych wyjątków, są własnością JDentalCare.

Obrazy produktów przedstawione w tej broszurze niekoniecznie są w skali.

Uwaga: Nie wszystkie produkty wyprodukowane przez JDentalCare i przedstawione w tej broszurze zostały zatwierdzone/regulowane do sprzedaży we wszystkich krajach lub zostały licencjonowane zgodnie z przepisami FDA.

W celu uzyskania informacji o aktualnym asortymencie produktów i dostępności, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem JDentalCare. Tylko na receptę.

Ostrzeżenie: Prawo federalne (USA) ogranicza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie licencjonowanym dentystom.

Zobacz instrukcję użytkowania, aby uzyskać więcej informacji, takich jak wskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania.

REV.21 of 2024-10-16

Protetyka linii JDEvolution Plus

Śruba zamykająca:

EVCS:	Śruba zamykająca JDEvolution Plus
EVCS6:	Śruba zamykająca Ø 6,0 JDEvolution Plus

Śruba gojąca:


EVHA41:	Śruba gojąca Ø 4.0 H 1.0 JDEvolution plus
EVHA42:	Śruba gojąca Ø 4.0 H 2.0 JDEvolution plus
EVHA43:	Śruba gojąca Ø 4,0 H 3,0 JDEvolution Plus
EVHA45:	Śruba gojąca Ø 4,0 H 5,0 JDEvolution Plus
EVHA47:	Śruba gojąca Ø 4,0 H 7,0 JDEvolution Plus
EVHA53:	Śruba gojąca Ø 5,0 H 3,0 JDEvolution Plus
EVHA55:	Śruba gojąca Ø 5,0 H 5,0 JDEvolution Plus
EVHA57:	Śruba gojąca Ø 5,0 H 7,0 JDEvolution Plus
EVHA59:	Śruba gojąca Ø 5,0 H 9,0 JDEvolution Plus
EVHA63:	Śruba gojąca Ø 6,0 H 3,0 JDEvolution Plus
EVHA65:	Śruba gojąca Ø 6,0 H 5,0 JDEvolution Plus
EVHA67:	Śruba gojąca Ø 6,0 H 7,0 JDEvolution Plus
EVHA753:	Śruba gojąca Ø 7,5 H 3,0 JDEvolution Plus
EVHA755:	Śruba gojąca Ø 7,5 H 5,0 JDEvolution Plus
EVHA54TS:	Śruba gojąca do tkanek miękkich Ø 5,0 H 4,0 JDEvolution Plus
EVHA56TS:	Śruba gojąca do tkanek miękkich Ø 5,0 H 6,0 JDEvolution Plus



Transfer wyciskowy:

ŁYŻKA OTWARTA

EVICOT4C:	Transfer wyciskowy łyżka otwarta Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVICOT5C:	Transfer wyciskowy łyżka otwarta Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVICOT6C:	Transfer wyciskowy łyżka otwarta Ø 6.0 JDEvolution Plus
EVICOTNEC:	Transfer łyżka otwarta dla mostu
EVICOTS:	Śruba do transferu wyciskowego z łyżką otwartą JDEvolution Plus
EVICOT5TSC:	Transfer wyciskowy do tkanek miękkich łyżka otwarta Ø 5.0

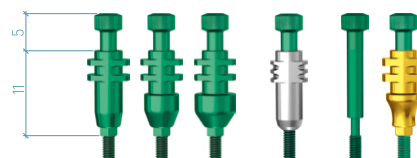

ŁYŻKA ZAMKNIĘTA


EVICCT4C:	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVICCT5C:	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVICCT6C:	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Ø 6.0 JDEvolution Plus
EVICCTS:	Śruba do transferu wyciskowego z łyżką zamkniętą JDEvolution Plus
EVICCTIC:	Transfer wyciskowy łyżka zamknięta Direct Press Fit JDEvolution Plus



Łącznik tymczasowy:


EVTAE:	Łącznik tymczasowy z hexem JDEvolution Plus
EVTAEPC:	Łącznik tymczasowy z hexem Peek JDEvolution Plus
EVTANEC:	Łącznik tymczasowy bez hexa JDEvolution Plus
EVTAEETSC:	Łącznik tymczasowy typu Multi-unit do tkanek miękkich z hexem JDEvolution Plus
EVTANETSC:	Łącznik tymczasowy typu Multi-unit do tkanek miękkich bez hexa JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

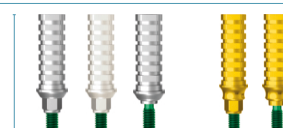


Łącznik prosty:

EVNSA4510C:	Łącznik prosty Ø 4.5 H 1.5 JDEvolution Plus
EVNSA4520C:	Łącznik prosty Ø 4.5 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA4540C:	Łącznik prosty Ø 4.5 H 4.0 JDEvolution Plus
EVNSA5020C:	Łącznik prosty Ø 5.0 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA5040C:	Łącznik prosty Ø 5.0 H 4.0 JDEvolution Plus
EVNSA6020C:	Łącznik prosty Ø 6.0 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA6040C:	Łącznik prosty Ø 6.0 H 4.0 JDEvolution Plus
EVNSA5020TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich Ø 5.0 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA5040TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich Ø 5.0 H 4.0 JDEvolution Plus

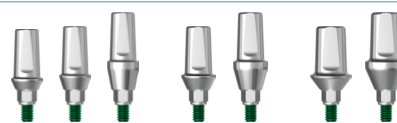

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

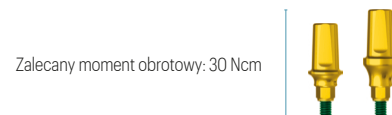

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik GP:

EV15GPAEC:	Łącznik GP 15° JDEvolution Plus
EV25GPAEC:	Łącznik GP 25° JDEvolution Plus
EVGPA40EC:	Łącznik GP z hexem Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVGPA40NEC:	Łącznik GP bez hexa Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVGPAEC:	Łącznik GP z hexem Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVGPA50NEC:	Łącznik GP bez hexa Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVGPAEPC:	Łącznik GP z hexem Peek Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVGPA60EC:	Łącznik GP z hexem Ø 6.0 JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Łącznik anatomiczny:

EVEA15:	Łącznik anatomiczny H 1.5 JDEvolution Plus
EVEA30:	Łącznik anatomiczny H 3.0 JDEvolution Plus
EV15A15:	Łącznik anatomiczny kątowny 15° Ø 5.0 H 1.5
EV15A15N:	Łącznik anatomiczny kątowny 15° Ø 4.5 H 1.5
EV15A30:	Łącznik anatomiczny kątowny 15° Ø 5.0 H 3.0
EV15A30N:	Łącznik anatomiczny kątowny 15° Ø 4.5 H 3.0
EV25A15:	Łącznik anatomiczny kątowny 25° Ø 5.0 H 1.5
EV25A30:	Łącznik anatomiczny kątowny 25° Ø 5.0 H 3.0

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik Rapid:

EVRA15C:	Łącznik Rapid H 1.5 JDEvolution Plus
EVRA30C:	Łącznik Rapid H 3.0 JDEvolution Plus
EVRA15D:	Łącznik Rapid bez czapeczki gojącej i transferu H 1.5 JDEvolution Plus
EVRA30D:	Łącznik Rapid bez czapeczki gojącej i transferu H 3.0 JDEvolution Plus
EVRAHC	Czapeczka gojąca do łącznika Rapid
EVRAIC	Transfer wyciskowy do łącznika Rapid
EVRAAR	Analog łącznika Rapid

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik Wax-up

EVWAEC:	Wax-up łącznik aktywny
EVWANEC:	Wax-up łącznik pasywny

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik kobaltowo-chromowy:

EVCCEC:	Łącznik kobaltowo-chromowy aktywny JDEvolution Plus
EVCCNEC:	Łącznik kobaltowo-chromowy pasywny JDEvolution Plus
EVCACCNEC:	Łącznik kobaltowo-chromowy typu Multi-unit pasywny JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

15 Ncm

Łącznik złote:

EVGAEC:	Łącznik złoty aktywny JDEvolution Plus
EVGANEC:	Łącznik złoty pasywny JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Łącznik typu Multi-unit:

EVNCA10C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 1.0 JDEvolution Plus
EVNCA15C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 1.5 JDEvolution Plus
EVNCA20C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 2.0 JDEvolution Plus
EVNCA30C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 3.0 JDEvolution Plus
EVNCA40C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 4.0 JDEvolution Plus
EVNCA70C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 7.0 JDEvolution Plus
EVNCA90C:	Łącznik prosty typu Multi-unit H 9.0 JDEvolution Plus
EVNCA15TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich H 1.5 JDEvolution Plus
EVNCA30TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich H 3.0 JDEvolution Plus
EVNCA40TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich H 4.0 JDEvolution Plus
EVNCA50TSC:	Łącznik prosty typu Multi-unit do tkanek miękkich H 5.0 JDEvolution Plus
EVCA1725C:	Łącznik typu Multi-unit kątowny 17° H 2.5 JDEvolution Plus
EVCA1735C:	Łącznik typu Multi-unit kątowny 17° H 3.5 JDEvolution Plus
EVCA3025C:	Łącznik typu Multi-unit kątowny 30° H 2.5 JDEvolution Plus
EVCA3035C:	Łącznik typu Multi-unit kątowny 30° H 3.5 JDEvolution Plus
EVCA1725TSC:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 17° H 2.5 JDEvolution Plus
EVCA1735TSC:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 17° H 3.5 JDEvolution Plus
EVA275C:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 17° H 5.0 JDEvolution Plus
EVCA3025TSC:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 30° H 2.5 JDEvolution Plus
EVCA3035TSC:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 30° H 3.5 JDEvolution Plus
EVCA3050TSC:	Łącznik typu Multi-unit kątowny do tkanek miękkich 30° H 5.0 JDEvolution Plus
EVA137C:	Łącznik prosty typu Multi-unit aktywny H 1.5 JDEvolution Plus
EVA138C:	Łącznik prosty typu Multi-unit aktywny H 3.0 JDEvolution Plus
EVS105:	Śruba do łącznika prostego typu Multi-unit aktywnego H 1.5 JDEvolution Plus
EVS106:	Śruba do łącznika prostego typu Multi-unit aktywnego H 3 JDEvolution Plus
EVCASA:	Śruba do łącznika typu Multi-unit kątownego JDEvolution Plus
EVCAPS:	Śruba protetyczna do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAPSL:	Długa śruba protetyczna do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAPSA:	Śruba protetyczna kątowna do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICOTEC:	Transfer wyciskowy aktywny otwarta łyżka do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICOTC:	Transfer wyciskowy otwarta łyżka do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICOTLC:	Transfer wyciskowy otwarta łyżka długi do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICOTO2:	Śruba do transferu wyciskowego otwarta łyżka do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICOTO4:	Śruba do transferu wyciskowego otwarta łyżka długi do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAICCTC:	Transfer wyciskowy zamknięta łyżka dla łącznika typu Multi-unit

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm


Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm

EVCAHC:	Czapka gojąca dla łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAHCL:	Czapka gojąca H 6.0 do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAHC9:	Czapka gojąca H 9.0 do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAHCB:	Czapka gojąca Peek do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAGPAEC:	Łącznik GP aktywny do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAGPANEC:	Łącznik GP pasywny do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCATANEWSC:	Łącznik tymczasowy bez hexa do gładkiego spawania do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCATANECS:	Łącznik tymczasowy bez hexa do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCATANEWC:	Łącznik tymczasowy bez hexa dla spawania do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCAWANECS:	Wax-Up łącznik pasywny dla łącznika stożkowego JDEvolution Plus

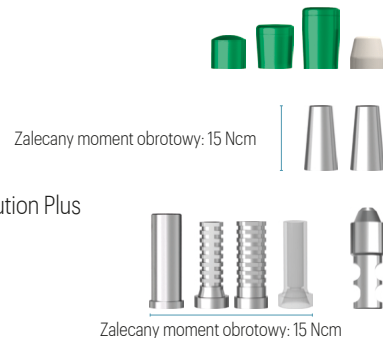

Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm

Śruba protetyczna


EVS:	Śruba protetyczna
EVSA:	Śruba protetyczna kątowna

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

Interfejs

EVINTEC:	Interfejs z hexem JDEvolution Plus
EVINTNEC:	Interfejs bez hexa JDEvolution Plus
70287C:	Interfejs bez hexa do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

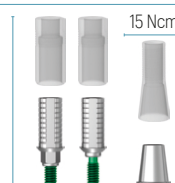


15 Ncm

Łącznik AS


EVASCEC:	Łącznik AS z hexem JDEvolution Plus
EVASCNEC:	Łącznik AS bez hexa JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

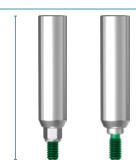

TiBase, JDScanBody i analog laboratoryjny Implantu CAD CAM:

EVSBCEC:	ScanBody aktywny JDEvolution Plus
EVCASBCEC:	ScanBody do łącznika typu Multi-unit JDEvolution
EVCASBCEEC:	ScanBody aktywny do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
EVCASBCECS:	On Top ScanBody do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus
JDSCGIOS:	ScanBody Full Arch Tracer
JDSCGIOSE:	ScanBody Full Arch Tracer Hexagonal
JDSCGIOSR:	Scan Body Rectangular Full Arch Tracer

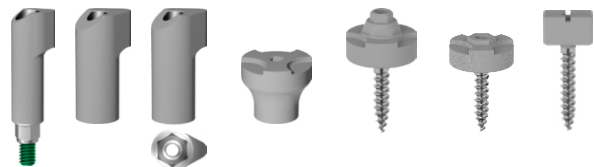

EVHSB53:	On Top ScanBody z hexem Ø 5.0 H 3.0 JDEvolution Plus
EVHSB55:	On Top ScanBody z hexem Ø 5.0 H 5.0 JDEvolution Plus
EVHSB57:	On Top ScanBody z hexem Ø 5.0 H 7.0 JDEvolution Plus
EVSCPC:	ScanPost JDEvolution Plus



EVTIBC:	TiBase z hexem Ø 4.25 H 0.5 C 4.7 JDEvolution Plus
EVTIBNEC:	TiBase bez hexa Ø 4.25 H 0.5 C 4.7 JDEvolution Plus
EVTIB15C:	TiBase z hexem Ø 4.25 H 1.5 C 4.7 JDEvolution Plus
EVTIB15NEC:	TiBase bez hexa długości Ø 4.25 H 1.5 C 4.7 JDEvolution Plus
EVTIB30C:	TiBase z hexem Ø 4.25 H 3.0 C 4.7 JDEvolution Plus
EVTIB30NEC:	TiBase bez hexa długości Ø 4.25 H 3.0 C 4.7 JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



EVTIBNC:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 0.5 C 7.7 JDEvolution Plus
EVTIBNENC:	TiBase bez hexa długości H 0.5 C 7.7 JDEvolution Plus
EVTIB15NC:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 1.5 C 7.7 JDEvolution Plus
EVTIB15NENC:	TiBase bez hexa długości Ø 4.4 H 1.5 C 7.7 JDEvolution Plus
EVTIB30NC:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 3.0 C 7.7 JDEvolution Plus
EVTIB30NENC:	TiBase bez hexa długości Ø 4.4 H 3.0 C 7.7 JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



EVA150C:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 0.5 C 7.7 do kanału kątownego
EVA151C:	TiBase bez hexa nowy Ø 4.4 H 0.5 C 7.7 do kanału kątownego
EVA152C:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 1.5 C 7.7 do kanału kątownego
EVA153C:	TiBase bez hexa nowy Ø 4.4 H 1.5 C 7.7 do kanału kątownego
EVA154C:	TiBase z hexem długości Ø 4.4 H 3.0 C 7.7 do kanału kątownego
EVA155C:	TiBase bez hexa nowy Ø 4.4 H 3.0 C 7.7 do kanału kątownego

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



EVA133C:	Interfejs TiBase z hexem H 6.0 do kanału kątownego JDEvolution Plus
EVA134C:	Interfejs TiBase bez hexa H 6.0 do kanału kątownego JDEvolution Plus
EVA135C:	Interfejs TiBase z hexem H 10.0 do kanału kątownego JDEvolution Plus
EVA136C:	Interfejs TiBase bez hexa H 10.0 do kanału kątownego JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



EVCAITEC:	Interfejs CAD CAM z hexem do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus (H 7.5)
EVA139C:	TiBase z hexem do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus (H 5.0)
EVCAITC:	Interfejs CAD CAM bez hexa do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus (H 7.3)
EVCATIBC:	TiBase do łącznika typu Multi-unit JDEvolution Plus (H 5.0)

Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm



EVS110	Śruba protetyczna dla łącznika typu Multi-unit bezpośrednia
EVS111	Śruba protetyczna dla łącznika typu Multi-unit bezpośrednia długa
EVS112	Śruba protetyczna dla kąтового kanału łącznika typu Multi-unit bezpośrednia
EVANCN:	Analog implantu CAD CAM JDEvolution Plus Nowy
EVCAARCN	Analog łącznika typu Multi-unit CAD CAM Nowy
EVPMNC:	Przedfrezowany blok łącznika JDEvolution Plus

Zalecany moment obrotowy: 15 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Łącznik Konometryczny:

EVCP05C:	Łącznik konometryczny prosty H 0.5 JDEvolution Plus
EVCP10C:	Łącznik konometryczny prosty H 1.0 JDEvolution Plus
EVCP20C:	Łącznik konometryczny prosty H 2.0 JDEvolution Plus
EVCP30C:	Łącznik konometryczny prosty H 3.0 JDEvolution Plus
EVCP40C:	Łącznik konometryczny prosty H 4.0 JDEvolution Plus
EV7CP20C:	Łącznik konometryczny kątowy 7,5° H 2.0 JDEvolution Plus
EV15CP20C:	Łącznik konometryczny kątowy 15° H 2.0 JDEvolution Plus
EV22CP20C:	Łącznik konometryczny kątowy 22.5° H 2.0 JDEvolution Plus
EVA300C:	Łącznik konometryczny kątowy 30° H 2.0 JDEvolution Plus
EVA285C:	Łącznik konometryczny kątowy 7,5° H 3.0 JDEvolution Plus
EVA286C:	Łącznik konometryczny kątowy 15° H 3.0 JDEvolution Plus
EVA287C:	Łącznik konometryczny kątowy 22,5° H 3.0 JDEvolution Plus
EVA288C:	Łącznik konometryczny kątowy 30° H 3.0 JDEvolution Plus
EVCPS:	Śruba do łącznika konometrycznego JDEvolution Plus
EVA130C:	Nasadka z bolcem do spawania wewnątrzustnego
EVA131C:	Nasadka do protez częściowych lub pełnołukowych stałych
EVA132C:	Nasadka antyrotacyjna do pojedynczego elementu
EVCPIIC	Transfer wyciskowy PEEK dla łącznika konometrycznego
EVCPAN	Analog łącznika konometrycznego

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm




Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Łącznik Kulowy:

EVBA15:	Łącznik kulowy H 1.5 JDEvolution Plus
EVBA30:	Łącznik kulowy H 3.0 JDEvolution Plus
EVBA50:	Łącznik kulowy H 5.0 JDEvolution Plus
EVBAA	Analog łącznika kulowego
EVBAHC	Nasadka elastyczna z pojemnikiem dla łącznika kulowego
EVBAN	Nasadka retencyjna dla łącznika kulowego

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm

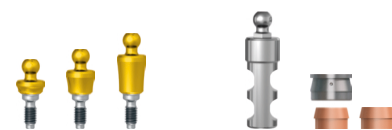

Łącznik Emi:

EVEMI15:	Łącznik Emi H 1.5 JDEvolution Plus
EVEMI30:	Łącznik Emi H 3.0 JDEvolution Plus
EVEMI50:	Łącznik Emi H 5.0 JDEvolution Plus
EVEMISCK	Smart Cap Attachment dla łącznika Emi
EVEMIHC	Nasadka elastyczna z pojemnikiem dla łącznika Emi
EVEMIN	Nasadka elastyczna retencyjna (1.2 kg) dla łącznika Emi
EVEMIH	Pojemnik na nasadki Emi
EVEMIIC	Transfer wyciskowy plastikowy dla łącznika Emi
EVEMIICS	Transfer wyciskowy stalowy dla łącznika Emi
EVEMINT	Biała nasadka retencyjna (1.8 kg) dla łącznika Emi
EVEMINY	Żółta nasadka retencyjna (0.6 kg) dla łącznika Emi
EVEMINP	Fioletowa nasadka retencyjna (2.5 kg) dla łącznika Emi
EVEMINB	Nasadka retencyjna laboratoryjna dla łącznika Emi
EVEMIEIT	Narzędzie do wyjmowania i wstawiania nasadek
EVEMIA	Analog łącznika Emi

Zalecany moment obrotowy: 30 Ncm



Analog implantu:

EVAN:	Analog implantu JDEvolution Plus
-------	----------------------------------



Bone Mill (Profiler):

JDBMNNC:	Bone Mill Ø 5.0 and Guide JDEvolution Plus
JDBM6NC:	Bone Mill Ø 6.0 and Guide JDEvolution Plus
JDBMGNN:	Bone Mill Guide JDEvolution Plus




Wiertła krótkie:

JDDICS4	Wiertło krótkie Ø 4mm L 6 JDICon Plus
JDDICS4D	Wiertło krótkie Ø 4mm L 6 do gęstej kości JDICon Plus
JDDICS5	Wiertło krótkie Ø 5mm L 6 JDICon Plus



Narzędzia do implantów i protetyki:

EVID:	Wkrętak implantologiczny JDEvolution Plus
EVIDL:	Wkrętak implantologiczny długi JDEvolution Plus
JDID127	Wskaźnik głębokości implantu JDEvolution Plus
EVSDPF15:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 15 JDEvolution Plus
EVSDPF20:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 20 JDEvolution Plus
EVSDPF25:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 25 JDEvolution Plus
EVSDPF35:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 35 JDEvolution Plus
EVSDPF60:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 60 JDEvolution Plus
EVSDCAF	Wkrętak do łącznika typu Multi-unit dla JDTorque
EVSDP20:	Wkrętak protetyczny L 20 JDEvolution Plus
EVSDP25:	Wkrętak protetyczny L 25 JDEvolution Plus
EVSDP30:	Wkrętak protetyczny L 30 JDEvolution Plus
JDID105	Wkrętak protetyczny JDEvolution Plus do narzędzi chirurgicznych
EVSDCA	Wkrętak do łącznika typu Multi-unit
EVSDPF25A	Wkrętak do kątovej śruby dla JDTorque L 25
EVSDPF30A	Wkrętak do kątovej śruby dla JDTorque L 30
EVSDPF25AV	Wkrętak do kątovej śruby dla Multi-Unit Direct JDTorque L 25
EVSDPF30AV	Wkrętak do kątovej śruby dla Multi-Unit Direct JDTorque L 30
EVSDP32AV	Wkrętak do śruby Multi-Unit Direct EVS112 (kanał prosty)
EVSUD	Narzędzie chirurgiczne JDEvolution
JDG	JDGuide
EVGMC	Implant Mounter dla JDEvolution
EVGMLC	Implant Mounter długi dla JDEvolution
JDID102	Narzędzie ZAPA
JDSPR	Sonda głębokościowa implantów stomatologicznych

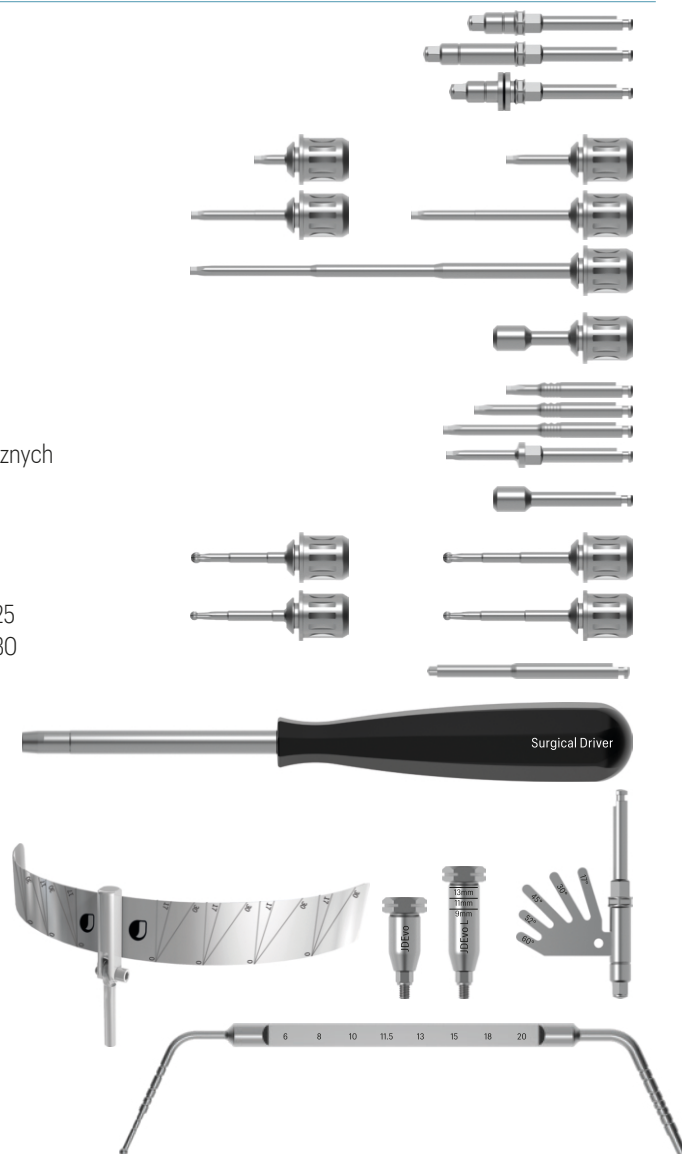

Wskaźniki kierunku:

JDDI	Wskaźnik kierunku
JDDIS	Wskaźnik kierunku krótki
JDDI17	Wskaźnik kierunku 17°
JDDI30	Wskaźnik kierunku 30°
JDDI45	Wskaźnik kierunku 45°





J DENTAL CARE

just smile

KASETY CHIRURGICZNE I NARZĘDZIA

Tworzymy innowacyjne narzędzia chirurgiczne,
które usprawniają codzienną praktykę kliniczną stomatologów.



Made in Italy

JD SURGICAL KIT

Kod produktu: JDPS - JDPCN

Kompaktowy i łatwy w użyciu

Kaseta chirurgiczna JD to kompaktowy i prosty w obsłudze zestaw, który można myć i sterylizować, ponieważ został przetestowany pod kątem odporności na cykle autoklawu. Dostępny jest w dwóch wersjach: ze stoperami wiertel i bez nich.

Wybierz kasę, która najlepiej odpowiada potrzebom Twojej praktyki chirurgicznej.





Kaseta chirurgiczna JD
Plastikowa kaseta standardowa
Kod: JDPS

Wiertła:

JDPD	Wiertło (pilotujące)
JDDR20	Wiertło spiralne Ø 2.0
JDDR24	Wiertło spiralne Ø 2.4
JDDR28	Wiertło spiralne Ø 2.8
JDDR32	Wiertło spiralne Ø 3.2
JDDR36	Wiertło spiralne Ø 3.6
JDDR40	Wiertło spiralne Ø 4.0
JDDR44	Wiertło spiralne Ø 4.4
JDDR48*	Wiertło spiralne Ø 4.8
JDDREXT	Przedłużka wiertła Nowość

*Zamawiane osobno



Narzędzia do wprowadzania implantów i elementów protetycznych:

JDTW	Klucz dynamometryczny JDTorque
JDTWA	Chirurgiczny adapter do JDTorque

Uwaga: Wszystkie śrubokręty protetyczne będą dostarczone w wersji kompatybilnej z wybraną linią implantów.



Wskaźniki kierunku

JDDI	Wskaźnik kierunku
JDDIS	Wskaźnik kierunku krótki



JD SURGICAL KIT

Kod produktu: JDPS - JDPCN



JD Surgical Kit ze stoperami
Plastikowa kaseta ze stoperami
Kod: JDPCN

Ta kaseta zawiera te same produkty co podstawowa kaseta chirurgiczna JD, z wyjątkiem wiertel, które zostały zastąpione wersją ze stoperami. Dodatkowo, do kasety dodano stopery wiertel (Drill Stops).

Wiertła:

JDDR20C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 2.0
JDDR24C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 2.4
JDDR28C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 2.8
JDDR32C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 3.2
JDDR36C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 3.6
JDDR40C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 4.0
JDDR44C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 4.4
JDDR48C*	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 4.8

*Zamawiane osobno



Stoperzy:

JDDRST60N	Stoper L 6
JDDRST80N	Stoper L 8
JDDRST100N	Stoper L 10
JDDRST115N	Stoper L 11.5
JDDRST130N	Stoper L 13
JDDRST150N	Stoper L 15



**Wiertła:**

W pierwszym rzędzie kasety chirurgicznej JD znajdują się wiertła spiralne i przedłużenie wiertła, używane do przygotowania miejsca pod implant. Na trzonie wiertel spiralnych są znaczniki głębokości, w tym wyraźniejszy znacznik od 10 mm do 11,5 mm. Aby zapewnić optymalną stabilność pierwotną implantu, zaleca się przestrzeganie protokołu wiercenia zgodnie z instrukcjami dostępnymi w broszurach dla każdej linii implantów na stronie: www.jdentalcare.com.

Wiertła spiralne zawarte w kasetach chirurgicznych charakteryzują się powłoką DLC, która zapewnia następujące korzyści:

- Lepsza widoczność oznaczeń głębokości – podczas pracy wiertel chirurgicznych z dużą prędkością powłoka DLC sprawia, że oznaczenia głębokości na wiertłach są wyraźnie widoczne, co ułatwia ich praktyczne zastosowanie.
- Wysoka odporność na zużycie i korozję – powłoka DLC znacząco zwiększa trwałość wiertel.
- Minimalizacja tarcia i przegrzewania kości – dzięki właściwościom DLC zmniejsza się tarcie, co ogranicza nagrzewanie kości podczas osteotomii implantacyjnej.

Protokół wiercenia (sekwencja):

1. Odpowiedni implant
2. Przeanalizuj rodzaj kości: czy jest miękka, średnia czy gęsta.
3. Postępuj zgodnie z zalecaną sekwencją wiercenia, dostosowaną do rodzaju kości i wybranego implantu.
4. Sprawdź długość wiertel spiralnych w prawym dolnym rogu kasety chirurgicznej.

Uwaga: Aby umieścić implant JD Ø6,0, należy osobno zakupić odpowiednie wiertło chirurgiczne Ø4,8, które nie jest zawarte w standardowej kasetce.

Narzędzia do wprowadzania implantów:

Po lewej stronie kasety JD Surgical Kit znajdują się dwa wkrętaki implantu – jeden krótki, drugi długi. Dostarczymy kompatybilne narzędzie zgodnie z wybraną linią implantów.

Ważne: Aby ułatwić końcową rehabilitację protetyczną, podczas ostatecznego osadzania implantu, gdy osiągnięta zostanie pożądana głębokość, należy wyrównać bok sześciokąta, a nie jego wierzchołek, z powierzchnią przedsiionkową. W ten sposób kształt sześciokątnego połączenia wewnętrznego umożliwi prawidłowe ustawienie i orientację łącznika protetycznego.

**Wkrętaki protetyczne:**

Kaseta JD Surgical Kit zawiera również dwa wkrętaki do śrub protetycznych, śrub zamykających oraz śrub transferowych.

Te wkrętaki są zaprojektowane do użytku zarówno ręcznego, jak i z kluczem dynamometrycznym JDTorque.



Dostarczymy Ci wkrętek protetyczny odpowiedni do wybranej linii implantów.

Adapter chirurgiczny:

Adapter chirurgiczny jest używany z odpowiednim narzędziem wkrętek implantu (maszynowy albo na raczetę).

Jeśli ręczne wprowadzenie implantu nie jest możliwe, należy umieścić adapter w urządzeniu JDTorque, aby dokręcić implant do jego ostatecznej pozycji.

**JDTorque:**

JDTorque to ręczny klucz dynamometryczny wyprodukowany przez JDentalCare.

Pozwala na ręczne wprowadzanie, dokręcanie i/lub odkręcanie implantów, łączników oraz śrub protetycznych JDentalCare, zapewniając precyzyjną wartość momentu obrotowego.

Ma opcie momentu obrotowego od 10 do 80 Ncm.

**Wskaźniki kierunku:**

Kaseta zawiera dwa wskaźniki kierunku: jeden krótki (10 mm) i jeden długi (15 mm).

Te narzędzia należy stosować po użyciu wiertła Ø2,0 mm. Dodatkowo, wskaźniki posiadają oznaczenia pozwalające na pomiar głębokości miejsca na implant.

**Stopery:**

Te urządzenia są używane razem z wiertłem w celu ograniczenia głębokości wiercenia do określonej wartości podczas przygotowania miejsca na implant.



JDPAD SURGICAL KIT

Kod produktu: EVPS - EVPCN

Kompaktowa i łatwa w użyciu


Kaseta chirurgiczna JDPad składa się z silikonowego korpusu i aluminiowej pokrywy. Jest to kaseta w pełni demontowalna, nadająca się do mycia i sterylizacji, ponieważ została przetestowana pod kątem odporności na cykle autoklawu.

Kaseta dostępna jest w dwóch wersjach:

- Ze stoperami do wiertel
- Bez stoperów do wiertel

Wybierz kasety, która najlepiej odpowiada wymaganiom Twojej praktyki chirurgicznej.



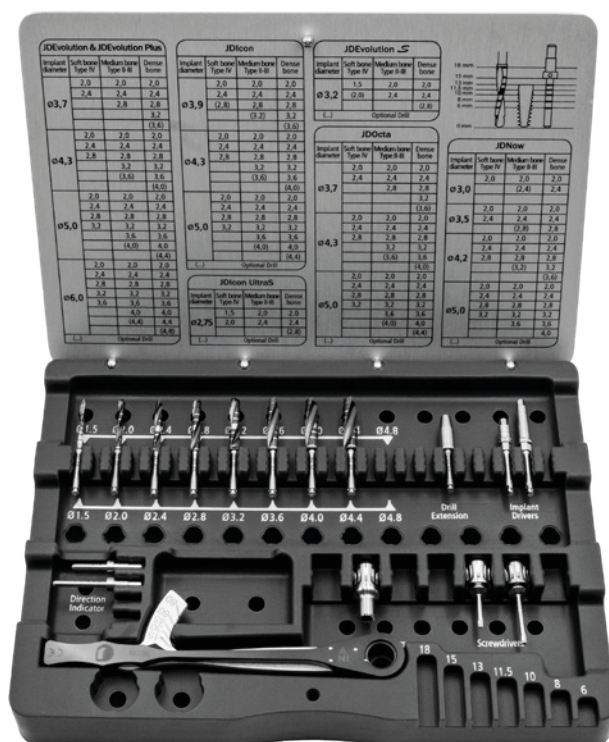

Kaseta chirurgiczna JDPad
JDPad Standard
Kod: EVPS

Wiertła:

JDPD	Wiertło (pilotujące)
JDDR20	Wiertło spiralne Ø 2.0
JDDR24	Wiertło spiralne Ø 2.4
JDDR28	Wiertło spiralne Ø 2.8
JDDR32	Wiertło spiralne Ø 3.2
JDDR36	Wiertło spiralne Ø 3.6
JDDR40	Wiertło spiralne Ø 4.0
JDDR44	Wiertło spiralne Ø 4.4
JDDR48*	Wiertło spiralne Ø 4.8
JDDREXT	Przedłużka wiertła Nowość

*Zamawiane osobno



Narzędzia do wprowadzania implantów i elementów protetycznych:

JDTW	Klucz dynamometryczny JDTorque
JDTWA	Chirurgiczny adapter do JDTorque

Uwaga: Wszystkie śrubokręty protetyczne będą dostarczone w wersji kompatybilnej z wybraną linią implantów.




Wskaźniki kierunku:

JDDI	Wskaźnik kierunku
JDDIS	Wskaźnik kierunku krótki



JDPAD SURGICAL KIT

Kod produktu: EVPS - EVPCN

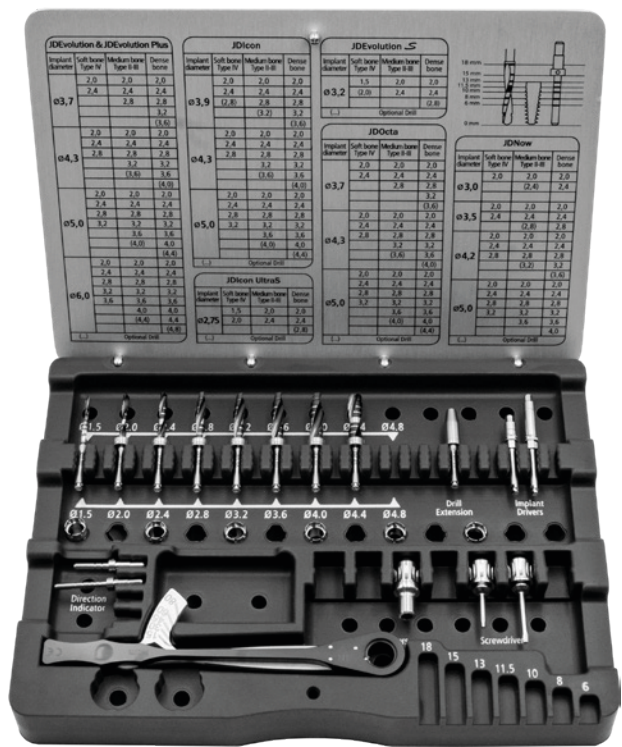

Kaseta chirurgiczna JDPad ze stoperami wiertel (Drill Stops)
JDPad w/ Drill Stops
Kod: EVPCN

Ta kaseta zawiera te same produkty, co kaseta chirurgiczna JDPad, z wyjątkiem wiertel, które zostały zastąpione wersją ze stoperami. Dodatkowo do kasety dodano stopery wiertel (Drill Stops).

Wiertła:

JDDR20C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 2.0
JDDR24C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 2.4
JDDR28C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 2.8
JDDR32C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 3.2
JDDR36C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø3.6
JDDR40C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 4.0
JDDR44C	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 4.4
JDDR48C*	Wiertło spiralne ze stoperem Ø 4.8

*Zamawiane osobno

Stoperzy:

JDDRST60N	Stoper L 6
JDDRST80N	Stoper L 8
JDDRST100N	Stoper L 10
JDDRST115N	Stoper L 11.5
JDDRST130N	Stoper L 13
JDDRST150N	Stoper L 15



**Wiertła:**

W pierwszym rzędzie kasety chirurgicznej JD znajdują się wiertła spiralne i przedłużenie wiertła, używane do przygotowania miejsca pod implant. Na trzonie wiertel spiralnych są znaczniki głębokości, w tym wyraźniejszy znacznik od 10 mm do 11,5 mm. Aby zapewnić optymalną stabilność pierwotną implantu, zaleca się przestrzeganie protokołu wiercenia zgodnie z instrukcjami dostępnymi w broszurach dla każdej linii implantów na stronie: www.jdentalcare.com.

Wiertła spiralne zawarte w kasetach chirurgicznych charakteryzują się powłoką DLC, która zapewnia następujące korzyści:

- Lepsza widoczność oznaczeń głębokości – podczas pracy wiertel chirurgicznych z dużą prędkością powłoka DLC sprawia, że oznaczenia głębokości na wiertłach są wyraźnie widoczne, co ułatwia ich praktyczne zastosowanie.
- Wysoka odporność na zużycie i korozję – powłoka DLC znacząco zwiększa trwałość wiertel.
- Minimalizacja tarcia i przegrzewania kości – dzięki właściwościom DLC zmniejsza się tarcie, co ogranicza nagrzewanie kości podczas osteotomii implantacyjnej.

Protokół wiercenia (sekwencja):

1. Odpowiedni implant
2. Przeanalizuj rodzaj kości: czy jest miękka, średnia czy gęsta.
3. Postępuj zgodnie z zalecaną sekwencją wiercenia, dostosowaną do rodzaju kości i wybranego implantu.
4. Sprawdź długość wiertel spiralnych w prawym dolnym rogu kasety chirurgicznej.

Uwaga: Aby umieścić implant JD Ø6.0, należy osobno zakupić odpowiednie wiertło chirurgiczne Ø4.8, które nie jest zawarte w standardowej kasetce.

Narzędzia do wprowadzania implantów:

Po lewej stronie kasety JD Surgical Kit znajdują się dwa wkrętki implantu – jeden krótki, drugi długi. Dostarczymy kompatybilne narzędzie zgodnie z wybraną linią implantów.

Ważne: Aby ułatwić końcową rehabilitację protetyczną, podczas ostatecznego osadzania implantu, gdy osiągnięta zostanie pożądana głębokość, należy wyrównać bok sześciokąta, a nie jego wierzchołek, z powierzchnią przedsiionkową. W ten sposób kształt sześciokątnego połączenia wewnętrznego umożliwi prawidłowe ustawienie i orientację łącznika protetycznego.

**Wkrętki protetyczne:**

Kaseta JD Surgical Kit zawiera również dwa wkrętki do śrub protetycznych, śrub zamykających oraz śrub transferowych.

Te wkrętki są zaprojektowane do użytku zarówno ręcznego, jak i z kluczem dynamometrycznym JD Torque.



Dostarczymy Ci wkrętek protetyczny odpowiedni do wybranej linii implantów.

Adapter chirurgiczny:

Adapter chirurgiczny jest używany z odpowiednim narzędziem wkrętek implantu (maszynowy albo na raczetę).

Jeśli ręczne wprowadzenie implantu nie jest możliwe, należy umieścić adapter w urządzeniu JD Torque, aby dokręcić implant do jego ostatecznej pozycji.

**JD Torque:**

JD Torque to ręczny klucz dynamometryczny wyprodukowany przez JDentalCare.

Pozwala na ręczne wprowadzanie, dokręcanie i/lub odkręcanie implantów, łączników oraz śrub protetycznych JDentalCare, zapewniając precyzyjną wartość momentu obrotowego.

Ma opcie momentu obrotowego od 10 do 80 Ncm.

**Wskaźniki kierunku:**

Kaseta zawiera dwa wskaźniki kierunku: jeden krótki (10 mm) i jeden długi (15 mm).

Te narzędzia należy stosować po użyciu wiertła Ø2,0 mm. Dodatkowo, wskaźniki posiadają oznaczenia pozwalające na pomiar głębokości miejsca na implant.

**Stopery:**

Te urządzenia są używane razem z wiertłem w celu ograniczenia głębokości wiercenia do określonej wartości podczas przygotowania miejsca na implant.



JD BONE TRACK™ DRILLS KIT


Kod produktu: JDBTK

Prawidłowe i precyzyjne umieszczanie implantów w miejscach poekstrakcyjnych dzięki wiertłom JD Bone Track!

Wiertło JD Bone Track to zarejestrowany produkt, specjalnie zaprojektowany w celu ułatwienia wprowadzania implantu natychmiast po ekstrakcji.

Wiertła JD Bone Track charakteryzują się diamentowym korpusem tnącym oraz nietnącą końcówką, co pozwala na bezpieczne i kontrolowane przygotowanie łoża implantu.


Stosuj metodę Bone Track i osiągnij najlepsze rezultaty!

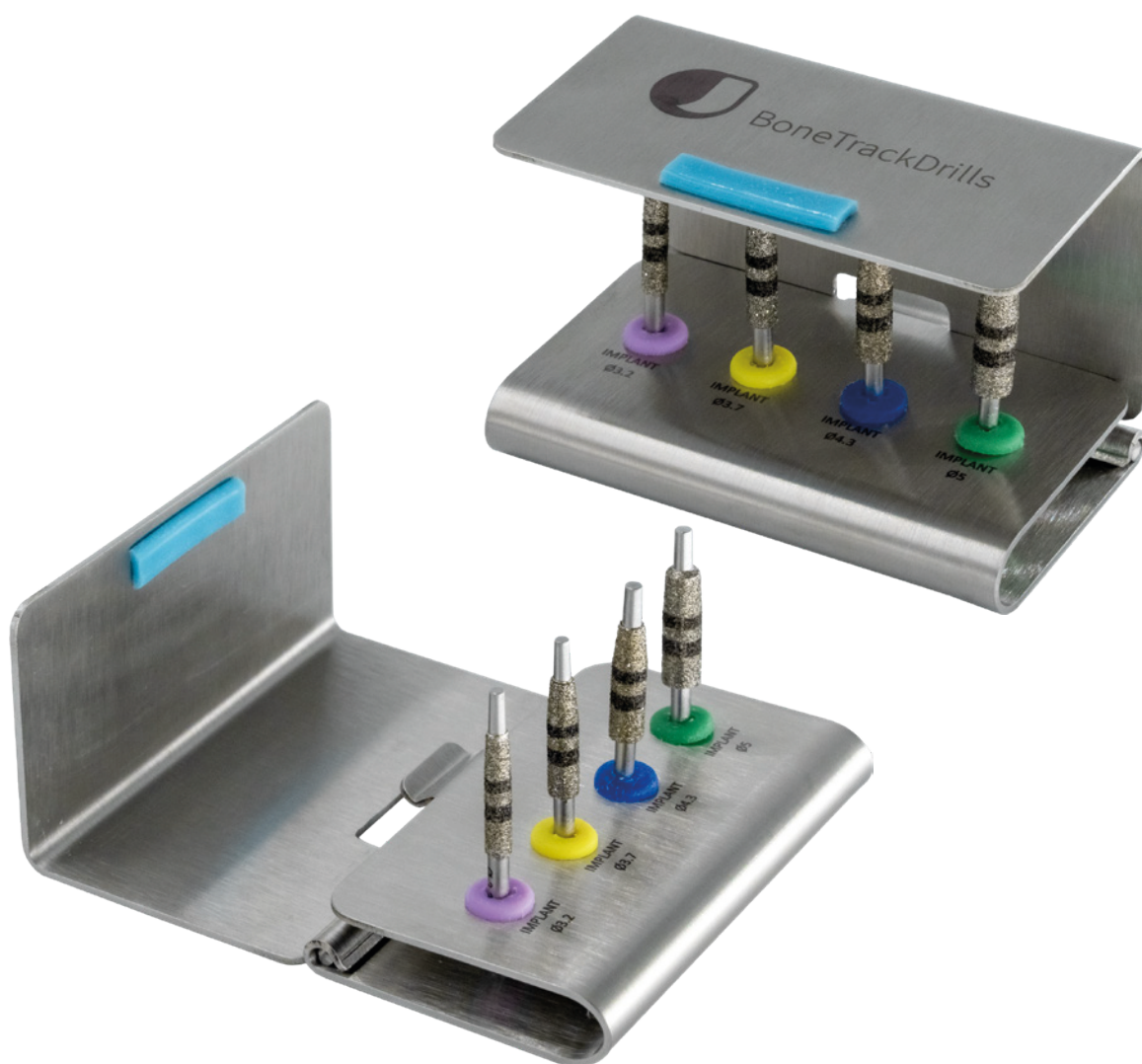

Wiertła JD Bone Track zostały specjalnie zaprojektowane w celu uproszczenia natychmiastowego wszczepienia implantu poekstrakcyjnego.

Wiertła JD Bone Track charakteryzują się diamentowym korpusem tnącym oraz nietnącą końcówką, co zapewnia kontrolowane przygotowanie łoża implantu.

Dostępne są w czterech różnych średnicach: (Ø 3,2 mm, Ø 3,7 mm, Ø 4,3 mm, Ø 5,0 mm)

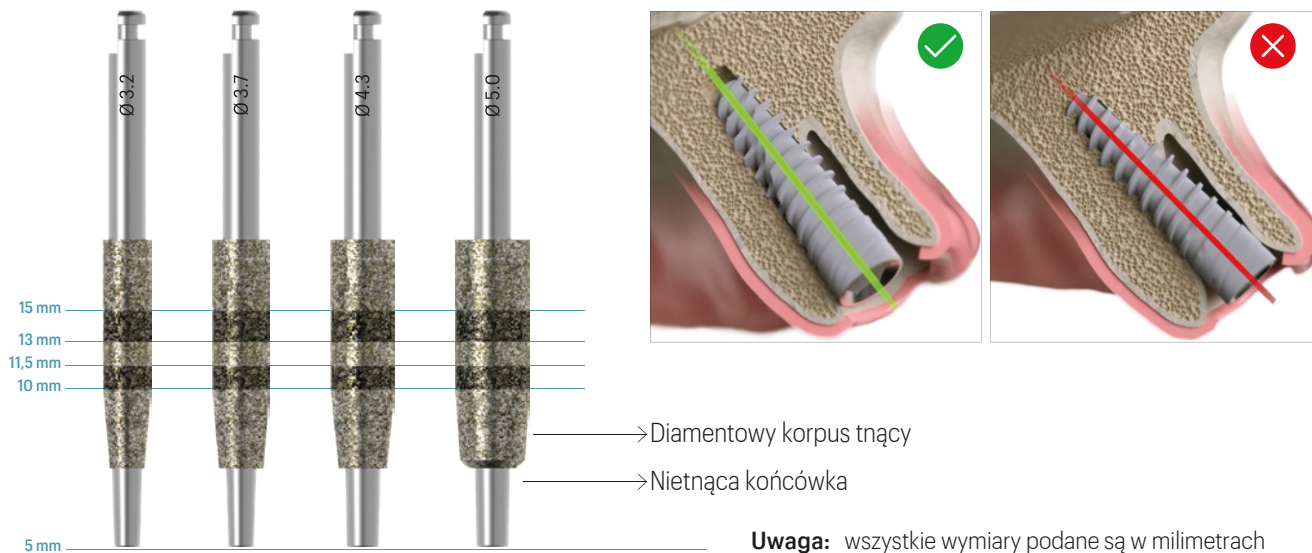

Wiertła do protokołu bez nawigacji:

JDDIADR32	Wiertło diamentowe Ø 3.2
JDDIADR37	Wiertło diamentowe Ø 3.7
JDDIADR43	Wiertło diamentowe Ø 4.3
JDDIADR50	Wiertło diamentowe Ø 5.0



JD ONEDRILL KIT

Kod produktu: JDODK

Kaseta JD Onedrill – uproszczony protokół wiercenia.

Kaseta JD Onedrill Kit składa się z 5 wiertel, które pozwalają na uproszczenie sekwencji wiercenia. W przypadku kości miękkiej lub średniej (Typ III-IV) wystarczy.

W przypadku kości gęstej (Typ I-II) zaleca się użycie dwóch kolejnych wiertel w odpowiedniej sekwencji. Wiertła JD Onedrill Kit są przeznaczone do przygotowania osteotomii pod implanty JDEvolution oraz JDEvolution S.





Wiertła JD Onedrill – specjalnie zaprojektowane dla efektywnej osteotomii

Wiertła JD Onedrill Kit mają stożkowy kształt i są wyposażone w cztery krawędzie tnące, co zapewnia precyzyjne i kontrolowane wiercenie. Ułatwiają sekwencję wiercenia, skracając czas zabiegu i zmniejszając pooperacyjne dolegliwości. Dostępne są w czterech średnicach: 3,2 mm, 3,7 mm, 4,3 mm i 5,0 mm, wiertła znakowane ze znacznikami w różnych kolorach.

Wiertła do protokołu bez prowadzenia chirurgicznego :

JDID	Wiertło pilotujące
JDOD32	Wiertło implantacyjne Ø 3.2
JDOD37	Wiertło implantacyjne Ø 3.7
JDOD43	Wiertło implantacyjne Ø 4.3
JDOD50	Wiertło implantacyjne Ø 5.0
JDDREXT	Przedłużka wiertła Nowość
JDOD32P	Wskaźnik kierunku dla JDOD32
JDOD37P	Wskaźnik kierunku dla JDOD37
JDOD43P	Wskaźnik kierunku dla JDOD43
JDOD50P	Wskaźnik kierunku dla JDOD50



JD GUIDED SURGERY KIT

Kod produktu: JDGSK

JD Guided Surgery Kit to kaseta chirurgiczna stworzona przez JDentalCare w celu wsparcia komputerowo nawigowanej chirurgii.


Kompletna, niezawodna i łatwa w użyciu.

Największa zaleta – kompatybilność: jedna kaseta umożliwia pracę ze wszystkimi implantami JDentalCare o średnicach od 2,75 mm do 5,0 mm i długościach od 6 mm do 15 mm.

Możliwość rozbudowy o wiertła 18, 20, 22, 24, 26 mm, przeznaczone do nawigowanego wszczepiania implantów skrzydłowych i nosowych.

Uwaga: Wiertła o długości 18, 20, 22, 24, 26 mm są dostępne w kasie JD Guided Surgery Kit Extra Drills (Kod: JDKIT02).



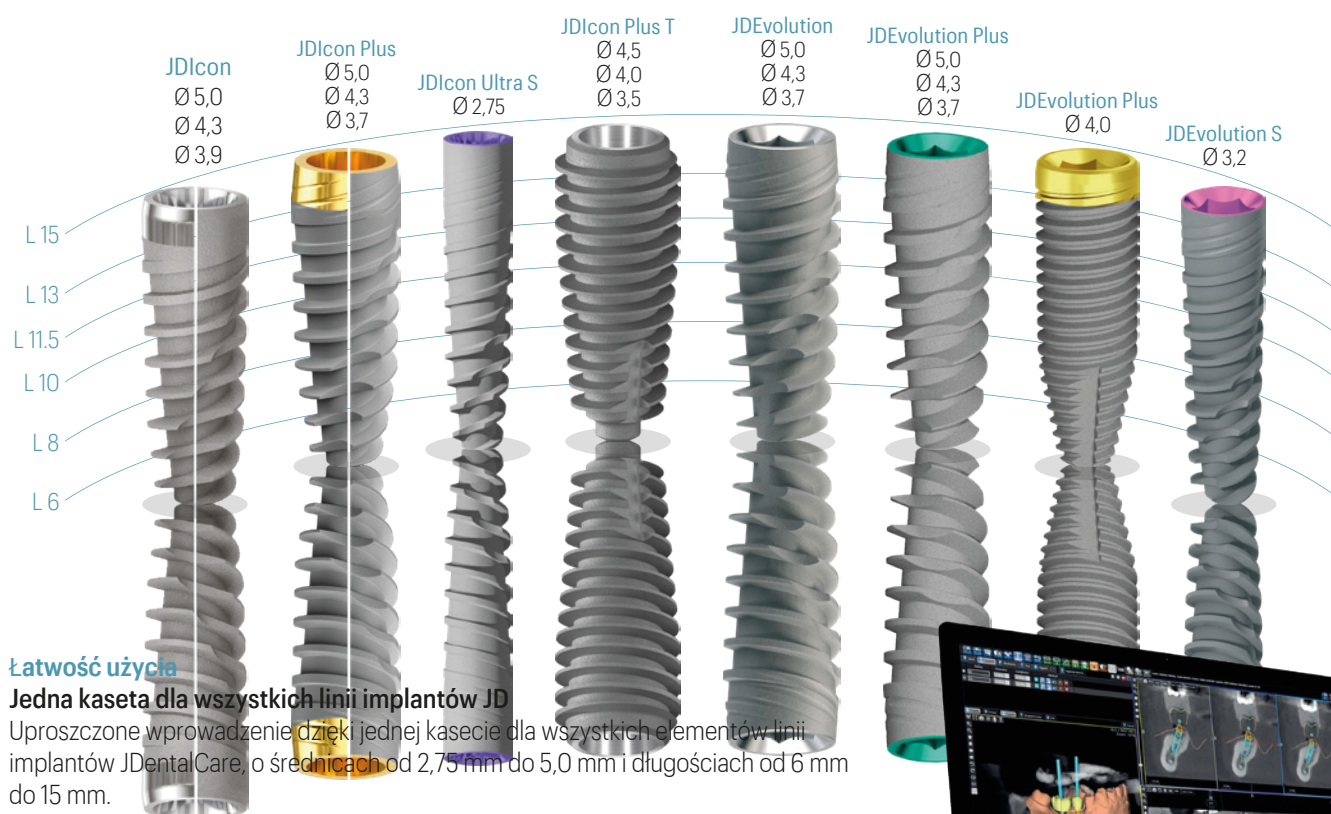

Pozwól, aby Twoja ręka była prowadzona przez JD Guided Surgery Kit

Idealne rozwiązanie do wykonania minimalnie inwazyjnej chirurgii z większą precyzją, większą przewidywalnością oraz lepszymi wynikami w kilku prostych krokach i kilkoma prostymi krokami chirurgii nawigowanej.

Kompatybilność

Kontrola głębokości implantacji nawigowanej

Wysoka precyzja w procedurach chirurgicznych: implanty są wprowadzane na zaplanowaną głębokość z użyciem wkrętaków, a narzędzia chirurgii nawigowanej są używane w połączeniu z pojedynczym uchwytem o średnicy 5,01 mm dla bezpiecznej kontroli głębokości implantu.



Precyzja

Łatwy w obsłudze interfejs oprogramowania

Jedna kaseta kompatybilna z głównymi programami do chirurgii nawigowanej dostępnymi na rynku.



ŚREDNICE
WEWNĘTRZNE:

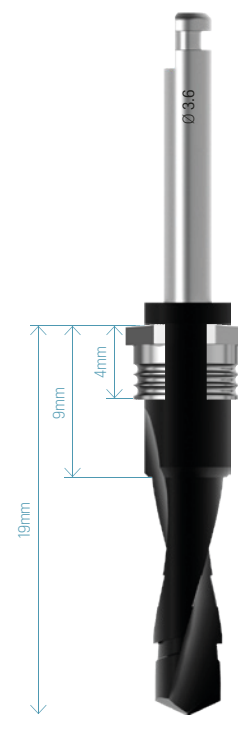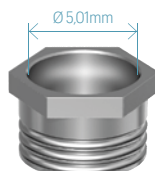

JD GUIDED SURGERY KIT

Kod produktu: JDGSK



Implant Mounter:

EVGMC	Implant Mounter dla JDEvolution
EVGMLC	Implant Mounter długi dla JDEvolution
ESGMC	Implant Mounter dla JDEvolution S
ESGMLC	Implant Mounter długi dla JDEvolution S
ICGMC	Implant Mounter dla JDIcon
ICGMC.	Implant Mounter dla JDIcon Plus
ICGMLC.	Implant Mounter długi dla JDIcon Plus
ISGMC	Implant Mounter dla JDIcon Ultra S



Uwaga: Dostarczymy prowadnice do wprowadzania implantów zgodnie z wybraną linią implantów.

Narzędzia do implantów i protetyki:

EVIDG	Wkrętak do chirurgii nawigowanej
EVSDP25	Wkrętak protetyczny L 25
EVSDPF25	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 25
JDID116	Adapter do implantów JDEvolution Plus*
JDID111	Adapter protetyczny JDEvolution S*
JDTW	Klucz dynamometryczny JDTorque
JDTWA	Chirurgiczny adapter do JDTorque

*Nie są zawarte w kasce. Do zamówienia oddzielnie.



Tuleje i wkłady:

JDBG	Tuleja szablonowa do chirurgii nawigowanej*
JDBGB	Tuleja szablonowa do chirurgii nawigowanej Peek*
JDBGP	Tuleja do wkładów*
JDPIN	Pin do mocowania

*Zamawiane osobno

**Punch do tkanek:**

JDTP35	Punch do tkanek Ø 3.5
--------	-----------------------

**Wiertła:**

JDGD20-060	Wiertło Ø 2.0 L 6.0
JDGD20-080	Wiertło Ø 2.0 L 8.0
JDGD20-100	Wiertło Ø 2.0 L 10.0
JDGD20-115	Wiertło Ø 2.0 L 11.5
JDGD20-130	Wiertło Ø 2.0 L 13.0
JDGD20-150	Wiertło Ø 2.0 L 15.0
JDGD24-060	Wiertło Ø 2.4 L 6.0
JDGD24-080	Wiertło Ø 2.4 L 8.0
JDGD24-100	Wiertło Ø 2.4 L 10.0
JDGD24-115	Wiertło Ø 2.4 L 11.5
JDGD24-130	Wiertło Ø 2.4 L 13.0
JDGD24-150	Wiertło Ø 2.4 L 15.0
JDGD28-060	Wiertło Ø 2.8 L 6.0
JDGD28-080	Wiertło Ø 2.8 L 8.0
JDGD28-100	Wiertło Ø 2.8 L 10.0
JDGD28-115	Wiertło Ø 2.8 L 11.5
JDGD28-130	Wiertło Ø 2.8 L 13.0
JDGD28-150	Wiertło Ø 2.8 L 15.0
JDGD32-060	Wiertło Ø 3.2 L 6.0
JDGD32-080	Wiertło Ø 3.2 L 8.0
JDGD32-100	Wiertło Ø 3.2 L 10.0
JDGD32-115	Wiertło Ø 3.2 L 11.5
JDGD32-130	Wiertło Ø 3.2 L 13.0
JDGD32-150	Wiertło Ø 3.2 L 15.0
JDGD36-060	Wiertło Ø 3.6 L 6.0
JDGD36-080	Wiertło Ø 3.6 L 8.0
JDGD36-100	Wiertło Ø 3.6 L 10.0
JDGD36-115	Wiertło Ø 3.6 L 11.5
JDGD36-130	Wiertło Ø 3.6 L 13.0
JDGD36-150	Wiertło Ø 3.6 L 15.0
JDGD42-060	Wiertło Ø 4.2 L 6.0
JDGD42-080	Wiertło Ø 4.2 L 8.0
JDGD42-100	Wiertło Ø 4.2 L 10.0
JDGD42-115	Wiertło Ø 4.2 L 11.5
JDGD42-130	Wiertło Ø 4.2 L 13.0
JDGD42-150	Wiertło Ø 4.2 L 15.0



JDGDP	Wiertło pilotujące
JDGD100	Wiertło z kontrastem*

*Nie jest zawarte w kasecie. Do zamówienia oddzielnie.



JD EXTRA DRILLS KIT

Kod produktu: JDKIT02

Kaseta JD Guided Surgery Extra Drills to kaseta, która zawiera wiertła do stosowania przy wszczepianiu implantów JDNasal oraz JDPterygo w protokole chirurgii nawigowanej.



**Wiertła:**

JDGD20-180	Wiertło Ø 2.0 L 18.0
JDGD20-200	Wiertło Ø 2.0 L 20.0
JDGD20-220	Wiertło Ø 2.0 L 22.0
JDGD20-240	Wiertło Ø 2.0 L 24.0
JDGD20-260	Wiertło Ø 2.0 L 26.0
JDGD24-180	Wiertło Ø 2.4 L 18.0
JDGD24-200	Wiertło Ø 2.4 L 20.0
JDGD24-220	Wiertło Ø 2.4 L 22.0
JDGD24-240	Wiertło Ø 2.4 L 24.0
JDGD24-260	Wiertło Ø 2.4 L 26.0



Z-GO GUIDE™ SURGICAL KIT

Kod produktu: JDKIT05


JDentalCare opracowało nowe rozwiązanie, które ułatwia podejście do chirurgii zygomatycznej.

Z-GO Guide™ to opatentowany system nawigowany, który wspiera lekarzy podczas trudnych i skomplikowanych przypadków związanych z implantami zygomatycznymi.

Zabiegi związane z użyciem implantów zygomatycznych należą do najbardziej skomplikowanych, dlatego są zwykle wykonywane przez wysoko wykwalifikowanych lekarzy. Niezwykle istotne jest, aby chirurg przeprowadził niezwykle dokładną procedurę, aby uzyskać doskonałe wyniki i uniknąć poważnych komplikacji.

Z-GO Guide™ to kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje przewodnik chirurgiczny wykonany z tytanu medycznego, zaprojektowany cyfrowo, produkowany przy użyciu technologii druku 3D; jest to możliwe dzięki zaawansowanym funkcjom oprogramowania JD-igital Guide (wspomaganego przez Real Guide™), które zostały specjalnie opracowane dla koncepcji Z-GO Guide™.

Nowoczesny, wspierany przez kość, przewodnik chirurgiczny, który pozwala na precyzyjne i przewidywalne przeprowadzenie chirurgii zygomatycznej. Dodatkowo dedykowana kasetka chirurgiczna Z-GO Guide™ umożliwi w pełni nawigowaną implantację zygomatyczną.

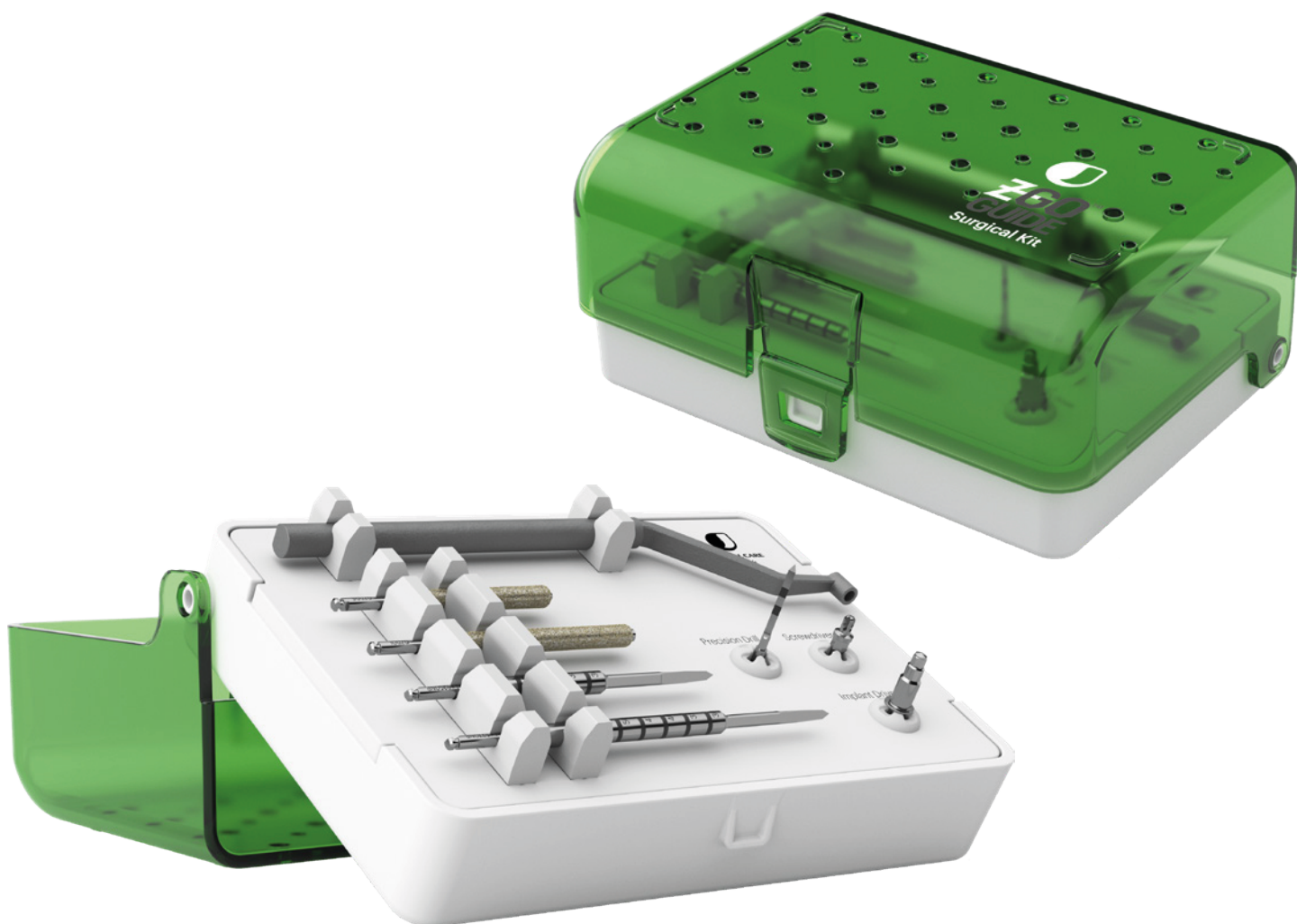

GO GUIDED

Koncepcja Z-GO Guide™ pochodzi z dostosowania najbardziej zaawansowanych funkcji oprogramowania JD-igital Guide (wspomaganego przez Real Guide™). Opracowane moduły oferują wszystko, co niezbędne do precyzyjnego planowania implantacji zygomaticznej, w pełni dostosowany projekt przewodnika chirurgicznego Z-GO Guide™, mający na celu zapewnienie przewidywalnej, dokładnej, bezpiecznej i minimalnie inwazyjnej chirurgii nawigowanej zygomaticznej.

GO SIMPLER

Uproszczona chirurgia zygomaticzną dzięki kasecie chirurgicznej Z-GO Guide™. Dedykowane nowe wiertła i narzędzia zostały opracowane do przeprowadzenia w całości nawigowanej procedury chirurgii zygomaticznej. Ta nowa kaseta, prosta i kompaktowa, współpracuje z zestawem JDZygoma Kit, aby zapewnić użytkownikowi maksymalną elastyczność.

GO SAFER

Większa precyzja i bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich pacjentów. Zaplanuj bezpieczny zabieg, korzystając z planowania cyfrowego i dedykowanych narzędzi chirurgicznych. Precyzyjny i przewidywalny protokół krok po kroku, który należy przestrzegać podczas wszystkich zabiegów zygomaticznych.

**Wiertła:**

JDDR102	Wiertło Z-GO Guide™
ZJDDREXS250NP	Wiertło Z-GO Guide™ Long 50
ZJDDREXS270NP	Wiertło Z-GO Guide™ Long 70
GZDDS	Wiertło diamentowe Z-GO Guide™
GZDDL	Wiertło diamentowe długie Z-GO Guide

**Narzędzia do implantów i protetyki:**

JDIDA	Adapter wiertła Z-GO Guide™
JDPD140	Wiertło diamentowe Z-GO Guide™
JDID115	Driver protetyczny Z-GO Guide™



JD PTERYGO SURGICAL KIT

Kod produktu: JDKIT04

Kaseta chirurgiczna JD Pterygo została specjalnie opracowana przez JDentalCare do umieszczania implantów w kości skrzydłowej.

Jest to kompletna i łatwa w użyciu kasetka, która zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do przeprowadzenia prawidłowej osteotomii i bezpiecznego osadzenia implantów JDPterygo i JDPterygo One.

Kaseta zawiera wszystkie narzędzia chirurgiczne i protetyczne kompatybilne z implantami JDPterygo i JDPterygo One.






Wiertła do protokołu bez nawigacji:

JDDRPT20	Wiertło Ø 2.0 JDPterygo
JDDRPT24	Wiertło Ø 2.4 JDPterygo
JDDR101	Wiertło Ø 2.8 JDPterygo
JDDRPT32	Wiertło Ø 3.2 JDPterygo



Narzędzia do implantów i protetyki:

JDID100	Wkrętak implantologiczny JD - JDPterygo	JDPterygo
EVSDPF60:	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 60 JDEvolution Plus	
JDID101	Wkrętak implantologiczny JD - JDPterygo One	JDPterygo One
EVSDPF60	Wkrętak protetyczny do JDTorque L 60	

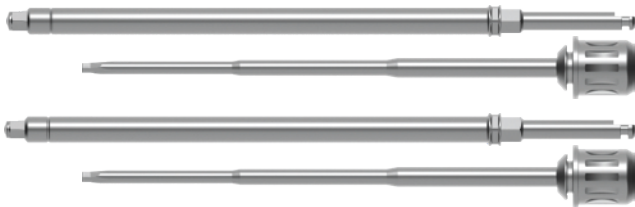

JDPterygo DRILLS KIT

Maxilla-For-All® Kits Kasety chirurgiczne

Kod produktu: JDKIT01


Zestaw wiertel JDPterygo zawiera wiertła specjalnie zaprojektowane do wprowadzania implantów JDPterygo oraz JDPterygo One w kość skrzydłową. Zestaw zawiera dłuższe wiertła, które umożliwiają odpowiednie przygotowanie kości w okolicy apeksu oraz platformy implantu. Te wiertła pozwalają na precyzyjną, bezpieczną i szybką osteotomię.



Wiertła:

JDDRPT20
JDDRPT24
JDDR101
JDDRPT32

Wiertło Ø 2.0 JDPterygo
Wiertło Ø 2.4 JDPterygo
Wiertło Ø 2.8 JDPterygo
Wiertło Ø 3.2 JDPterygo

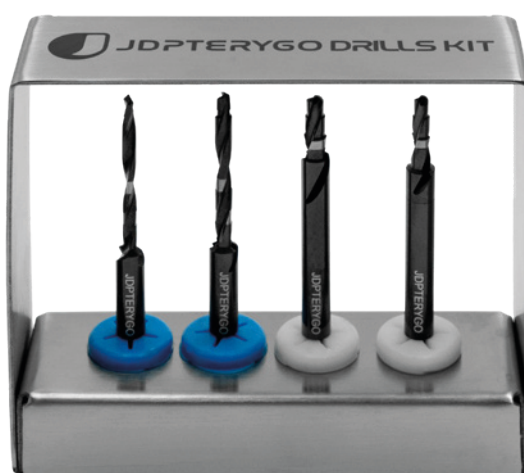

Kod produktu: JDNAK / JDNAKF

Zestaw JDNasal zawiera wiertła specjalnie zaprojektowane do wprowadzania implantów JDNasal. Te wiertła umożliwiają precyzyjną i szybką osteotomię.



Wiertła:

JDIDNA*	Wiertło pilotujące JDNasal
JDDR20L	Wiertło Ø 2.0 JDNasal
JDDR24L	Wiertło Ø 2.4 JDNasal
JDDRNA24*	Wiertło heliksowe Ø 2.4 JDNasal

*Uwaga: JDNAK składa się tylko z tych dwóch wiertel.




JDZYGOMA KIT


Kod produktu: ZSKITE - ZSKITF

Kaseta JDZygoma to kompletna i łatwa w użyciu kaseta chirurgiczna do umieszczania implantów w kości zygomatycznej. Kaseta zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do osadzania implantów JDZygoma oraz JDZygoma One. Kaseta JDZygoma dostępna jest w dwóch wersjach.



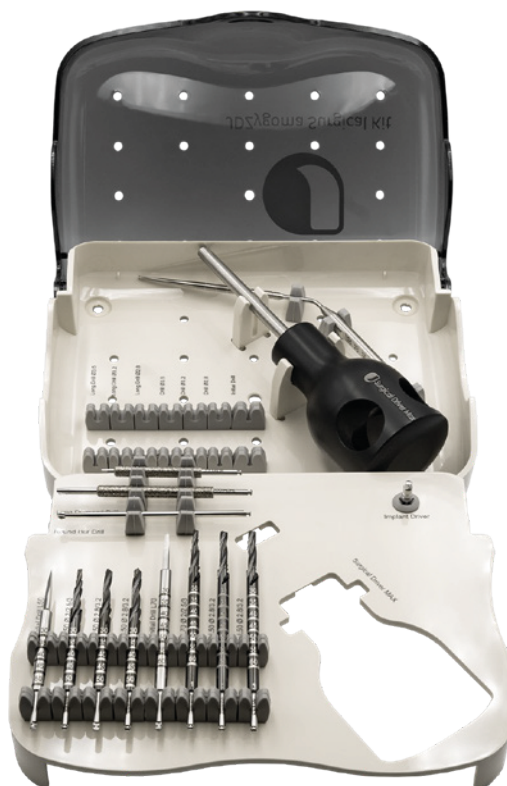

JDZygoma Kit Extra
Kod: ZSKITE

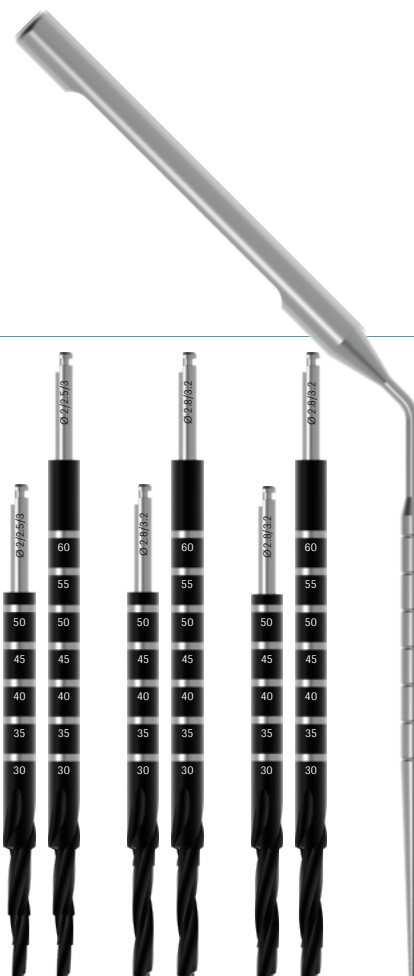

Wiertła do protokołu bez nawigacji:

JDDRZSF28	Wiertło okrągłe Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDREXS150NP	Wiertło pilotujące L 50 nowe profile JDZygoma
ZJDDREXS170NP	Wiertło pilotujące L 70 nowe profile JDZygoma
JDDIADR	Wiertło diamentowe JDZygoma
JDDIADRL	Wiertło diamentowe długie JDZygoma
ZJDDREXS150N	Wiertło zygomatyczne 1 L 50 - 3 ostrza
ZJDDREXS170N	Wiertło zygomatyczne 1 L 70 - 3 ostrza
ZJDDREXS250N	Wiertło zygomatyczne 2 L 50 - 3 ostrza
ZJDDREXS270N	Wiertło zygomatyczne 2 L 70 - 3 ostrza
ZJDDREXS350N	Wiertło zygomatyczne 3 L 50 - 3 ostrza
ZJDDREXS370N	Wiertło zygomatyczne 3 L 70 - 3 ostrza
JDZPR	Sonda głębokościowa 60mm JDZygoma



Narzędzia do implantów i protetyki:

EVID:	Driver implantów JDEvolution Plus
EVSUDMAX	Driver chirurgiczny Max JDEvolution





JDZygoma Kit Full
Kod: ZSKITF

Ta kaseta zawiera te same produkty, co kaseta JDZygoma Kit Extra, z dodatkowymi narzędziami:


Wiertła do protokołu bez nawigacji:

ZJDDRID50	Wiertło pilotujące L 50 JDZygoma
ZJDDR28	Wiertło Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDR28L	Wiertło długie Ø 2.8 JDZygoma
ZJDDR32	Wiertło Ø 3.2 JDZygoma
ZJDDR32L	Wiertło długie Ø 3.2 JDZygoma
ZJDDR36	Wiertło Ø 3.6 JDZygoma
ZJDDR36L	Wiertło długie Ø 3.6 JDZygoma



Kod produktu: JDG

JDGuide to narzędzie, które zapewnia prawidłowe umiejscowienie implantu przy technice Full Arch on 4: łatwe, szybkie i dokładne wsparcie, które czyni wszczepianie implantów coraz bezpieczniejszym dla rehabilitacji pełnego łuku. Szablon składa się z tytanowego paska, który można dopasować do kształtu łuku. Linie na przewodniku pozwalają zidentyfikować odpowiedni kąt do wprowadzenia implantu oraz zaprojektowania protetyki, umożliwiając przeprowadzenie dokładniejszej osteotomii.

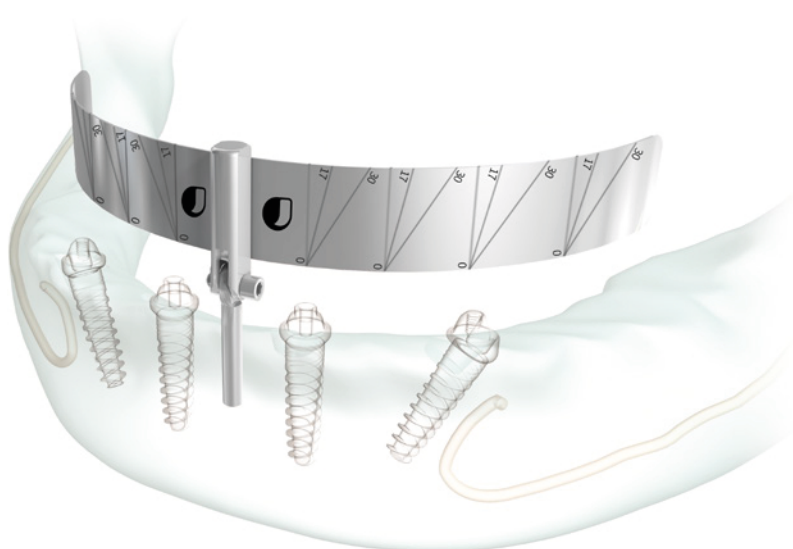

Przewodnik chirurgiczny to narzędzie, które wspomaga dentystę przy umieszczaniu czterech implantów, które wspierają natychmiastowo załadowane stałe protezy implantu pełnego łuku.

Dzięki innowacyjnym technikom nowoczesnej implantologii, obecnie do rehabilitacji całego łuku zębowego pacjentów bezzębnych lub osób z brakami skrzydłowymi wystarczy tylko cztery implanty.


W tych przypadkach dwa implanty są umieszczane pionowo w przedniej części, a pozostałe dwa implanty w tylnej części, pod maksymalnym kątem 30°. W przypadkach zaniku kości szczęki lub żuchwy, implanty ustawione pod kątem stanowią realną alternatywę dla podparcia kostnego.

Pacjenci bezzębni lub pacjenci z brakami skrzydłowymi mogą być leczeni stałą protezą opartą na czterech implantach, z których dwa są umieszczane pionowo w przedniej części, a dwa do kąta 30° w okolicy przedtrzonowcowej.


W przypadku stosowania w żuchwie, pochylanie implantów tylnych umożliwia uzyskanie dobrej stabilizacji w kości bez ingerencji w otwory nerwowe. W przypadku znacznej resorpcji szczęki, implanty ustawione pod kątem stanowią alternatywę dla augmentacji dna zatoki.




JDGuide jest umieszczany w osteotomii o średnicy 2 mm, wykonanej w linii środkowej szczęki lub żuchwy. Szablon również pomaga w odsunięciu języka w przypadkach dotyczących żuchwy. Linie na przewodniku służą jako punkt odniesienia do umieszczania równoległych implantów przednich oraz bocznych implantów pod kątem, prowadząc wiertło do prawidłowego umiejscowienia. Maksymalny kąt nachylenia wskazany na przewodniku dla wprowadzenia implantu wynosi 30°.

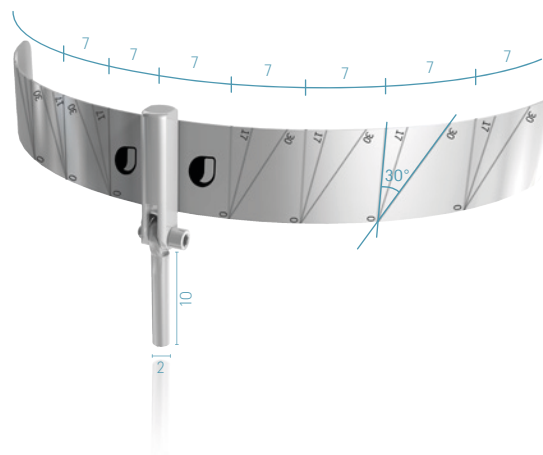


Procedury kliniczne dla żuchwy:

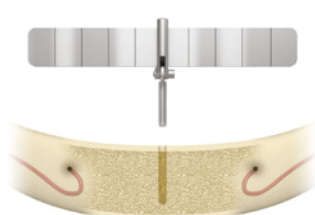


1. Wstawienie JDGuide
Po wykonaniu nacięcia w celu formowania płyta, wykonaj wiercenie na głębokość 10 mm używając wiertła Ø 2 mm. Umieść JDGuide w osteotomii.

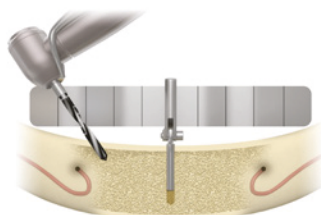

2. Przygotowanie tylnej części
Wierć do odpowiedniej głębokości używając wiertła Ø 2 mm, pochylając wiertło pod maksymalnym kątem 30°. Waznym jest identyfikacja nerwu bródkowego. Ostateczna pozycja implantu powinna znajdować się przed otworem, unikając pętli nerwowej.

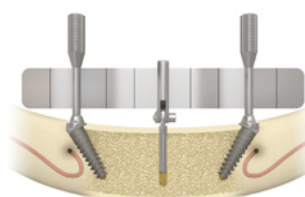


Uwaga: Jeśli to wskazane, użyj Bone Mill z Bone Mill Guide do usunięcia kości, która może utrudniać prawidłowe osadzenie łącznika. Umieść łącznik Multi-unit 30°. Wykonaj tę samą procedurę po przeciwnej stronie tylnej.

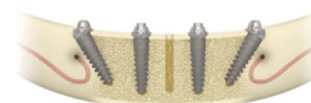


3. Przygotowanie przedniej części.
Wierć do odpowiedniej głębokości w przedniej części, używając wiertła Ø 2 mm, postępując zgodnie z pionowymi liniami JDGuide. Wstaw dwa równoległe implanty w okolicy siekaczy dolnych. Jeśli to wskazane, użyj Bone Mill z Bone Mill Guide do usunięcia kości, która może utrudniać prawidłowe osadzenie łącznika. Umieść łącznik Multi-unit.

Procedury kliniczne dla szczęki

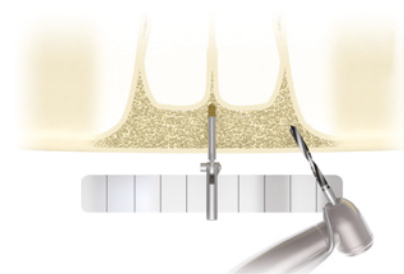

Aby przeprowadzić leczenie w szczęcie, wykonaj te same operacje, które zostały opisane powyżej dla przygotowania miejsc na implanty w żuchwie, zarówno w obszarze tylnym, jak i przednim.

Przed rozpoczęciem leczenia, ważne jest, aby najpierw zidentyfikować przednią ścianę zatoki.

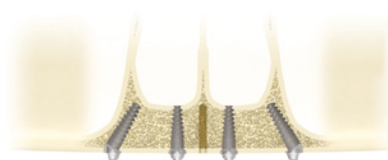

Dla przygotowania miejsca w tylnej części, rozpocznij przygotowanie w najbardziej oddalonej okolicy, zachowując około 4 mm od ściany zatoki.

Dla przygotowania miejsc pochylonych w tylnych i przednich częściach, pochyl wiertło tak, jak to możliwe, nigdy nie przekraczając kąta 30°, aby zniwelować wystający nadmiar.

JDTORQUE

Kod produktu: JDTW

Narzędzie JDTorque to ręczny klucz dynamometryczny produkowany przez JDentalCare, używany do ręcznego dokręcania i/lub odkręcania implantów oraz łączników JDentalCare, osiągając określoną wartość momentu obrotowego. Możliwe uzyskanie momentu obrotowego do 80 Ncm. Jego kształt, funkcjonalność, praktyczność oraz niska waga sprawiają, że narzędzie to jest łatwe w użyciu w codziennej praktyce.



Cechy produktu:

- Pomiar momentu obrotowego od 15 do 80 Ncm
- Możliwość dopasowania do wszystkich implantów i komponentów protetycznych JDentalCare za pomocą Adaptera protetycznego oraz Adaptera chirurgicznego do JDTorque
- Może być używany zarówno jako klucz dynamometryczny, jak i klucz raczet
- Narzędzie jest wielokrotnego użytku. Może być poddawane sterylizacji w autoklawach o temperaturze do 134°C, bez zmiany swoich właściwości
- Dla zachowania prawidłowej efektywności narzędzi chirurgicznych zaleca się maksymalnie 20-30 użyć
- Nie wymaga montażu, co oszczędza czas, także podczas zabiegów konserwacyjnych i serwisowych

Klucz dynamometryczny i adaptery:

JDTW	Klucz dynamometryczny JDTorque
JDTWA	Adapter chirurgiczny do JDTorque
JDTWAP	Adapter protetyczny do JDTorque



Profiler jest używany, gdy implant jest wstawiany kilka milimetrów poniżej grzbietu kości i występują trudności w osadzeniu łącznika. Celem młynów do kości jest usunięcie nadmiaru kości bez odkrywania implantu, który pozostanie całkowicie w kości.

Profiler do kości:

JDBMNNC	Bone Mill Ø 5.0 and Guide JDEvolution
JDBM6NC	Bone Mill Ø 6.0 and Guide JDEvolution
JDBMGNN	Bone Mill Guide JDEvolution
JDBMNNC:	Bone Mill Ø 5.0 and Guide JDEvolution Plus
JDBM6NC:	Bone Mill Ø 6.0 and Guide JDEvolution Plus
JDBMGNN:	Bone Mill Guide JDEvolution Plus
ESBM5C	Bone Mill Ø 5.0 and Guide JDEvolution S
ESBM6C	Bone Mill Ø 6.0 and Guide JDEvolution S
JDBM3	Bone Mill Guide JDEvolution S
ICBM5C.	Bone Mill Ø 5.0 and Guide JDIcon Plus
ICBM6C.	Bone Mill Ø 6.0 and Guide JDIcon Plus
ICBMG.	Bone Mill Guide JDIcon Plus



WYCINAKI DO TKANEK

Punch do tkanek służy do wycinania tkanek miękkich w miejscu implantacji. Jest przeznaczony do stosowania w technice bezpłatowego cięcia (flapless).

Punch do tkanek

JDTP30	Punch do tkanek Ø 3,0
JDTP35	Punch do tkanek Ø 3,5
JDTP42	Punch do tkanek Ø 4,2
JDTP50	Punch do tkanek Ø 5,0
JDTPG30	Przewodnik Punch do tkanek Ø 3,0
JDTPG35	Przewodnik Punch do tkanek Ø 3,5
JDTPG42	Przewodnik Punch do tkanek Ø 4,2
JDTPG50	Przewodnik Punch do tkanek Ø 5,0



CHIRURGICZNE ŚRUBOKRĘTY

Kod produktu: EVSUD - EVSUMAX

Narzędzia chirurgiczne

- EVSUD – Narzędzie chirurgiczne
- EVSUMAX – Narzędzie chirurgiczne Max

EVSUD Surgical Driver jest używane do ręcznego wprowadzania implantów JDentalCare w szczękę lub żuchwie podczas chirurgii implantów stomatologicznych. Charakteryzuje się sześciokątnym połączeniem, kompatybilnym ze wszystkimi narzędziami do implantów JDentalCare. Trzon wykonany jest ze stali nierdzewnej, a uchwyt jest anodowany na czarno.



EVSUDMAX Surgical Driver różni się od EVSUD Surgical Driver konstrukcją uchwytu. Uchwyt jest większy i zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić użycie przez klinicystę podczas wprowadzania implantów zygomatycznych.



WSKAŹNIKI KIERUNKU

Można sprawdzić orientację lub głębokość miejsca na implant w trakcie wiercenia, używając wskaźnika kierunku. Może być konieczne wykonanie badania rentgenowskiego w celu weryfikacji równoległości z innymi sąsiednimi zębami lub implantami. Wskaźniki kierunku są przydatne, gdy konieczne jest również skorygowanie kierunku wiercenia.

Wskaźniki kierunku:

JDDI	Wskaźnik kierunku
JDDIS	Wskaźnik kierunku krótki
JDDI17	Wskaźnik kierunku 17°
JDDI30	Wskaźnik kierunku 30°
JDDI45	Wskaźnik kierunku 45°
JDOD32P	Wskaźnik kierunku dla JDOD32
JDOD37P	Wskaźnik kierunku dla JDOD37
JDOD43P	Wskaźnik kierunku dla JDOD43
JDOD50P	Wskaźnik kierunku dla JDOD50




Zmniejszenie czasu na wybór odpowiedniego łącznika:

1. Umieść instrument do nowo wprowadzonego implantu.
2. Zmierz i wybierz odpowiedni łącznik z odpowiednim kątem (17°, 30°, 35°).

Instrumenty do wyrównywania łączników typu Multi-unit:

EVAMT	Instrument do wyrównywania łącznika typu Multi-unit JDEvolution
ESAMT	Instrument do wyrównywania łącznika typu Multi-unit JDEvolution S
JDID102	Narzędzie ZAPA
JDID105	Instrument do wyrównywania łącznika typu Multi-unit JDIcon Plus

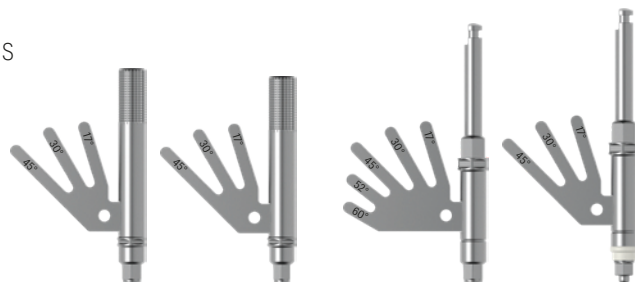

SONDY GŁĘBOKOŚCIOWE

Sondy głębokościowe JD zostały zaprojektowane, aby pomóc w sprawdzaniu głębokości osteotomii, prowadząc Cię krok po kroku. Pomagają one w znalezieniu odpowiedniej długości implantu.

Sondy głębokościowe:

JDNPR	Sonda głębokościowa 26 mm JDNasal
JDSPR	Sonda głębokościowa implantów stomatologicznych
JDZPR	Sonda głębokościowa 60 mm JDZygoma



NARZĘDZIA DO USUWANIA I NAPRAWY JD

Narzędzia do usuwania i naprawy JD obejmują:

- narzędzia do usuwania implantów;
- narzędzia do usuwania śrub;
- narzędzia do naprawy gwintów wewnętrznych.

EVIRT to narzędzie JDentalCare opracowane do usuwania implantów z wewnętrznym i zewnętrznym połączeniem.

Narzędzia do usuwania śrub obejmują EVCD, EVEX1 oraz EVEX2 i mogą być stosowane do usuwania złamanej śruby z implantu posiadającego wewnętrzne połączenie sześciokątne.




Narzędzie do usuwania implantów JD

Narzędzie do usuwania implantów EVIRT może być używane do usuwania implantów w przypadku periimplantitis lub gdy połączenie implantu jest uszkodzone i zwykle narzędzie do implantów nie może zostać użyte do jego usunięcia. Narzędzie EVIRT należy używać, ustawiając JDTorque w pozycji „out” i zaczynając obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Narzędzie EVIRT ma zewnętrzny sześciokąt, który należy połączyć z adapterem chirurgicznym JD-TWA.



Narzędzia do usuwania śrub JD


Narzędzia do usuwania śrub mogą być używane do usuwania złamanej śruby z implantu z wewnętrznym połączeniem sześciokątnym. Takie narzędzia są przydatne, gdy śruba protetyczna łącząca łącznik z implantem jest uszkodzona i nie można jej usunąć zwykłym śrubokrętem protetycznym. Aby usunąć złamaną śrubę z implantu, pod warunkiem, że nie została uszkodzona podczas poprzedniej próby usunięcia, należy włożyć urządzenie centrowania EVCD JDEvolution do implantu i spróbować zaangażować złamaną śrubę za pomocą wiertła EVEX1 Claw Drill zamontowanego na manualnym adapterze protetycznym JD-TWAPM, wywierając stały nacisk i obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

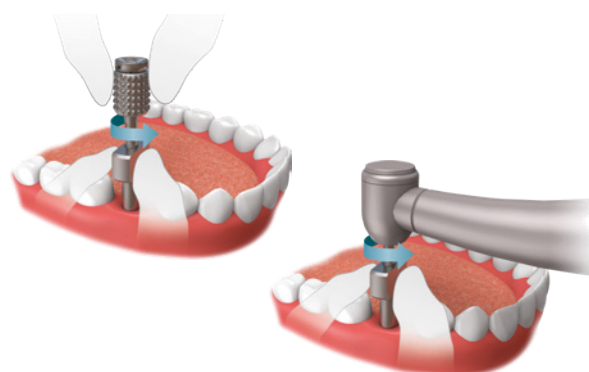

Jeśli złamana śruba jest zablokowana, umieść wiertło EVEX1 Claw Drill w narzędziu ręcznym. Ustaw obrót narzędzia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, nigdy nie przekraczając prędkości 600 rpm, i kontynuuj nacisk na złamaną śrubę, aby ją spłaszczyć. Po usunięciu wiertła EVEX1 Claw Drill, w jego miejsce należy włożyć wiertło EVEX2 Reverse cutting drill. Ustaw obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, nie przekraczając prędkości 600 rpm. Podczas operacji należy stosować irygację. Umieść wiertło EVEX2 Reverse cutting drill w urządzeniu centrowania EVCD, rozpocznij obrót wrzeciona, trzymaj je przez maksymalnie 3 sekundy na złamanej śrubie i zwolnij. Spowoduje to stopniowe zniszczenie złamanej śruby. Należy bezwzględnie zapewnić, aby urządzenie centrowania EVCD pozostało nieruchome podczas całej operacji, ponieważ jeśli EVCD się poruszy, EVEX2 może ulec uszkodzeniu. Po zniszczeniu śruby, wszelkie fragmenty lub resztki można usunąć z wnęki za pomocą powietrza, wody i/lub ssania.


Narzędzie do naprawy gwintów wewnętrznych JD

Narzędzie do naprawy gwintów wewnętrznych EVTR może być używane do naprawy gwintu wewnętrznego systemu w przypadku jego uszkodzenia. Może być używane z implantami JDEvolution. Instrument należy zamontować w manualnym adapterze protetycznym JD-TWAPM i, po włożeniu go do implantu do naprawy, należy przeprowadzić delikatne ruchy, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. To narzędzie należy używać wyłącznie ręcznie, bez użycia narzędzi ręcznych lub kąta prostego.

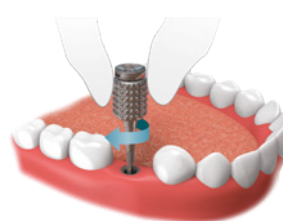

Narzędzia do usuwania i naprawy:

EVIRT	Narzędzie do usuwania implantów
EVCD	Urządzenie centrowania JDEvolution
EVEX1	Wiertło z pazurami
EVEX2	Wiertło z odwrotnym cięciem
EVTR	Narzędzie do naprawy gwintów wewnętrznych JDEvolution

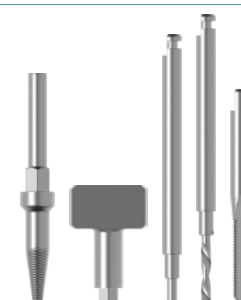

CHIRURGIA IMPLANTACJI NIEPROWADZONEJ

JDEvolution, JDEvolution Plus

ŚREDNICA IMPLANTU	WYGOJONA KOŚĆ		KOŚĆ POEKSTRAKCYJNA	
	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ
Przygotowanie miejsca w szczęce				
Ø 3,7	2,0 2,4 2,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 przy wejściu
Ø 4,0	2,0 2,4 2,8	2,0 2,4 2,8 3,2 do drugiego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 do drugiego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6-8mm 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm
Ø 6,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
Przygotowanie miejsca w żuchwie				
Ø 3,7	2,0 2,4 2,8 3,2 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu
Ø 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 3,6 do drugiego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm 4,0 do pierwszego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 8mm
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 4,0 do drugiego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 4,4 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu
Ø 6,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 4,8 do drugiego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 do drugiego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4



Krótki implant L 6mm JDEvolution Plus wszczepienie w szczęce

krótkie Ø 4,0 L 6	- Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 2.0mm i Ø 2.4mm - Zakończ przy użyciu wiertła Ø 4mm L 6mm kod JDDICS4
krótkie Ø 4,3 L 6	- Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 2.0mm i Ø 2.4mm - Zakończ przy użyciu wiertła Ø 4mm L 6mm kod JDDICS4
krótkie Ø 5,0 L 6	- Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 2.0mm i Ø 2.4mm - Zakończ przy użyciu wiertła Ø 4mm L 6mm kod JDDICS4D



Krótki implant L 6mm JDEvolution Plus wszczepienie w żuchwie

krótkie Ø 4,0 L 6	- Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 2.0mm, Ø 2.4mm i Ø 2.8mm - Zakończ przy użyciu wiertła Ø 4mm L 6mm kod JDDICS4D
krótkie Ø 4,3 L 6	- Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 2.0mm, Ø 2.4mm i Ø 2.8mm - Zakończ przy użyciu wiertła Ø 4mm L 6mm kod JDDICS4D
krótkie Ø 5,0 L 6	- Rozpocznij osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 2.0mm, Ø 2.4mm i Ø 2.8mm - Zakończ przy użyciu wiertła Ø 5mm L 6mm kod JDDICS5

Uwaga: wszystkie wymiary podane są w mm

CHIRURGIA IMPLANTACJI NIEPROWADZONEJ

JD Evolution S

ŚREDNICA IMPLANTU	MIĘKKA KOŚĆ TYP IV	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ TYP II-III	GĘSTA KOŚĆ TYP I
Ø 3,2	1,5 (2)	2,0 2,4	2,0 2,4 (2,8)

JDIcon, JDIcon Plus

		WYGOJONA KOŚĆ		KOŚĆ POEKSTRAKCYJNA	
ŚREDNICA IMPLANTU	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	
Przygotowanie miejsca w szczęce					
Ø 3,9	2,0 2,4 2,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 przy wejściu	 Krótki implant L 6mm JDIcon wszczepienie w szczęce
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6-8mm 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	
Przygotowanie miejsca w żuchwie					
Ø 3,9	2,0 2,4 2,8 3,2 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	 Krótki implant L 6mm JDIcon wszczepienie w żuchwie
Ø 4,3	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 4,0 do drugiego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 4,4 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu	
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu	

JDIcon Ultra S

ŚREDNICA IMPLANTU	MIĘKKA KOŚĆ TYP IV	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ TYP II-III	GĘSTA KOŚĆ TYP I
Ø 2,75	1,5 2,0	2,0 2,4	2,0 2,4 2,8 do pierwszego znacznika laserowego

JDIcon Plus T

ŚREDNICA IMPLANTU	WYGOJONA KOŚĆ		KOŚĆ POEKSTRAKCYJNA	
	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ
Przygotowanie miejsca w szczęcie				
Ø 3,5	2,0 2,4 2,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 przy wejściu
Ø 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6-8mm 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu
Ø 4,5	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu do pierwszego znacznika laserowego L 6mm
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu 4,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm
Przygotowanie miejsca w żuchwie				
Ø 3,5	2,0 2,4 2,8 3,2 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 3,6 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu
Ø 4,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 do drugiego znacznika laserowego L 8mm	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 do drugiego znacznika laserowego L 8mm 4,4 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm	2,0 2,4 2,8 3,2 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu
Ø 4,5	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu 4,0 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 przy wejściu
Ø 5,0	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,8 przy wejściu	2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 do pierwszego znacznika laserowego L 6mm

CHIRURGIA IMPLANTACJI NIEPROWADZONEJ

JD Bone Track

Podążaj za metodą BoneTrack – nowym podejściem, które uprości Twoją codzienną praktykę kliniczną. Wprowadź nieaktywną końcówkę wiertła JD BoneTrack do niedostatecznie przygotowanej osteotomii i przesun wiertło w stronę podniebienia, aby utworzyć ścieżkę w kości podniebiennej. W ten sposób powstanie prawidłowa przestrzeń dla ciała implantu, zapewniająca jego optymalne osadzenie.

ŚREDNICA IMPLANTU	PRZYGOTOWANIE W SZCZĘCE	PRZYGOTOWANIE W ŻUCHWIE
Ø 3,2	1.5 2.0 2.4 JD BoneTrack Drill 3.2	1.5 2.0 2.4 2.8 JD BoneTrack Drill 3.2
Ø 3,7	1.5 2.0 2.4 JD BoneTrack Drill 3.7	1.5 2.0 2.4 2.8 JD BoneTrack Drill 3.7
Ø 4,3	1.5 2.0 2.4 2.8 JD BoneTrack Drill 4.3	1.5 2.0 2.4 2.8 3.2 JD BoneTrack Drill 4.3
Ø 5,0	1.5 2.0 2.4 2.8 3.2 JD BoneTrack Drill 5.0	1.5 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 JD BoneTrack Drill 5.0





1. Zidentyfikuj anatomię żęboodu i rozpocznij wiercenie w kierunku kości podniebiennej.

Uwaga: Ostatnia standardowa średnica wiertła używanego do wstępnego przygotowania osteotomii zawsze odpowiada średnicy wierzchołka implantu, który ma być wprowadzony.



2. Wprowadź nieaktywną końcówkę wiertła JD BoneTrack do osteotomii i przesun wiertło w stronę podniebienia, aby utworzyć ścieżkę w kości podniebiennej.

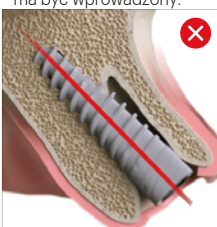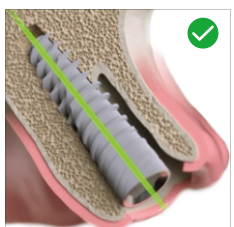

3. Wprowadź implant, pozostawiając odpowiednią przedsiolkową przestrzeń.

JD Onedrill

Maksymalna zalecana prędkość obrotowa wynosi 1200 obr./min, a chłodzenie odbywa się poprzez obfite nawadnianie roztworem fizjologicznym. Wiertła z zestawu JD Onedrill Kit zapewniają wydajne cięcie – zmniejszenie siły nacisku w dół pozwala wiertłu pracować bez drgań i szarpania.

Nie należy stosować ruchu pompującego podczas pracy wiertłami kształtującymi, jak ma to miejsce w przypadku standardowych wiertel spiralnych, ponieważ może to prowadzić do zniekształcenia osteotomii. Wiertło kształtujące powinno zostać wprowadzone do pełnej głębokości jednym płynnym ruchem, a następnie usunięte bez wykonywania ruchów powrotnych.

ŚREDNICA IMPLANTU	MIĘKKA KOŚĆ	GĘSTA KOŚĆ
Ø 3,2	wiertło pilotujące 3,2	wiertło pilotujące 3,2 3,7 do pierwszego laserowego oznaczenia
Ø 3,7	wiertło pilotujące 3,2 3,7 (opcjonalnie)	wiertło pilotujące 3,2 3,7 4,3 do pierwszego laserowego oznaczenia
Ø 4,3	wiertło pilotujące 3,2 3,7 4,3 (opcjonalnie)	wiertło pilotujące 3,2 3,7 4,3 5,0 do pierwszego laserowego oznaczenia
Ø 5,0	wiertło pilotujące 3,2 3,7 4,3 5,0 (opcjonalnie)	wiertło pilotujące 3,2 3,7 4,3 5,0

Ważne wskazówki dotyczące osteotomii:

Przy wszczepianiu implantu JDEvolution w kości typu IV należy niedostatecznie poszerzyć osteotomię – końcowa średnica wiertła powinna być o jeden rozmiar mniejsza od standardowo zalecanej. Przy wszczepianiu implantu JDEvolution w twardą kość (Typ I) nie należy ograniczać preparacji osteotomii. W takim przypadku końcowa średnica wiertła powinna być o jeden rozmiar większa od standardowo zalecanej, opcjonalnie do pierwszego laserowego oznaczenia. Pozwoli to uzyskać prawidłowy wymiar osteotomii w gęstej kości korowej, bez ryzyka jej niedostatecznego przygotowania.

JDPterygo

Ø 3,3




1. Rozpocznij osteotomię przy użyciu wiertła JDPterygo Ø 2.0 mm na taką samą długość, jak długość implantu, który ma być wprowadzony.




2. Zakończ osteotomię wiertłem JDPterygo Ø 2.8 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.


Ø 4,0

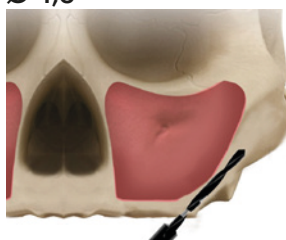

1. Rozpocznij osteotomię przy użyciu wiertła JDPterygo Ø 2.0 mm na taką samą długość, jak długość implantu, który ma być wprowadzony.

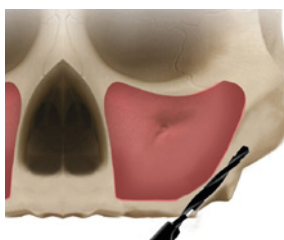

2. Kontynuuj przy użyciu wiertła JDPterygo Ø 2.4 mm na taką samą długość, jak długość implantu, który ma być wprowadzony.

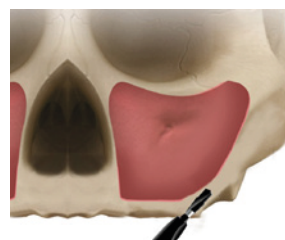

3. Zakończ osteotomię wiertłem JDPterygo Ø 3.2 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.

JDNasal: PRZYGOTOWANIE MIEJSCA KOTWICZENIA NOSOWEGO



1 - JDDR20L



2 - JDNPR



3 - JDDR24L




4 - JDDR28



5 - JDDR32



6 - JDDR36

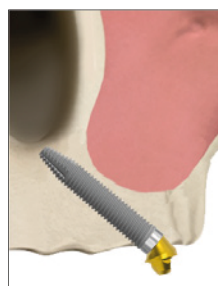


7 - implant

1. Rozpocznij przygotowanie miejsca za pomocą dłuższego wiertła Ø 2.0 mm JDNasal, wierząc przez kość grzbietową i docierając do warstwy korowej kości nosa.
2. W celu sprawdzenia głębokości łoża implantologicznego można użyć sondy o długości 26 mm. Znajomość dokładnej długości łoża ułatwia dobór odpowiedniego wszczepu.
3. Wierć do końcowej głębokości za pomocą dłuższego wiertła Ø 2.4 mm JDNasal.
4. Kontynuuj osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 2.8 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.
5. Kontynuuj osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 3.2 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.
6. Zakończ osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 3.6 mm na głębokość 6 mm przy wejściu.
7. Umieść implant, aż do osiągnięcia ostatecznej pozycji. Implant należy wprowadzić z momentem obrotowym między 25 Ncm a 80 Ncm.

Używane narzędzia:



JDNasal: PRZYGOTOWANIE MIEJSCA TRANS-ZATOKOWEGO

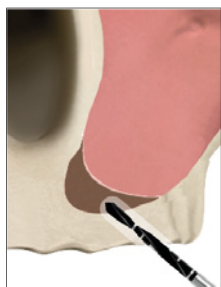

1 - JDDR20



2 - JDDR24



3 - JDDR28



4 - JDDR32



5 - JDIDNA




6 - JDNPR




7 - JDDRNA24



8 - JDDR36

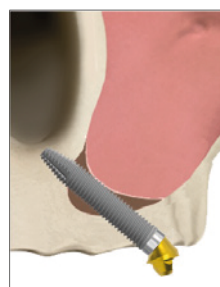

9A - implant

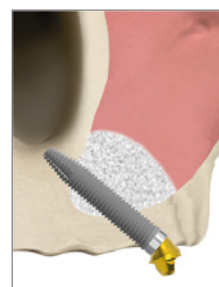

9B - implant + przeszczep kości

1. Należy wypreparować okienko w bocznej ścianie zatoki szczękowej i delikatnie odsunąć błonę Schneidera, unikając jej perforacji. Rozpocznij przygotowanie miejsca wszczepienia za pomocą standardowego wiertła spiralnego Ø 2.0 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej. Utrzymuj wiertło pod właściwym kątem w kierunku filaru kła.
2. Kontynuuj przy użyciu standardowego wiertła spiralnego Ø 2.4 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej.
3. Kontynuuj przy użyciu standardowego wiertła spiralnego Ø 2.8 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej.
4. Kontynuuj przy użyciu standardowego wiertła spiralnego Ø 3.2 mm, aby osiągnąć i przebić dno zatoki szczękowej.
5. Wprowadź wiertło początkowe JDNasal do wcześniej utworzonego kanału w kości. Wierć przez wyrostek zębodołowy, wewnątrz i poza zatoką, sięgając kości nosowej w miejscu odpowiadającym filarowi kła.
6. Użyj sondy głębokości 26 mm, aby zweryfikować głębokość miejsca i wspomóc klinicystę w wyborze implantu o odpowiedniej długości.
7. Użyj dłuższego wiertła Ø 2.4 mm JDNasal, aby wiercić tak jak poprzednio przez wyrostek zębodołowy, wewnątrz i poza zatoką, docierając do kości nosowej na końcowej głębokości w miejscu odpowiadającym filarowi kła.
- 8A. Zakończ osteotomię standardowym wiertłem spiralnym Ø 3.6 mm w wyrostku zębodołowym.
- 8B. W przypadku implantów o długości 28-30 mm zamiast punktów 5-6-7 użyj wiertła JDNasal TranZ Drill, wierząc przez wyrostek zębodołowy, wewnątrz i poza zatoką szczękową, docierając do kości nosowej przy filarze kła.
- 9A. Umieść implant i osiągnij ostateczną pozycję bez dodawania przeszczepu kości. Implant należy wprowadzić z momentem obrotowym między 25 Ncm a 80 Ncm.
- 9B. Opcjonalnie: umieść implant, osiągnij ostateczną pozycję i wprowadź przeszczep kości do zatoki. Implant należy wprowadzić z momentem obrotowym między 25 Ncm a 80 Ncm.




JDZygoma

Istnieją dwie procedury stosowania wiertel JDZygoma:


- Pierwsza to Standardowa Procedura, możliwa do wykonania przy użyciu pełnego zestawu ZSKITF.
- Druga to Procedura Extra Maxillaris, stosowana z wiertłami o stałej średnicy „3 Flutes”, które są dostępne w obu zestawach.

Cechą szczególną tych wiertel jest rozmiar średnicy niepracującej części, która pozostaje identyczna od wiertel diamentowych aż do wiertła nr 3. Dzieje się tak, ponieważ po utworzeniu wgłębienia przez wiertło diamentowe powstaje punkt podparcia dla kolejnego wiertła. Dzięki temu następne wiertło idealnie dopasowuje się do wcześniej przygotowanego kanału, co pozwala na precyzyjne prowadzenie osiowe.

JDZygoma Ø 3.9mm

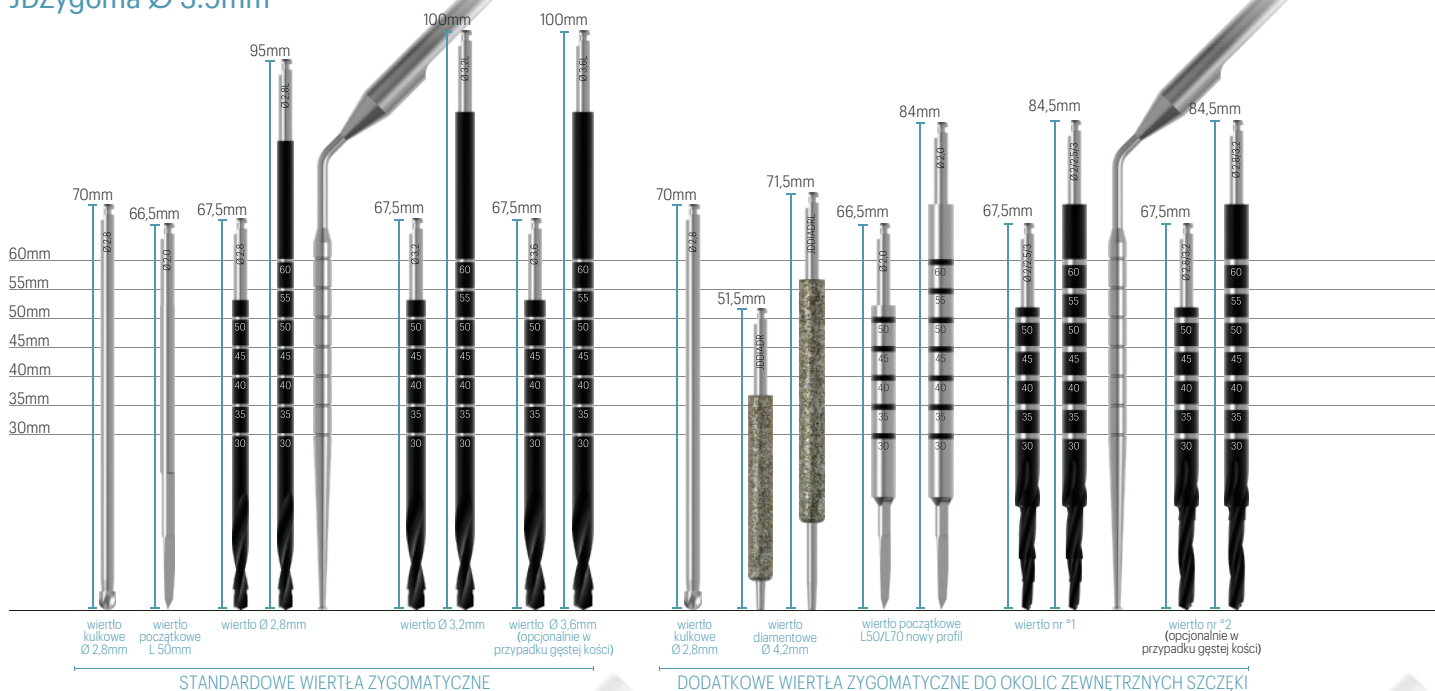

JDZygoma Ø 4.3mm

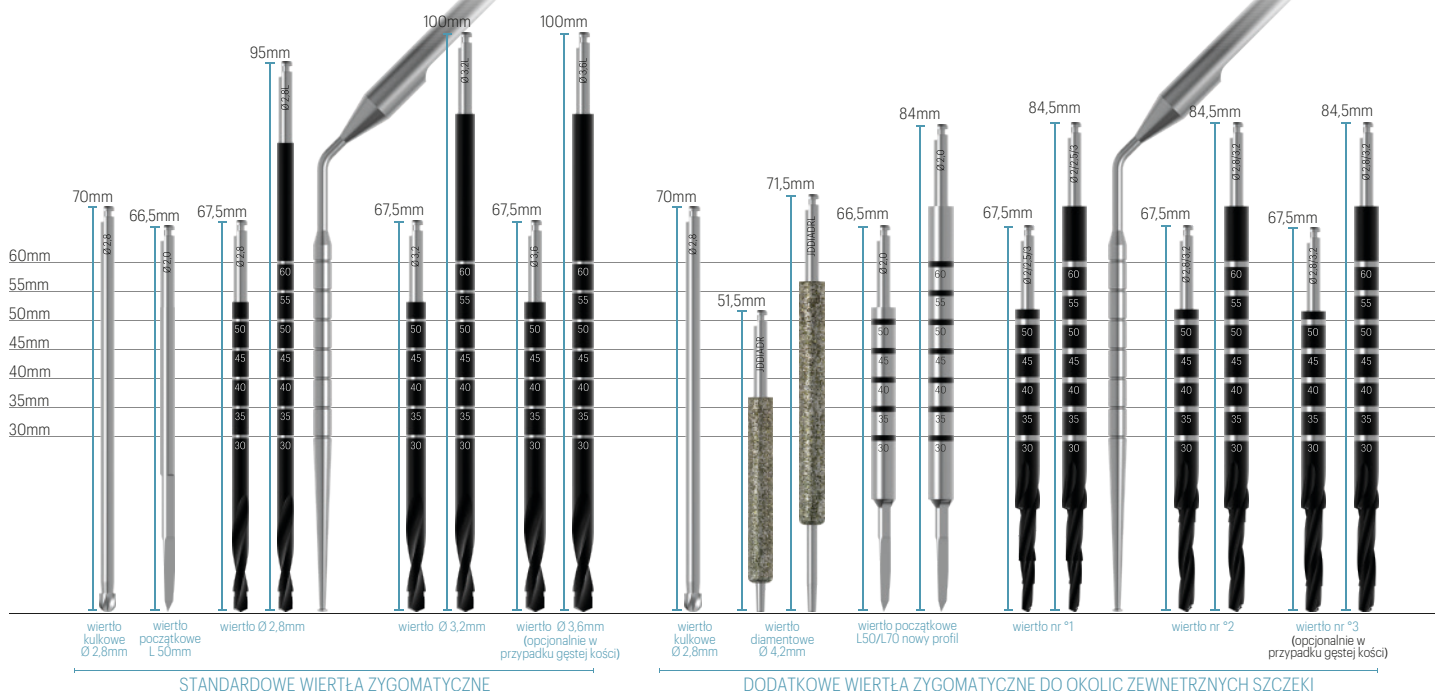

Uwaga: wszystkie wymiary podane są w mm

CHIRURGIA NAWIGOWANA

Poniższe protokoły wiercenia są zalecane do stosowania podczas wszczepiania implantów JDentalCare w technice chirurgii nawigowanej, przy użyciu oryginalnych instrumentów i szablonów chirurgicznych wyprodukowanych przez JDentalCare. Zaleca się ściśle przestrzeganie poniższej sekwencji wiercenia, aby zapewnić optymalną stabilizację pierwotną implantu.

JDEvolution, JDEvolution Plus, JDIcon, JDIcon Plus, JDIcon Plus T, JDOcta

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ IMPLANTU	Przygotowanie miejsca w szczęcie		Przygotowanie miejsca w żuchwie	
		MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ
Ø 3,7 / 3,9	L6	/	/	/	/
	L8	2,4 L6 - L8 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 - L8 3,6 L6
	L10	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6
	L11,5	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6
	L13	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,6 L6
	L15	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6
	L18	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6
Ø 4,0 / 4,3	L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6 4,2 L6
	L8	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 - L8 3,6 L6 - L8 4,2 L6
	L10	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6
	L11,5	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 4,2 L6
	L13	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 4,2 L6
	L15	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 4,2 L6
	L18	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 4,2 L6

Uwaga: wszystkie wymiary podane są w mm

JDEvolution, JDEvolution Plus, JDIcon, JDIcon Plus, JDIcon Plus T, JDOcta

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ IMPLANTU	Przygotowanie miejsca w szczęcie		Przygotowanie miejsca w żuchwie	
		MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ
Ø 5,0	L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 2,8 L6 3,2 L6 3,6 L6 4,2 L6	/
	L8	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 - L8 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 - L8 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6 - L8 3,6 L6 - L8 4,2 L6	/
	L10	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6 - L8 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6 - L8 - L10 3,6 L6 4,2 L6	/
	L11,5	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,6 L6 - L8 4,2 L6	/
	L13	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,6 L6 - L8 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	/
	L15	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	/
	L18	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 4,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,6 L6 - L8 - L10 - L11,5 4,2 L6	/

CHIRURGIA NAWIGOWANA

JDIcon Ultra S

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ IMPLANTU	MIĘKKA KOŚĆ TYP IV	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ TYP II-III	GĘSTA KOŚĆ TYP I
Ø 2,75	L6	/	/	/
	L8	2,0 L6 - L8	2,0 L6 - L8 2,4 L6 - L8	2,0 L6 - L8 2,4 L6 - L8 2,8 L6
	L10	2,0 L6 - L8 - L10	2,0 L6 - L8 - L10 2,4 L6 - L8 - L10	2,0 L6 - L8 - L10 2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6
	L11,5	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8
	L13	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8

JDEvolution S

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ IMPLANTU	Przygotowanie miejsca w szczęcie		Przygotowanie miejsca w żuchwie	
		MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ	MIĘKKA KOŚĆ	ŚREDNIO-GĘSTA KOŚĆ
Ø 3,2	L6	/	/	/	/
	L8	2,4 L6 - L8 2,8 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 2,8 L6 - L8 3,2 L6
	L10	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 2,8 L6 - L8 - L10 3,2 L6
	L11,5	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 3,2 L6
	L13	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6
	L15	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 3,2 L6	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6

JD Pterygo

	ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ IMPLANTU
Ø 3,3	L13	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 2,4 L6 2,8 L6 (tylko do gęstej kości)
	L15	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 2,4 L6 2,8 L6 (tylko do gęstej kości)
	L18	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 2,4 L6 2,8 L6 (tylko do gęstej kości)
	L20	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 2,4 L6 2,8 L6 (tylko do gęstej kości)
Ø 4,0	L13	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 3,2 L6
	L15	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 3,2 L6
	L18	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 3,2 L6
	L20	2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 3,2 L6

JDNasal

ŚREDNICA IMPLANTU	DŁUGOŚĆ IMPLANTU	
Ø 4,0	L20	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20
		2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20
		2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13
		3,2 L6 - L8 - L10
	3,6 L6	
	L22	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22
		2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22
		2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13
		3,2 L6 - L8 - L10
	3,6 L6	
	L24	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24
		2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24
		2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13
		3,2 L6 - L8 - L10
	3,6 L6	
	L26	2,0 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 - L26
2,4 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13 - L15 - L18 - L20 - L22 - L24 - L26		
2,8 L6 - L8 - L10 - L11,5 - L13		
3,2 L6 - L8 - L10		
3,6 L6		


JDZygoma

Zaleca się ściśle przestrzeganie poniższej sekwencji wiercenia w celu zapewnienia optymalnej stabilizacji pierwotnej implantów.

1. Zaznacz obszar okna na ścianie zatoki.
2. Użyj wiertła kulistego JDDRZSF28* do utworzenia okna w ścianie zatoki, aby odseparować błonę bez jej uszkodzenia. Umieść szablon chirurgiczny i zamocuj go.
3. Przygotuj otwory pilotowe za pomocą wiertła precyzyjnego JDDR102, a następnie wprowadź spersonalizowane śruby**, używając śrubokręta JDPD140.
4. Rozpocznij osteotomię, używając wiertel diamentowych GZDDL i GZDDS do stworzenia miejsca na ciało implantu w kości szczęki. Prowadź wiertło ruchem przedśionkowo-podniebiennym.
5. Umieść adapter wiertła początkowego JDIDA w tulei wierzchołkowej.
6. Rozpocznij perforację kości jarzmowej, używając wiertel Initial Drill ZJDDRES250NP i ZJDDREXS270NP. Wiertło będzie prowadzone przez tuleje koronową i wierzchołkową, automatycznie zatrzymując się po osiągnięciu adaptera wiertła początkowego.
7. Kontynuuj osteotomię, używając wiertła jarzmowego 1*, wiertła jarzmowego 2* i wiertła jarzmowego 3*, aby stworzyć idealne łóżce dla implantu.
8. Sprawdź odpowiednią długość implantu, używając głębokościomierza (Depth Probe*).
9. Wprowadź implant JDZygoma, używając implantodrywa JDID115 z JD Surgical Driver Max*.

*Wiertła i instrumenty znajdują się w kasecie JDZygoma Surgical Kit. Dostępne do zamówienia osobno.

**Śruby zostaną dołączone do przesyłki wraz z szablonem chirurgicznym.

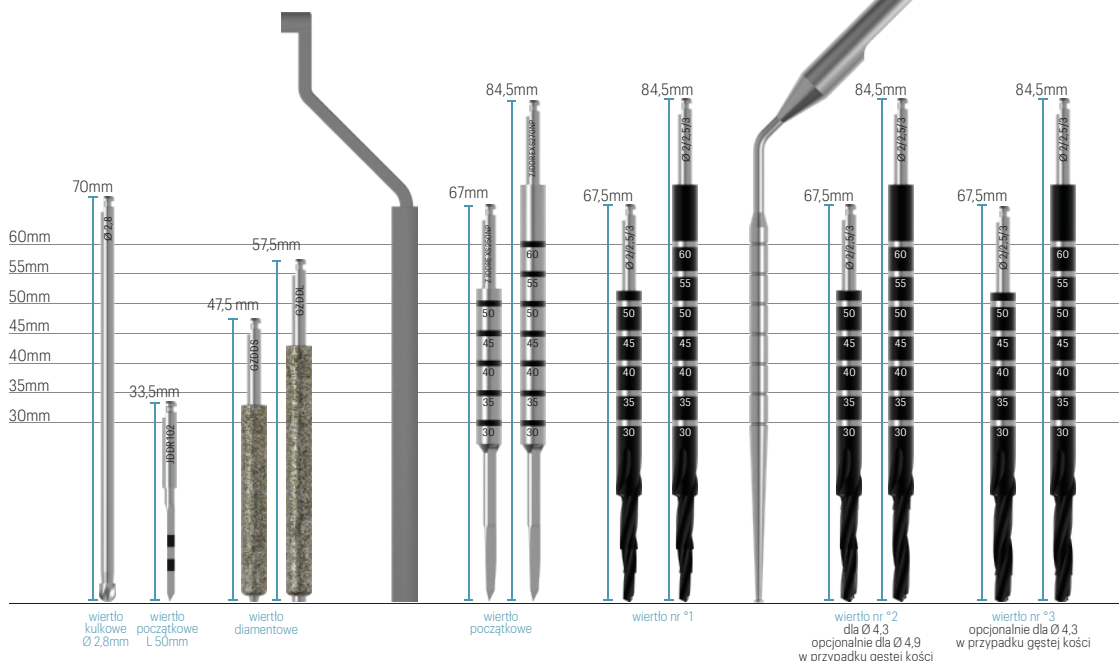

Uwaga: wszystkie wymiary podane są w mm

WSZYSTKIE WIERTŁA

WIERTŁA I
KASETY CHIRURGICZNE

STANDARDOWE KASETY CHIRURGICZNE



EVPS

EVPCN

JDPS

JDPCN

JDBTK

JDODK

JDPad Surgical Kit

JDPad Surgical Kit
ze stoperami wiertel

JD Surgical Plastic
Kit Standard

JD Surgical Plastic
ze stoperami wiertel

JD Bone Track™
Drills Kit

JD Onedrill Kit

Wiertła spiralne

JDDR20
JDDR24
JDDR28
JDDR32
JDDR36
JDDR40
JDDR44
JDDR48

•
•
•
•
•
•
•
■

•
•
•
•
•
•
•
■

Wiertła spiralne
ze stoperami

JDDR20C
JDDR24C
JDDR28C
JDDR32C
JDDR36C
JDDR40C
JDDR44C
JDDR48C

•
•
•
•
•
•
•
■

•
•
•
•
•
•
•
■

Wiertła precyzyjne

JDPD
JDGDP
JDDR102

•

•

•

•

Przedłużka wiertel

JDDREXT

•

•

•

•

•

Bone Track
Wiertła diamentowe

JDDIADR32
JDDIADR37
JDDIADR43
JDDIADR50

•
•
•
•

Wiertła do
implantów

JDOD32
JDOD37
JDOD43
JDOD50

•
•
•
•

Wiertła do
chirurgii
nawigowanej

JGD100
JGD20-060
JGD20-080
JGD20-100
JGD20-115
JGD20-130
JGD20-150
JGD20-180
JGD20-200
JGD20-220
JGD20-240
JGD20-260
JGD24-060
JGD24-080
JGD24-100
JGD24-115
JGD24-130
JGD24-150
JGD24-180
JGD24-200
JGD24-220
JGD24-240
JGD24-260

[illegible]

- Zawarte w kasecie

▲ Dostarczone w kasie, kompatybilne z wybraną linią implantów

■ Nie zawarte w kasecie – dostępne do zamówienia osobno

WSZYSTKIE WIERTŁA

WIERTŁA I
KASETY CHIRURGICZNE

STANDARDOWE KASETY CHIRURGICZNE



EVPS

EVPCN

JDPS

JDPCN

JDBTK

JDODK

JDPad Surgical Kit

JDPad Surgical Kit
ze stoperami wiertel

JD Surgical Plastic
Kit Standard

JD Surgical Plastic
ze stoperami wiertel

JD Bone Track™
Drills Kit

JD Onedrill Kit

Wiertła do
chirurgii
nawigowanej

JDGD28-060
JDGD28-080
JDGD28-100
JDGD28-115
JDGD28-130
JDGD28-150
JDGD32-060
JDGD32-080
JDGD32-100
JDGD32-115
JDGD32-130
JDGD32-150
JDGD36-060
JDGD36-080
JDGD36-100
JDGD36-115
JDGD36-130
JDGD36-150
JDGD42-060
JDGD42-080
JDGD42-100
JDGD42-115
JDGD42-130
JDGD42-150

Wiertła JDPTerygo

JDDRPT20
JDDRPT24
JDDR101
JDDRPT32

Wiertła do zatoki
(Nasal)

JDDR20L
JDDR24L

Wiertło Helix Nasal

JDDRNA24

Wiertła
diamentowe

JDDIADR
JDDIADRL
GZDDS
GZDDL

Wiertła
pilotujące

ZJDDREXS250NP
ZJDDREXS270NP
ZJDDRID50
ZJDDREXS150NP
ZJDDREXS170NP
JDID
JDIDNA

Wiertło okrągłe

JDDRZSF28

Wiertła
JDZygoma

ZJDDR28
ZJDDR28L
ZJDDR32
ZJDDR32L
ZJDDR36
ZJDDR36L

Wiertła jarzmowe
3 Flutes

ZJDDREXS150N
ZJDDREXS170N
ZJDDREXS250N
ZJDDREXS270N
ZJDDREXS350N
ZJDDREXS370N

[illegible]

- Zawarte w kasecie

▲ Dostarczone w kasecie, kompatybilne z wybraną linią implantów

■ Nie zawarte w kasecie – dostępne do zamówienia osobno

WSZYSTKIE NARZĘDZIA

WIERTŁA I KASETY CHIRURGICZNE		STANDARDOWE KASETY CHIRURGICZNE					
							
		EVPS	EVPCN	JDPS	JDPCN	JDBTK	JDODK
		JDPad Surgical Kit	JDPad Surgical Kit ze stoperami wiertel	JD Surgical Plastic Kit Standard	JD Surgical Plastic ze stoperami wiertel	JD Bone Track™ Drills Kit	JD Onedrill Kit
Klucze do implantów	EVID	▲	▲	▲	▲		
	EVIDL	▲	▲	▲	▲		
	EVID:	▲	▲	▲	▲		
	EVIDL:	▲	▲	▲	▲		
	ESID	▲	▲	▲	▲		
	ESIDL	▲	▲	▲	▲		
	ICID	▲	▲	▲	▲		
	ICIDL	▲	▲	▲	▲		
	ISID	▲	▲	▲	▲		
	ISIDL	▲	▲	▲	▲		
	ICID:	▲	▲	▲	▲		
	ICIDL:	▲	▲	▲	▲		
	OCID	▲	▲	▲	▲		
	OCIDL	▲	▲	▲	▲		
	OCIDW	▲	▲	▲	▲		
	OCIDLW	▲	▲	▲	▲		
	OCIDN	▲	▲	▲	▲		
	OCIDLN	▲	▲	▲	▲		
	JDIHD	▲	▲	▲	▲		
	JDIHDL	▲	▲	▲	▲		
	JDID30	▲	▲	▲	▲		
	JDID100	▲	▲	▲	▲		
	JDID101	▲	▲	▲	▲		
JDID116							
JDID111							
JDID115							
Wkrętak protetyczny	EVSDPF15	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF20	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF25	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF35	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF60	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF15:	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF20:	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF25:	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF35:	▲	▲	▲	▲		
	EVSDPF60:	▲	▲	▲	▲		
	EVSDP25						
	JDPD140						
Adapter do wiertła początkowego JDIDA							
Wkrętak do chirurgii nawigowanej EVIDG							
Sonda głębokości	JDZPR						
Wskaźniki kierunku	JDDI	●	●	●	●		
	JDDIS	●	●	●	●		
	JDOD32P						●
	JDOD37P						●
	JDOD43P						●
JDOD50P						●	
Stopery	JDDRST60N		●		●		
	JDDRST80N		●		●		
	JDDRST100N		●		●		
	JDDRST115N		●		●		
	JDDRST130N		●		●		
JDDRST150N		●		●			

[illegible]

- Zawarte w kasecie

▲ Dostarczone w kasecie, kompatybilne z wybraną linią implantów

■ Nie zawarte w kasecie – dostępne do zamówienia osobno.

WSZYSTKIE NARZĘDZIA

WIERTŁA I
KASETY CHIRURGICZNE

		STANDARDOWE KASETY CHIRURGICZNE					
							
		EVPS	EVPCN	JDPS	JDPCN	JDBTK	JDODK
		JDPad Surgical Kit	JDPad Surgical Kit ze stoperami wiertel	JD Surgical Plastic Kit Standard	JD Surgical Plastic ze stoperami wiertel	JD Bone Track™ Drills Kit	JD Onedrill Kit
Pin mocujący	JDPIN						
Punch do tkanek	JDTP35						
Implant Mounter	EVGMC						
	EVGMLC						
	ESGMC						
	ESGMLC						
	ICGMC						
	ICGMC.						
	ICGMLC.						
	ISGMC						
Tuleje chirurgiczne	JDBG						
	JDBGB						
	JDBGP						
Klucz chirurgiczny	EVSUDMAX						
Klucz dynamometryczny JD <i>Torque</i>	JDTW						
	JDTWA						

CHIRURGIA NAWIGOWANA			MAXILLA-FOR-ALL®				
							
JDGSK	JDKIT02	JDKIT05	JDKIT04	JDKIT01	JDNAKF	ZSKITE	ZSKITF
JD Guided Surgery Kit	JD Extra Drills Kit	Z-GO Guide™ Surgical Kit	JD Pterygo Surgical Kit	JDPterygo Drills Kit	JD Nasal Kit	JD Zygoma Kit Extra	JD Zygoma Kit Full
●							
●							
▲							
▲							
▲							
▲							
▲							
▲							
▲							
■							
■							
■							
						●	●

● Zawarte w kasiecie

▲ Dostarczone w kasiecie, kompatybilne z wybraną linią implantów

■ Nie zawarte w kasiecie – dostępne do zamówienia osobno.

[illegible]

[illegible]



www.biogentech.pl